

DIAGNOdent® pen 2190

Mode d'emploi simplifié

Sélectionner la place de
mémoire de la sonde:

MENU

Presser 2 fois
cette touche

>>



>>



Presser une
fois la touche

Réglage des sondes avec référence:


MENU

Presser

>>




>>

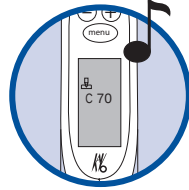


Regarder l'écran d'affichage
jusqu'à ce que la valeur de
référence s'affiche et qu'un
signal sonore soit émis.

>>

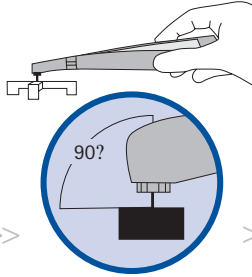

Continuer de maintenir le
tip appuyé sur l'étalon
jusqu'à ce que ...


>>

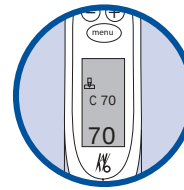


... le signal sonore s'arrête.
L'étalonnage est
terminé.

Régler individuellement pour chaque patient:

On repère un endroit sans carie – On actionne pendant
3 secondes le bouton correspondant

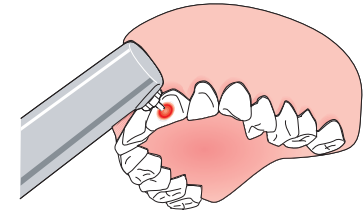

Tip occlusal

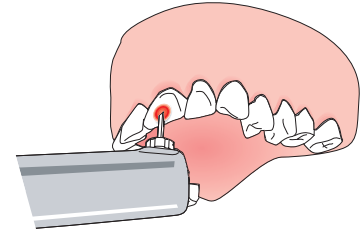

Tip interproximal



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß
Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com



Nous attirons votre attention sur le fait que ce mode d'emploi n'étant que simplifié, il décrit uniquement les principales fonctions utilisateur. Avant d'utiliser vous-même (ou d'autres personnes) cet appareil pour la première fois, veuillez par conséquent bien en lire le mode d'emploi intégral qui vous a été fourni avec.

① *Nettoyage dentaire professionnel*

Élimination de tous les dépôts
(durs ou mous):

Détartrage SONICflex,
instruments à main, air-abrasion
PROPHYflex + PROPHYpearls,
DURAtec 2933

② *Examen avec DIAGNOdent pen 2190*

caries des sillons

Valeur: 0 – 12

Dent saine

caries des sillons

Valeur: 13 – 24

Début de déminéralisation

caries des sillons

Valeur: > 25

Déminéralisation très avancée

Valeur: 0 – 7

caries proximales

Valeur: 8 – 15

caries proximales

Valeur: > 16

caries proximales

③ *Diagnostic par le praticien*

rien à signaler

monitorage

Radiographie, test bactéries
cariogènes, Test salivaire

④ *Mesures*

**mesures
prophylactiques intensives**

**mesures prophylactiques intensives
lutte antibactérienne locale**

**Intervention peu invasive
(„a minima“)**

Risque minime

Dentifrice au fluor

fluoridation,
KaVo HealOzone,
Chlorhexidine

Risque élevé

KaVo HealOzone, RONDoflex,
SONICflex micro,
Obturation avec un composite,
mesures prophylactiques intensives