



# Kort betjeningsvejledning

- ① **Tast til omdrejningstal:** Start motor / forøg omdrejningstal.
- ② **Tast til kølemiddel:** Der kan indstilles 2 driftstyper for tasten til kølemiddel de følgende funktioner:  
Kort tryk - tænd/sluk for kølemiddelflow *eller*  
kort tryk - indstilling af kølemiddelflow fra 0 til 110 ml/s (4 trin).  
Langt tryk - aktivering af manuel skyllefunktion.
- ③ **Programtast:** Kort tryk - programtrin frem.  
Langt tryk - programtrin tilbage.
- ④ **Tast for motoromdrejningsretning:** Indstilling af motoromdrejningsretning.

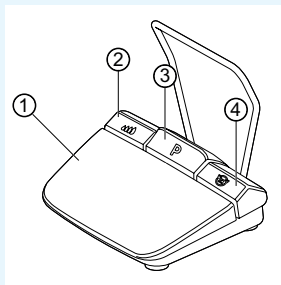

## Tilslutning af slangesæt

1. Luk slangeklemmen ⑦.
2. Fastgør kølemiddelslangen  
① på hånd- eller vinkelstykket.
3. Fastgør clipsene ②, så de sidder tæt op til motorledningen.
4. Sæt slangeadapteren ③ i indgreb.
5. Indsæt slangen i pumpen (overhold ca. 1 cm afstand mellem konektor og pumpeindgang).
6. Indstik indstiksnålen ⑥.
7. Åbn slangeklemmen ⑦.

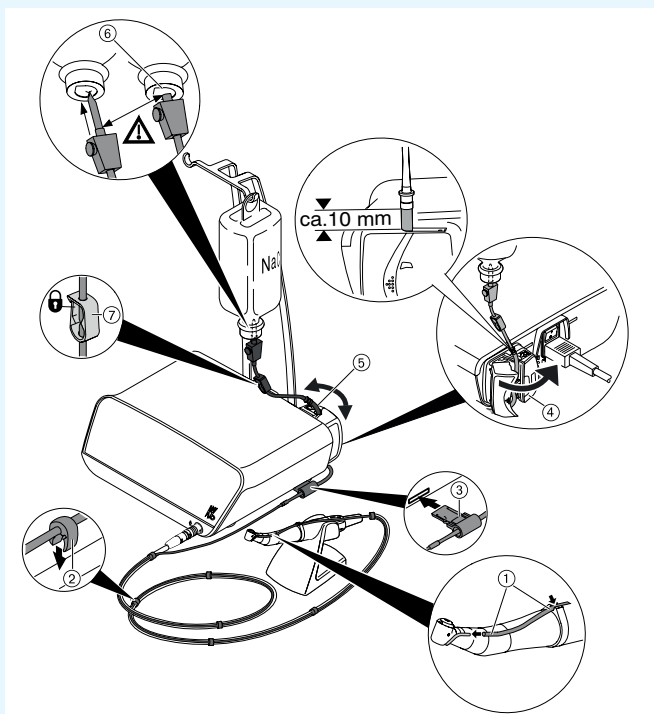

### Henvisning


Ventilationen ved indstiksnålen ⑥ åbnes kun ved glasflasker.



### FORSIGTIG

Denne korte betjeningsvejledning beskriver kun de vigtigste funktioner. Inden første ibrugtagning samt når betjeningen udføres af personer, som ikke er fortrolige med omgang med dette medicinske produkt, skal brugsanvisningen, der hører til leveringsomfanget, ubetinget læses og forstås.



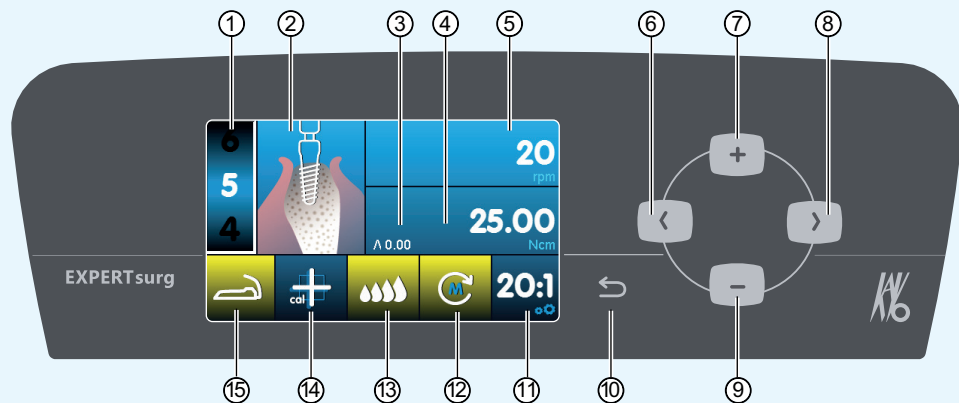

- ① Programtrin (1 til maks. 10)
- ② Visning af aktivitet (kan vælges separat for hvert enkelt programtrin)
- ③ Maksimalt forekommende drejningsmomentt
- ④ Begrænsning af drejningsmoment
- ⑤ Omdrejningstal
- ⑥ Piletast til venstre
- ⑦ Plustast, forøgelse af værdi
- ⑧ Piletast til højre
- ⑨ Minustast, formindskelse af værdi
- ⑩ Tilbagetast (kort tryk: tilbage) (langt tryk: apparatindstillinger)
- ⑪ Gearing
- ⑫ Motorens omdrejningsretning
- ⑬ Indstilling af kølemiddelpumpe
- ⑭ Aktivering af one-touch-kalibrering (til nøjagtig bestemmelse af drejningsmomentet)
- ⑮ Statusvisning, fodbetjening

## Ændring af parameter og aktivitet

### Valg af apparatindstilling

Tryk kort på tilbagetasten ⑩ for at gå til valg af programtrin. Tryk i længere tid for at kalde apparatindstillinger frem.

### Valg af parameter eller aktivitet

(piletast til venstre ⑥ eller piletast til højre ⑧)

### Ændring af parameter eller aktivitet

(plustast ⑦, minustast ⑨ eller fodkontakter)

Lagring foretages automatisk, når parameteret eller aktiviteten forlades.

### Begrænsning af antallet af programtrin

Vælg programtrin efter det senest ønskede programtrin, og vælg aktiviteten „Flag“.

### Ophævelse af begrænsning for programtrin

Vælg programtrin med aktiviteten „Flag“, og vælg ny aktivitet.

