



# Lyhyt käyttöohje

- ① **Kierroslukupainike:** Käynnistä moottori / nosta kierroslukua.
- ② **Jäähdytysainepainike:** Jäähdytysainepainiketta varten voidaan asettaa 2 eri käyttötapaa. Asetetusta käytettävästä riippuen jäähdytysainepainikkeella on seuraavat toiminnot:  
Paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän kytkeminen päälle/pois päältä *tai*  
paina painiketta lyhyesti - jäähdytysaineen syöttömäärän säätö välille 0 ... 110 ml/s (4 vaihetta).  
Paina painiketta kauan - manuaalisen huuhtelutoiminnon aktivointi.
- ③ **Ohjelmointipainike:** Paina painiketta lyhyesti - ohjelmavaihe siirtyy eteenpäin. Paina painiketta kauan - ohjelmavaihe siirtyy taaksepäin.
- ④ **Moottorin pyörimissuunnan painike:** Valitsee moottorin pyörimissuunnan.

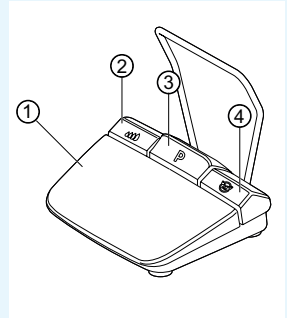

## Letkusetin liitäntä

1. Sulje ⑦ letkunkiristin.
2. Kiinnitä jäähdytysaineletku  
① käsi- tai kulmakappaleeseen.
3. Kiinnitä kiinnittimet ② tiukasti moottorin johtoon.
4. Napsauta letkun adapteri ③ kiinni.
5. Aseta letku pumppuun (n. 1 cm väli liittimen ja pumpun sisääntulon välillä).
6. Pistä pistoneulalla ⑥.
7. Avaa letkunkiristin ⑦.

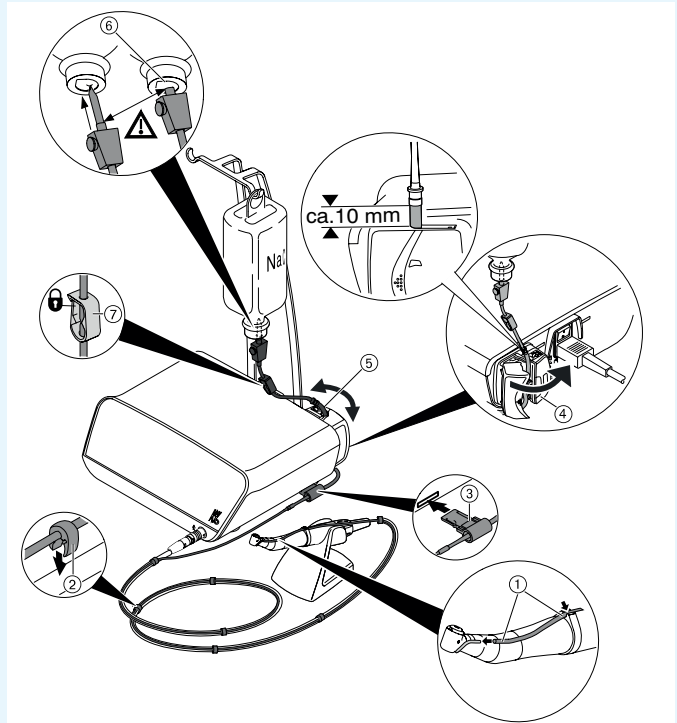

### Huomautus


Avaa pistoneulan ⑥ tuuletusventtiili vain lasipullojen kanssa.



### VARO

Näissä käyttöohjeissa on esitetty vain oleellimmat käyttötoiminnot. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä jos laitetta käyttävät henkilöt, jotka eivät ole tottuneet tämän lääkinällisen laitteen käyttöön, noudata ehdottomasti toimitukseen kuuluvan käyttöohjeen ohjeita.



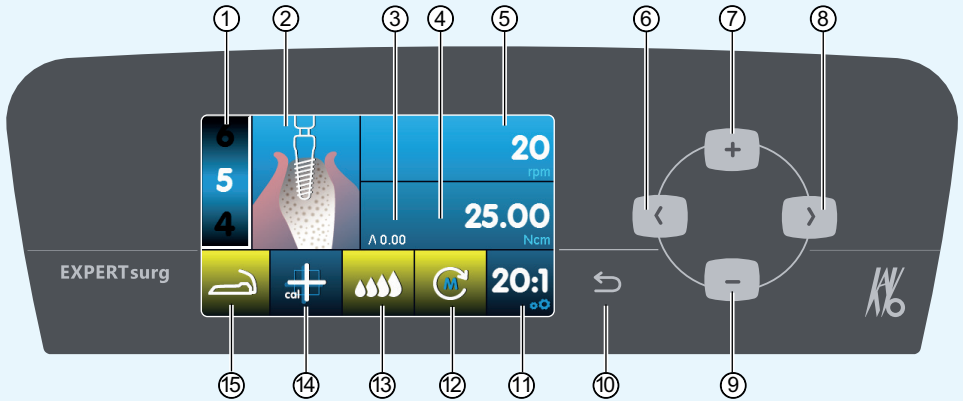

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① Ohjelmavaihe (1 – 10)</li> <li>② Toiminnon kuvaus (erillisesti valittavissa jokaisessa yksittäisessä ohjelmavaiheessa)</li> <li>③ Ilmennyt maksimivääntömomenti</li> <li>④ Vääntömomenttirajoitus</li> <li>⑤ Kierrosluku</li> <li>⑥ Nuolipainike vasemmalle</li> <li>⑦ Plus-painike, arvon korotus</li> <li>⑧ Nuolipainike oikealle</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑨ Miinus-painike, arvon pienennys</li> <li>⑩ Takaisin-painike (paina lyhyesti: takaisin) (paina pitkään: laiteasetukset)</li> <li>⑪ Välilytys</li> <li>⑫ Moottorin pyörimissuunta</li> <li>⑬ Jäähdytysainepumpun asetus</li> <li>⑭ One-Touch-kalibroinnin aktivointi (tarkkaan vääntömomentin määritykseen)</li> <li>⑮ Jalkakäynnistimen tilanäyttö</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parametrin ja toiminnon muuttaminen

### Laiteasetuksen valinta

Paina takaisin-painiketta ⑩ lyhyesti, jotta pääset ohjelmavaihevalikkoon. Paina pitkään päästäksesi laiteasetuksiin.

### Parametrin tai toiminnon valinta

(Nuolipainike vasemmalle ⑥ tai nuolipainike oikealle ⑧)

### Parametrin tai toiminnon muuttaminen

(Plus-painike ⑦, miinus-painike ⑨ tai jalkakäynnistin)

Tallennus tapahtuu automaattisesti parametrasta tai toiminnosta poistuessasi.

### Ohjelmavaiheiden määrän rajoittaminen

Valitse ohjelmavaihe viimeisen halutun ohjelmavaiheen jälkeen ja valitse toiminto "lippu".

### Ohjelmavaiheiden rajoituksen poisto

Valitse ohjelmavaihe toiminnolla "lippu" ja valitse uusi toiminto.

