



Instructions d'utilisation en bref

- ① **Touche régime** : démarrer le moteur / augmenter le régime.
- ② **Touche réfrigérant** : pour la touche réfrigérant, 2 modes de fonctionnement peuvent être réglés. En fonction du mode de fonctionnement réglé, la touche réfrigérant possède les fonctions suivantes :
Appui bref - activer / désactiver le débit du produit réfrigérant ou appui bref - régler le débit du produit réfrigérant de 0 à 110 ml/s (4 niveaux).
Appui long - activer la fonction de rinçage manuelle.
- ③ **Touche programme** : appui bref - étape de programme suivante.
Appui long - étape de programme précédente.
- ④ **Touche sens de rotation du moteur** : régler le sens de rotation du moteur.

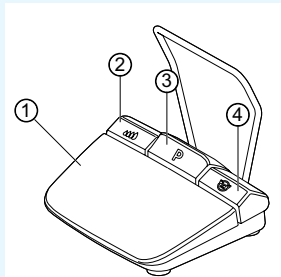

Raccordement du kit de tuyau

1. Fermer le collier de serrage du tuyau ⑦.
2. Fixer le tuyau du produit réfrigérant ① à la pièce à main ou au contre-angle.
3. Fixer les clips ② près du câble moteur.
4. Enclencher l'adaptateur de tuyau ③.
5. Insérer le tuyau dans la pompe (env. 1 cm d'écart entre le connecteur et l'entrée de la pompe).
6. Enfoncer l'aiguille ⑥.
7. Ouvrir le collier de serrage du tuyau ⑦.

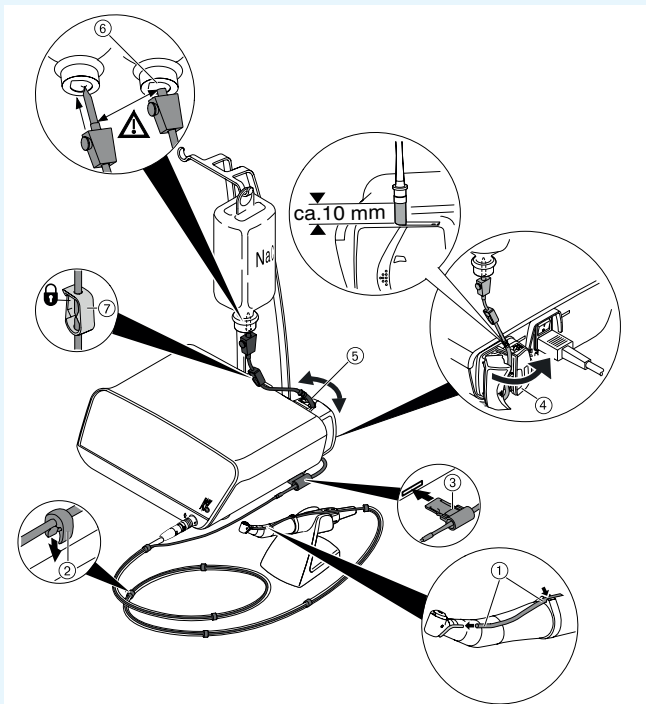

Remarque


Ouvrir l'aération de l'aiguille ⑥ uniquement pour les bouteilles en verre.



ATTENTION

Ces instructions d'utilisation en bref contiennent exclusivement les fonctions de commande essentielles. Avant la première mise en service, ainsi que lors de l'utilisation par des personnes qui ne sont pas familiarisées à l'utilisation de ce produit médical, le mode d'emploi joint à la livraison doit absolument être respecté.



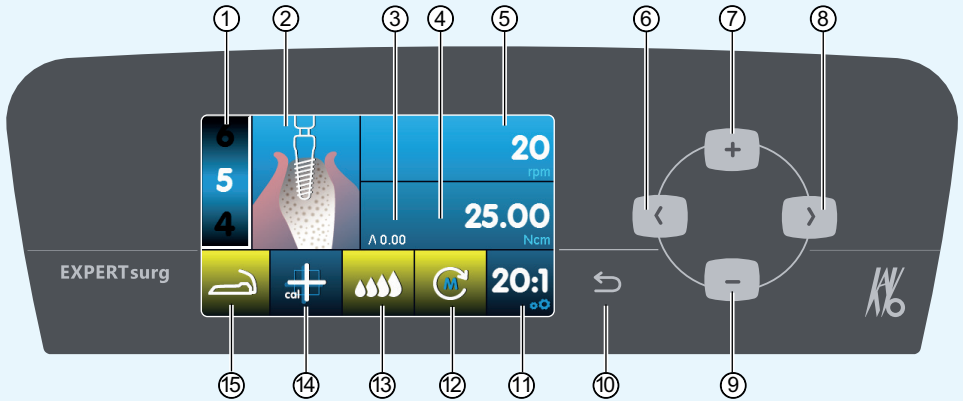

- ① Étape de programme (1 à 10 max.)
- ② Représentation de l'activité (sélectionnable séparément pour chaque étape de programme)
- ③ Couple moteur maximal atteint
- ④ Limitation du couple moteur
- ⑤ Vitesse de rotation
- ⑥ Touche directionnelle gauche
- ⑦ Touche Plus, augmenter la valeur
- ⑧ Touche directionnelle droite
- ⑨ Touche Moins, diminuer la valeur
- ⑩ Touche Retour (appuyer brièvement : retour) (appuyer longuement : réglages de l'appareil)
- ⑪ Rapport de transmission
- ⑫ Sens de rotation du moteur
- ⑬ Réglage de la pompe de produit réfrigérant
- ⑭ Activation du calibrage One Touch (pour déterminer le couple avec exactitude)
- ⑮ Affichage de l'état du rhéostat au pied

Modification des paramètres et de l'activité

Sélection des réglages de l'appareil

Appuyer brièvement sur la touche Retour ⑩ pour accéder à la liste de sélection de l'étape de programme. Appuyer longuement pour appeler les réglages de l'appareil.



Sélection des paramètres ou de l'activité

(Touche directionnelle gauche ⑥ ou touche directionnelle droite ⑧)



Modification des paramètres ou de l'activité


(Touche Plus ⑦, touche Moins ⑨ ou touches de pédale)



L'enregistrement s'effectue automatiquement en quittant les programme ou l'activité.

Limitation du nombre d'étapes de programme

Sélectionner l'étape de programme après la dernière étape de programme souhaitée et choisir l'activité « Drapeau ».

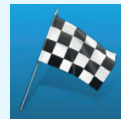

Suppression de la limitation des étapes de programme

Sélectionner l'étape de programme avec l'activité « Drapeau » et choisir une nouvelle activité.