



# Krótką instrukcja obsługi

- ① **Przycisk prędkości obrotowej:** uruchomienie silnika / zwiększenie prędkości obrotowej.
- ② Przycisk środka chłodzącego: możliwe jest ustawienie 2 trybów pracy przycisku środka chłodzącego. W zależności od ustawionego trybu pracy przycisk środka chłodzącego ma następujące funkcje:  
Krótkie naciśnięcie – włączenie/wyłączenie przepływu środka chłodzącego lub krótkie naciśnięcie – ustawienie natężenia przepływu środka chłodzącego od 0 do 110 ml/s (4 poziomy).
- Długie naciśnięcie – aktywacja funkcji przepłukiwania.
- ③ **Przycisk programu:** krótkie naciśnięcie – jeden etap programu do przodu.  
Długie naciśnięcie – jeden etap programu wstecz.
- ④ **Przycisk kierunku obrotów silnika:** ustawienie kierunku obrotów silnika.

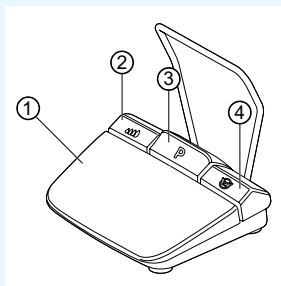

## Podłączanie zestawu węży

1. Zamknąć zacisk węża ⑦.
2. Zamocować wąż środka chłodzącego ① na prostnicy lub kątnicy.
3. Zamocować klipsy ② ściśle do przewodu silnika.
4. Zablokować adapter węża ③.
5. Włożyć wąż do pompy (zachować odstęp ok. 1 cm między łącznikiem a wejściem pompy).
6. Wbić igłę do nakłuwania ⑥.
7. Otworzyć zacisk węża ⑦.

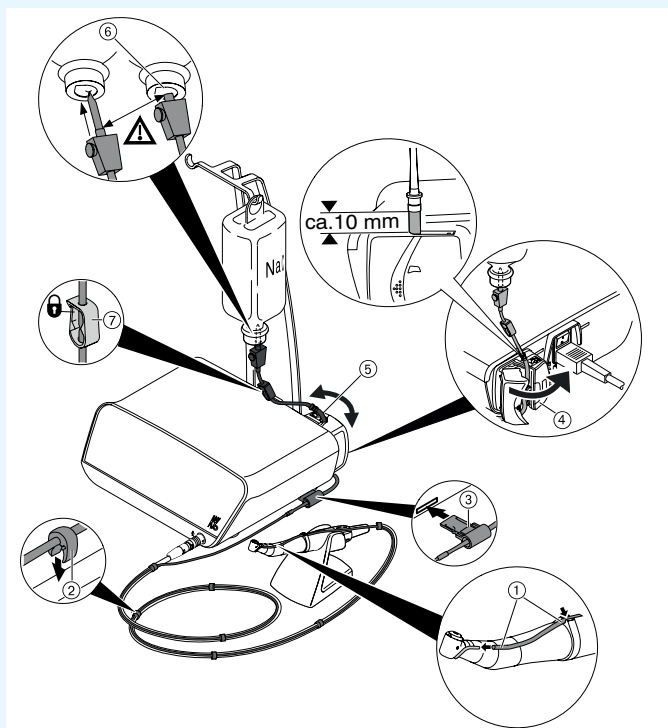

### Wskazówki


Tylko w przypadku szklanej butelki otworzyć otwór napowietrzający przy igle do nakłuwania ⑥.



## OSTROŻNIE

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera wyłącznie najważniejsze funkcje obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem oraz podczas obsługi przez osoby, które nie zapoznały się ze sposobem posługiwania się tym wyrobem medycznym, należy koniecznie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.



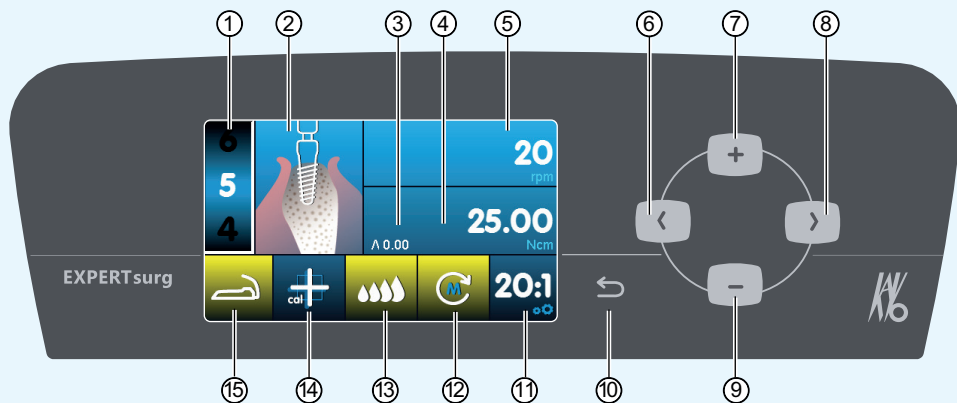

- ① Etap programu (od 1 do maks. 10)
- ② Przedstawienie czynności (możliwość osobnego wyboru każdego pojedynczego etapu programu)
- ③ Uzyskany maksymalny moment obrotowy
- ④ Ograniczenie momentu obrotowego
- ⑤ Prędkość obrotowa
- ⑥ Przycisk strzałki w lewo
- ⑦ Przycisk z plusem do zwiększania wartości
- ⑧ Przycisk strzałki w prawo
- ⑨ Przycisk z minusem do zmniejszania wartości
- ⑩ Przycisk „Wstecz” (krótkie naciśnięcie: wstecz) (długie naciśnięcie: ustawienia urządzenia)
- ⑪ Przełożenie
- ⑫ Kierunek obrotu silnika
- ⑬ Ustawienie pompy środka chłodzącego
- ⑭ Ustawienie kalibracji „One Touch” (do dokładnego określenia momentu obrotowego)
- ⑮ Wskaźnik statusu na sterowniku nożnym

## Zmiana parametrów i czynności

### Wybór ustawień urządzenia

Krótko nacisnąć przycisk „Wstecz” ⑩, aby przejść do wyboru etapów programu. Długie naciśnięcie powoduje wywołanie ustawień urządzenia.

### Wybór parametrów lub czynności

(przycisk strzałki w prawo ⑥ lub przycisk strzałki w lewo ⑧)

### Zmiana parametrów lub czynności

(przycisk z plusem ⑦, przycisk z minusem ⑨ lub przyciski nożne)

Zapis następuje automatycznie z chwilą opuszczenia ekranu parametru lub czynności.

### Ograniczenie liczby etapów programu

Wybrać etap programu po ostatnim żądanym etapie programu, a następnie czynność „Flaga”.

### Anulowanie ograniczenia liczby etapów programu

Wybrać etap programu z czynnością „Flaga”, a następnie nową czynność.

