

Formkappen:

Nur zum dentalen Gebrauch!

Zum einmaligen Gebrauch!

Nicht steril!

Bei der Verwendung von licht-
härtendem Composite
Aushärtungszeit verdoppeln!

Formkappen:

(Größen in mm)

Core build-up caps:

For dental use only!

For singel use!

Non steril!

If lightcuring material is
used, cure with double
exposure time!

Core build-up caps:

(Sizes in mm)

					
↑ 6,5 ↑ 7,5 ←	↑ 7,5 ↑ 7,7 ←	↑ 7,5 ↑ 7 ←	↑ 8,5 ↑ 8 ←	↑ 8 ↑ 6,5 ←	↑ 10,5 ↑ 7 ←
1	2	3	4	5	6
					
4 ←	4,5 ←	5 ←	6 ←	6,5 ←	8,5 ←



Einzelpackungen:

Art.-Nr.

1661	Größe 1	20 Stck.
1662	Größe 2	20 Stck.
1663	Größe 3	20 Stck.
1664	Größe 4	20 Stck.
1665	Größe 5	20 Stck.
1666	Größe 6	20 Stck.


Refills:

Art.-No.

1661	Size 1	20 pcs.
1662	Size 2	20 pcs.
1663	Size 3	20 pcs.
1664	Size 4	20 pcs.
1665	Size 5	20 pcs.
1666	Size 6	20 pcs.

peridenta **Formkappen**

Sortiment

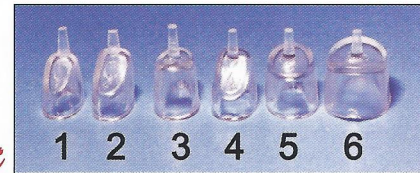

*flexibel
transparent*

Flexible, transparente Formkappen
sind Matrizen zur Herstellung von
Stumpfaufbauten aus plastischen
Werkstoffen im direkten Verfahren.

Art.-Nr. 1660 Formkappen Sortiment
Inhalt: 150 Stck. Formkappen
je 25 Stck. in 6 Größen

Hinweis zur Lagerung:
Vor Tageslicht geschützt lagern.

*flexible
transparent*

peridenta **Core build-up caps**

Assortment

Flexible, transparente core caps for
direct core build-up technique with
composite material.

Art.-Nr. 1660 Core build-up caps
Assortment
Content: 150 pcs./ 6 sizes

Storage instruction:
Do not expose to daylight.



Produktbezeichnung:

Formkappen, flexibel, transparent. In den Größen 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Anwendungsgebiet:

Zur direkten Herstellung von Stumpfaufbauten mit Composites an Zähnen deren klinische Krone zerstört ist.


Zusammensetzung:

Die Formkappen sind vorgeformt und bestehen aus einem flexiblen Kunststoff.


Art der Anwendung:




1. Der endodontisch vorbehandelte Zahn wurde mit einem Wurzelkanalanker versehen.

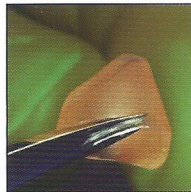


2. Auswahl der Formkappe, ggf. den Rand mit einer Schere anpassen.

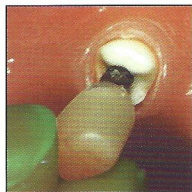

3. Formkappe mit lichthärtendem Composite füllen und adaptieren.

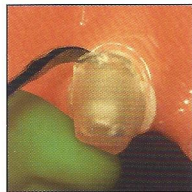

4. Nach Aushärten des Composites Formkappe abziehen.

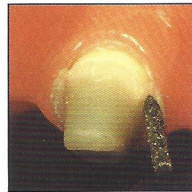

5. Überschuss entfernen und Präparation beenden.

Product:

Core build-up caps, flexible, transparent. Sizes 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Area of Application:

For direct core build-up technique with composite material.


Composition:

The core caps are pre-formed and made of flexible, transparent plastic material.


Application:

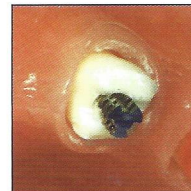


1. Tooth with a root canal post.

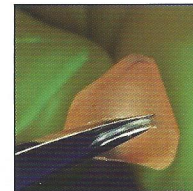


2. Select pre-formed core build-up cap.

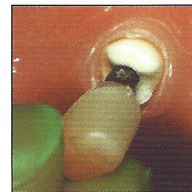

3. Fill the cap with composite and place the cap over the tooth.

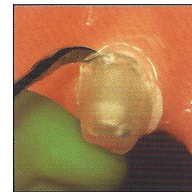

4. After curing the composite, remove pre-formed cap

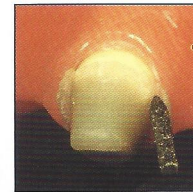

5. Finish the preparation in the cervical and occlusal area.