

SUNSTAR


G.U.M.

ORTHO

 Sunstar Europe S.A.,
Route de Pallatex 11,
CH-1163 Etoy
ORTHOWAXLE321
Made in China
SunstarGUM.com

Revision date: 2021-03-25

Importer | Importateur | Importador |
Importatore | Importeur | Importer |
Maahantuojalla :
Sunstar France S.A.S.,
105 rue Jules Guesde,
FR-92300 Levallois-Perret

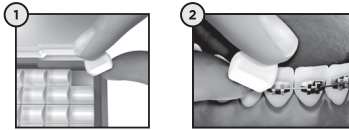

REF



Temperatur limitation
Limite de température
Limiti temperatura
Límites de temperatura
Temperaturbegrenzung
Beperking temperatuur
Temperatursgränzen
Temperaturbegrensning
Temperaturgrænser
Wartość graniczna temperatury

LOT



Use by date
A utiliser avant
Data di scadenza
Fecha de caducidad
Verfalldatum
Houdbaarheidsdatum
Batchcode
Batchnummer
Partinummer
Numer partii
Data ważności

EC REP

Authorized Representative in the European Community
Représentant agréé pour la Communauté européenne
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft
Gerechtigter vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
Auktoriserad representant i EU
Autoriseret representant i Det europæiske fællesskab
Upowazniony Przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej

MD

Medical Device
Dispositif médical
Dispositivo medico
Producto sanitario
Medizinprodukt
Medisch hulpmiddel
Medicinteknisk produkt
Medicinsk udstyr
Medicinsk udstyr
Wyrób medyczny



Consult instructions for use
Consulter le mode d'emploi
Consultare le istruzioni per l'uso
Consulte las instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing beachten
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Se bruksanvisningen
Se bruksanvisningen
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją

EN Protection for wearers of orthodontic appliances

Product description: GUM ORTHO Wax is an orthodontic wax (medical device) composed of 5 pre-cut wax strips on wax paper in a plastic case available in 2 variants: unflavoured (Ref. 723) and mint flavour (Ref. 724).

Why use orthodontic wax?

Discomfort and irritations can be experienced when wearing orthodontic appliances and result from the repeated friction of braces onto oral mucosal tissues. Orthodontists recommend the use of orthodontic wax to form a protective barrier over brackets and wires to improve the comfort level during orthodontic treatment.

Indications: GUM ORTHO Wax has been specifically developed to protect oral mucosal tissues from lesions and relieve irritations caused by orthodontic appliances. It can be used as needed, both

in prevention and on irritating appliances. The period of use can extend up to 30 consecutive days. In case lesions or irritations persist, consult your orthodontist. GUM ORTHO Wax is for adults and children 7+ years old under adult supervision.

Contra indications: Do not use in the presence of hypersensitivity to any ingredients contained in the product.

Ingredients:

GUM ORTHO Wax: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

GUM ORTHO Wax Mint: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linolol.

Instructions for use: Wash and dry your hands. Dry the area of application for optimal adhesion. Break off a piece of GUM ORTHO Wax, warm it up and shape it between your fingers.

Apply the wax to cover wires and brackets by pressing gently. Remove the wax before eating or brushing your teeth. Insert a new piece of wax after. The wax can be kept in overnight. After using the wax, please discard it in the household waste.

Warnings and precautions: Keep out of the reach of children. GUM ORTHO Wax is intended for oral use only. Do not swallow. Storage conditions: +5°C to +40°C. Do not use the wax after the expiry date. Do not use if the device packaging integrity is damaged. If you notice any serious incident in relation with the use of the device, contact the manufacturer and the competent authority of your country. GUM ORTHO Wax has not been tested in pregnant or breast-feeding women. If you are taking medical products or are pregnant or breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before using GUM ORTHO Wax.

FR Protection pour les porteurs d'appareils orthodontiques

Description du produit : La cire GUM ORTHO est une cire orthodontique (dispositif médical) constituée de 5 bandes pré-découpées, disposées sur un papier paraffiné dans un boîtier plastique disponible en 2 versions : non aromatisée (Ref. 723) et aromatisée à la menthe (Ref. 724).

Pourquoi utiliser une cire orthodontique ?

Un inconfort et des irritations peuvent apparaître lors du port d'un appareil orthodontique, résultant de la friction répétée des bagues et arcs métalliques sur les tissus de la muqueuse buccale. Les orthodontistes recommandent l'utilisation de cire orthodontique pour former une barrière protectrice sur les bagues et arcs pour améliorer le niveau de confort au cours du traitement orthodontique.

Indications : La cire GUM ORTHO a été spécifiquement développée pour protéger les tissus de la muqueuse buccale des lésions et soulager les irritations causées par les appareils orthodontiques. Elle peut être utilisée au besoin, à la fois en

prévention et en cas d'irritations. La période d'utilisation peut s'étendre jusqu'à 30 jours consécutifs. En cas de lésions ou irritations persistantes, consultez votre orthodontiste. La cire GUM ORTHO est destinée aux adultes et enfants de 7 ans et plus, sous la supervision d'un adulte.

Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un des ingrédients contenus dans le produit.

Ingédients :

Cire GUM ORTHO : Cire microcristalline, Cire de Paraffine, Cire liquide de Paraffine.

Cire mentholée GUM ORTHO : Cire microcristalline, Cire de Paraffine, Cire liquide de Paraffine, Aroma, Carvone, D-Limonène, Eugénol, Linolol.

Instructions d'utilisation : Lavez puis séchez vos mains. Séchez la zone d'application pour une adhérence optimale. Détachez un morceau de cire GUM ORTHO, chauffez-la et mettez-la en forme entre vos doigts. Appliquez la cire pour recouvrir les arcs et bagues responsables de l'inconfort en la pressant délicatement.

Retirez la cire avant de manger ou de brosser vos dents. Appliquez ensuite un nouveau morceau de cire. La cire peut être conservée pendant la nuit. Après avoir utilisé la cire, elle doit être jetée avec les ordures ménagères.

Mises en garde et précautions d'emploi : Maintenir hors de la portée des enfants. La cire GUM ORTHO est destinée uniquement à un usage oral. Ne pas avaler. Conditions de conservation : +5°C à +40°C. Ne pas utiliser la cire au-delà de la date d'expiration. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Si vous remarquez un problème sérieux lié à l'utilisation du produit, contactez le fabricant et l'Autorité compétente de votre pays. La cire GUM ORTHO n'a pas été testée chez la femme enceinte ou allaitante. Si vous prenez des médicaments, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser la cire GUM ORTHO. Distribué en France par : Sunstar France S.A.S., 105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret

IT Protezione per portatori di apparecchi ortodontici

Descrizione prodotto: La cera GUM ORTHO è una cera ortodontica (dispositivo medico) composta da 5 strisce di cera insapore pre-tagliate su carta cerata in una custodia di plastica (Ref. 723).

Perché utilizzare la cera ortodontica?

Quando si indossano apparecchi ortodontici, si possono avvertire disagio e irritazioni che derivano dal ripetuto attrito dei punti metallici sui tessuti delle mucose orali. Gli ortodontisti consigliano l'uso della cera ortodontica per formare una barriera protettiva su attacchi e fili per migliorare il livello di comfort durante il trattamento ortodontico.

Indicazioni: La cera GUM ORTHO è stata specificamente sviluppata per proteggere i tessuti delle mucose orali dalle lesioni e per alleviare le irritazioni causate da apparecchi ortodontici. Può essere utilizzata sia nella prevenzione, sia sulle irritazioni derivanti

dall'apparecchio. Il periodo di utilizzo può estendersi fino a 30 giorni consecutivi. Nel caso in cui le lesioni o le irritazioni persistano, consultare il proprio ortodontista. La cera GUM ORTHO è un prodotto per adulti e bambini dai 7 anni in su, sotto la supervisione di un adulto.

Controindicazioni: Non utilizzare in presenza di ipersensibilità agli ingredienti contenuti nel prodotto.

Ingredienti:

Cera GUM ORTHO: Microcristalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Istruzioni per l'uso: Lavare e asciugare le mani. Asciugare la zona di applicazione per un'adesione ottimale. Staccare un pezzo di cera GUM ORTHO, riscaldarlo e modellarlo tra le dita. Applicare la cera per coprire fili e attacchi che causano irritazione premendo delicatamente. Rimuovere la cera prima di mangiare o lavarsi i denti. Applicare poi di nuovo un nuovo pezzo di cera. La cera può

essere utilizzata durante la notte. Dopo aver utilizzato la cera, si prega di buttarla nei rifiuti indifferenziati.

Avvertenze e precauzioni: Tenere fuori dalla portata dei bambini. La cera GUM ORTHO è solo per uso orale. Non deglutire. Condizioni di conservazione: da +5°C a +40°C. Non utilizzare la cera dopo la data di scadenza. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o non integra. Se si verifica un incidente grave in relazione all'uso del dispositivo, contattare il produttore e l'autorità competente del proprio Paese. La cera GUM ORTHO non è stata testata su donne in gravidanza o allattamento. Se si stanno assumendo medicinali, si è in gravidanza o in allattamento, chiedere consiglio al proprio medico o al proprio farmacista prima di utilizzare la cera GUM ORTHO.

Distribuito in Italia da: Sunstar Italiana S.r.l., Corso Italia, 13, IT-21047 Saronno

III. Protekcja dla portadores de dispositivos de ortodoncia

Descripción del producto: La cera GUM ORTHO es una cera de ortodoncia (producto sanitario) compuesta por 5 tiras pre-cortadas sobre papel encerado. Viene en un estuche de plástico y está disponible en dos variantes: sin sabor (Ref. 723) y con sabor a menta (Ref. 724).

¿Por qué utilizar cera de ortodoncia?

Como resultado de la fricción repetida de los aparatos sobre los tejidos de la mucosa oral, se pueden experimentar molestias e irritaciones al llevar ortodoncia. Los ortodontistas recomiendan utilizar cera de ortodoncia para formar una barrera protectora sobre los dispositivos de ortodoncia para mejorar el nivel de comodidad durante el tratamiento.

Indicaciones: La cera GUM ORTHO ha sido especialmente diseñada para proteger los tejidos de la mucosa oral frente a lesiones, y para aliviar las irritaciones causadas por los aparatos de ortodoncia. Se

puede utilizar según sea necesario, tanto para prevenir como en las zonas irritadas. El periodo de uso se puede prolongar hasta 30 días consecutivos. En caso de que las lesiones o irritaciones persistan, consulte a su ortodontista. La cera GUM ORTHO está recomendada para adultos y niños mayores de 7 años bajo la supervisión de un adulto.

Ingredientes:

Cera GUM ORTHO: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Cera GUM ORTHO menta: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalol.

Instrucciones de uso: Lave y seque sus manos. Seque el área de aplicación para una adhesión óptima. ⊕ Extraiga un trozo pre-cortado de la cera GUM ORTHO, calientelo y dele forma con los dedos. ⊕ Aplique la cera para cubrir los brackets y alambres que

causan incomodidad presionando con suavidad. Retire la cera antes de comer o de cepillarse los dientes. Después, utilice un trozo de cera nuevo. La cera puede dejarse aplicada durante la noche. Tras retirar la cera, deséchela en la basura doméstica.

Advertencias y precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. La cera GUM ORTHO está diseñada únicamente para uso oral. No tragar. Condiciones de almacenamiento: +5°C a +40°C. No use la cera después de la fecha de caducidad. No utilizar si el envase está dañado. Informe al fabricante y a la autoridad competente si ocurre algún incidente relacionado con la utilización del producto. La cera GUM ORTHO no se ha testado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Si está tomando medicamentos, está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar la cera GUM ORTHO.

Distribuidor en España por: Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DE Schutz für Träger von kieferorthopädischen Apparaturen

Produktdeschreibung: Gum ORTHO Wachs ist ein kieferorthopädisches Wachs (Medizinprodukt), bestehend aus 5 portionierten Wachsstreifen auf Wachspapier in einem Kunststoff-Etui erhältlich in 2 Varianten: Geschmacksneutral (Ref. 723) und mit Minzgeschmack (Ref. 724).

Warum kieferorthopädisches Wachs verwenden?

Beim Tragen kieferorthopädischer Apparaturen können Unannehmlichkeiten und Irritationen auftreten, die durch die wiederholte Reibung von Brackets auf der Mundschleimhaut entstehen. Kieferorthopäden empfehlen die Verwendung von kieferorthopädischem Wachs auf Brackets und Drähten zur Bildung einer Schutzbarriere, um den Komfort während der kieferorthopädischen Behandlung zu verbessern.

Indikationen: Gum ORTHO Wachs wurde speziell entwickelt, um die Mundschleimhaut vor Läsionen zu schützen und Irritationen durch kieferorthopädische Apparaturen zu lindern. Es kann je nach Bedarf

sowohl zur Vorbeugung als auch zur Linderung von Irritationen durch kieferorthopädische Apparaturen verwendet werden. Die Anwendungsdauer kann bis zu 30 aufeinanderfolgende Tage betragen. Falls Läsionen oder Irritationen fortbestehen, wenden Sie sich an Ihren Kieferorthopäden. Gum ORTHO Wachs ist für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen bestimmt.

Kontraindikationen: Nicht bei Überempfindlichkeit gegen im Produkt enthaltene Inhaltsstoffe anwenden.

Inhaltsstoffe:

Gum ORTHO Wachs: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Gum ORTHO Wachs Minze: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalol.

Gebrauchsanweisung: Waschen und trocknen Sie Ihre Hände. Trocknen Sie die Anwendungsstelle um eine optimale Haftung zu erreichen. ⊕ Trennen Sie ein Stück Gum ORTHO Wachs ab, erwärmen und formen Sie es mit den Fingern. ⊕ Tragen Sie das Wachs durch

leichten Druck auf Drähte und Brackets, die Unannehmlichkeiten verursachen, auf. Entfernen Sie das Wachs bevor Sie essen oder sich die Zähne putzen. Setzen Sie danach ein neues Stück Wachs ein. Das Wachs kann auch über Nacht angewandt werden. Nach der Verwendung des Wachses entsorgen Sie es bitte im Hausmüll.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gum ORTHO Wachs ist nur zur oralen Anwendung bestimmt. Nicht schlucken. Lagerbedingungen: +5°C bis +40°C. Das Wachs nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Wenn Sie eine schwere Nebenwirkung im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes feststellen, wenden Sie sich an den Hersteller und die zuständige Behörde Ihres Landes. Gum ORTHO Wachs ist nicht an schwangere oder stillende Frauen getestet worden. Fragen Sie Arzneimittel einnehmen, schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie Gum ORTHO Wachs anwenden.

Verteilt in Deutschland und Österreich durch: Sunstar Deutschland GmbH, Altelfeld 1, DE-79677 Schönbau

NL Bescherming voor dragers van orthodontische apparatuur

Productomschrijving: Gum ORTHO Wax is een orthodontische was (medisch hulpmiddel) bestaande uit 5 voorgesneden was strips op was papier in een plastic doosje verkrijgbaar in 2 varianten: smaakloos (Ref. 723) en muntsmaak (Ref. 724).

Waarom gebruik ik orthodontische was?

Ongemak en irritaties kunnen optreden bij het dragen van orthodontische apparaten en zijn het gevolg van de herhaalde wrijving van een beugel tegen het mondvlies/mucosa. Orthodontisten raden het gebruik van orthodontische was aan om een beschermende laag te vormen over beugels en draden om het comfort tijdens de orthodontische behandeling te verbeteren.

Indicaties: Gum ORTHO Wax is speciaal ontwikkeld om het mondvlies/mucosa te beschermen tegen mondwonden en om irritaties veroorzaakt door orthodontische apparatuur te verlichten. Het kan naar behoefte worden gebruikt, zowel ter preventie als op irriterende

apparaten. De gebruiksduratie kan tot 30 opeenvolgende dagen duren. Raadpleeg jouw orthodontist als de mondwonden of irritaties aanhouden. Gum ORTHO Wax is voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar onder toezicht van een volwassene.

Contra indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor ingrediënten in het product.

Ingrediënten:

Gum ORTHO Wax: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Gum ORTHO Wax Munt: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalol.

Gebruiksaanwijzing: Was en droog jouw handen. Droog het toepassingsgebied voor een optimale hechting. ⊕ Breuk een stukje Gum ORTHO Wax af, warm het op en vorm het tussen je vingers. ⊕ Breng de was aan op draden en beugels die ongemak

veroorzaken door zachtes te drukken. Verwijder de was voordat je gaat eten of jouw tanden poetsen. Breng vervolgens een nieuw stukje was aan. Je kunt de was gedurende de nacht laten zitten. Gooi de was na gebruik weg bij het huisvuil.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Buiten bereik van kinderen bewaren. Gum ORTHO Wachs is uitsluitend bedoeld voor oraal gebruik. Niet doorslikken. Bewaarcondities: +5°C tot +40°C. Gebruik de was niet na de vervaldatum. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Als je een ernstig incident ervaart in verband met het gebruik van het middel, neem dan contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit van jouw land. Gum ORTHO Wax is niet getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Als je gemeenschappelijk gebruik, zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag dan jouw behandelend arts om advies voordat je Gum ORTHO Wax gebruikt. Gedistribueerd in Nederland en België door: Sunstar Benelux BV, Hogewegselaan 221, NL-1382 JL Weesp

SV/DK/NO Skydd/beskyttelse för de som bär tandställning/tandbøjler

Produktfakta: Gum ORTHO Wax är ett ortodontiskt was/voks (medicinteknisk produkt) som består av 5 st förklippta stavs/stav på ett vaxpapper, i en ask/askje av plast. Tillgänglig i 2 varianter; utan/uden smak (Ref. 723) och med mintsmaak (Ref. 724).

Vår förskär kan använda ortodontiskt was?

Ortodonti och obehag kan upplevas när man bär tandställning/tandbøjler som ett resultat av den uppreppade/konstante friktion som tandställningen/tandbøjlen gör på munslimhinnan. Ortodontitidnåtkändare rekommenderar/ånbefälar användning av ortodontiskt was för att ge skyddande/beskyttande bariär över tandställningen/tandbøjlen, för att förbättra/förbättra bekvämligheten under behandling.

Indikationer: Gum ORTHO Wax har utvecklats/utviklet speciellt för att

skydda/beskytta munslimhinnan från/frå skär och lesioner och minska irritationer förorsakade av tandställningen. Det kan användas enligt/efter behov, både förebyggande och på irriterande tandställning/tandbøjler. Kan användas upp till 30 dagar i följd/træk. Om skär, lesioner eller irritationer fortsätter, kontakta din tandläkare. Gum ORTHO Wax är för vuxna/vuxna och barn över 7 år under uppsikt av vuxna/opsyn af voksne.

Kontraindikationer: Använda ej/Anvend ikke om det finns överkänslighet/överfølsomhed mot någon av ingredienserna.

Ingredienser:

Gum ORTHO Wax: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Gum ORTHO Wax Mynta: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalol.

Bruksanvisning: Tvätta och torka händerna. Torka området där vaxet

skall appliceras för bästa fästförmåga. ⊕ Bryt av en bit av Gum ORTHO Wax, värp upp det och forma den mellan fingrarna. ⊕ Applicera vaxet så att det täcker tandställningen och de vajrar som orsakar obehag. Avlägsna vaxet innan du skal åta eller borsta tänderna. Applicera en ny bit vax efter. Vaxet kan användas under natten. Efter att du använt vaxet, slängs det i hushållssopten.

Varningar och försiktighetsåtgärder: Förvaras oåtkomligt för barn. Gum ORTHO Wax är endast avsett för oral användning. Slåväs ej. Förvaringsstemperatur: +5°C till +40°C. Använd ej vaxet om utgångsdatum. Använd ej om förpackningen är skadad. Om någon oönskad reaktion uppträder i samband med användning, kontakta tillverkaren för den ansvariga myndigheten i ditt land. Gum ORTHO Wax har ej testats på gravida eller ammande kvinnor. Om du tar andat läkemedel, är gravid eller ammar, fråga din läkare eller tandläkare för råd, innan du använder Gum ORTHO Wax. Distribueras i Sverige, Danmark och Norge av: Sunstar Sverige AB, Hartverksgävan 15, SE-436 33 Askim

PL Ochrona dla osób noszących aparaty ortodontyczne

Opis produktu: Wosk GUM ORTHO jest to wosk ortodontyczny (wyrób medyczny) składający się z 5 naciętych paszków wosku na papierze woskowym w plastikowym etui, dostępny w 2 wariantach: bez smaku (nr ref. 723) i smaku miętowym (nr ref. 724).

Dlaczego warto stosować wosk ortodontyczny?

Podczas noszenia aparatu ortodontycznego mogą wystąpić dyskomfort i podrażnienia, które wynikają z powtarzającego się tarcia elementów aparatu o tkanki błony śluzowej jamy ustnej. Ortodontzi zalecają stosowanie wosku ortodontycznego w celu stworzenia bariery ochronnej na ząbkach i drutach, aby poprawić poziom komfortu podczas leczenia ortodontycznego.

Wskazania: Wosk GUM ORTHO został specjalnie opracowany w celu ochrony tkanek błony śluzowej jamy ustnej przed uszkodzaniem oraz łagodzenia podrażnień wywołanych przez aparaty ortodontyczne. Może być stosowany w zależności od potrzeb, zarówno profilaktycznie jak i w przypadku aparatów powodujących

podrażnienia. Okres stosowania może wynosić do 30 kolejnych dni. W przypadku utrzymywania się zmian lub podrażnień należy skonsultować się z lekarzem ortodontą. Wosk GUM ORTHO przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia pod nadzorem dorosłych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na

składniki wosku lub składników zawartych w produkcie.

Skład:

Wosk GUM ORTHO: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax.

Wosk miętowy GUM ORTHO: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalol.

Instrukcja użycia: Umyj i osusz ręce. Wyusz miejscy aplikacji, aby uzyskać optymalną przyczepność. ⊕ Oderwij kawałek wosku GUM ORTHO, ogrzej go i uformuj między palcami. ⊕ Nałóż wosk na drugi i zanki powodujące dyskomfort poprzez delikatne naciskiwanie. Umyj

wosk przed jedzeniem lub myciem zębów. Następnie nałóż nowy fragment wosku. Wosk może zostać na aparacie przez 30 dni. Po zużyciu, wosk należy wyrzucić do odpadów domowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wosk GUM ORTHO jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego. Nie polikać. Warunki przechowywania: +5°C do +40°C. Nie używać wosku po upływie terminu ważności. Nie używać, jeśli opakowanie wyrobu jest uszkodzone. W przypadku zauważenia poważnych incydentów związanych z użytkowaniem wosku, należy skontaktować się z producentem i właściwym organem w swoim kraju. Wosk GUM ORTHO nie został przebadany u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli przyjmiesz produkty lecznicze, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przed zastosowaniem wosku GUM ORTHO, zwróć się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Dystrybuowane w Polsce przez: Sunstar Europe SA, Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 181B, PL-02-222, Warszawa