

Bedienungsanleitung



Seal²



Die Vervielfältigung eines jeden Teils dieses Handbuchs ist verboten.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1.1	ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ÜBERNAHME	4
1.2	ALLGEMEINE HINWEISE	4
1.3	VERWENDUNGSZWECK	4
1.4	BEDEUTUNG DER SYMBOLE	5
1.5	GARANTIEBESTIMMUNGEN	6
2.1	AUSSENABMESSUNGEN DER MASCHINE UND DER	7
	VERPACKUNG	7
2.2	BESCHREIBUNG DES INHALTS	8
3.1	INSTALLATION	9
3.2	HÖHENVERSTELLUNG DER ROLLENHALTERUNG	11
3.3	ANWEISUNGEN FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG	12
3.4	SICHERHEIT	14
3.5	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	15
4.1	TECHNISCHE DATEN	16
5.1	BEDIENUNGSANLEITUNGEN	17
6.1	REINIGUNG DES FOLIENSCHWEISSGERÄTES	19
6.2	AUSSERORDENTLICHE WARTUNG	19
6.3	STÖRUNGSBEHEBUNG	20
7.1	ANWEISUNGEN ZUR VERSCHROTTUNG	20

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ÜBERNAHME

Kontrollieren Sie bei Erhalt der Maschine, dass die Verpackung unversehrt ist (bitte für eventuelle Sendungen aufbewahren).

Danach die Verpackung öffnen und kontrollieren, dass

- die Lieferung den technischen Spezifikationen entspricht;
- keine sichtbaren Schäden vorliegen.

Bei schadhafter Ware und fehlenden Teilen bitte unverzüglich und ausführlich den Spediteur, das Lager oder den Vertreiber informieren.

Zeichnungen und andere Dokumente, die Ihnen zusammen mit dem Gerät übergeben wurden, dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden, da sie Eigentum des Herstellers sind, der sich alle Rechte dafür vorbehält.

Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, des Textes und der Abbildungen ist verboten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung an dem Handbuch oder dem Gerät Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen, ohne dass die vorherige Produktion und die vorherigen Handbücher aktualisiert werden müssen.

1.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Nachstehend beschrieben werden die mit dem Gebrauch und der Wartung des Gerätes beauftragten Personen beschrieben.

DER BEDIENER ist die Person, die das Gerät für den vorgesehenen Zweck benutzt.

VERANTWORTLICHES ORGAN ist die Person oder Gruppe, die für die Bedienung, die ordentliche Wartung des Gerätes und die Einweisung des Bedieners verantwortlich ist. Das verantwortliche Organ trägt die gesetzliche Verantwortung für die Durchführung der bezüglich der für die Installation, den Betrieb und den Gebrauch des Gerätes erforderlichen Arbeiten.

Der Hersteller kann nicht für eventuelle Beschädigungen, Verletzungen oder Betriebsstörungen der Maschine verantwortlich gemacht werden, wenn das Gerät nicht sachgerecht betrieben oder ordnungsgemäß gewartet wurde.

Dieses Handbuch ist wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss zum schnellen und einfachen Nachschlagen in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Dieses Handbuch hat den Zweck, Anleitungen zu liefern für:

- die korrekte Installation;
- den sicheren und effizienten Betrieb des Gerätes;
- die ständige und regelmäßige Wartung.

Das Gerät muss unter Einhaltung aller in diesem Handbuch aufgeführten Vorgehensweisen benutzt werden und darf nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.

Das Gerät ist für einen professionellen Gebrauch ausgelegt, sodass es nur von Fachkräften benutzt werden darf. Das Gerät ist nur für den Einsatz vorzusehen, für den es konzipiert wurde.

1.3 VERWENDUNGSZWECK

SEAL²: Dieses Gerät ist für das Heißversiegeln und Schneiden von Sterilisationsbeuteln aus Papier-PP-Verbund konzipiert. Es funktioniert nicht mit Rollen aus anderen Materialien.

1.4 BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Sicherheitssymbole am Gerät:

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

Auf dem Etikett des Gerätes sind Symbole aufgeführt, deren Bedeutung nachstehend erläutert wird.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
SN	"SERIENNUMMER" Dem Symbol folgt die Seriennummer des Herstellers. Die Seriennummer muss direkt neben dem Symbol aufgeführt sein.
	"HERSTELLUNGSDATUM" Neben dem Symbol muss das Herstellungsjahr aufgeführt werden, das aus 4 Ziffern besteht.
	"ACHTUNG, BITTE IN BEDIENUNGSANLEITUNG NACHSCHLAGEN"
	Das auf dem Gerät aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass das ausgediente Gerät nicht über den Hausmüll, sondern "getrennt" entsorgt werden muss.

Ferner stoßen Sie in diesem Handbuch auf Symbole mit einer danebenstehenden Beschreibung, einem Hinweis, usw. Diese Abbildungen sollen die Aufmerksamkeit des Lesers auf einen besonderen Hinweis oder eine besondere Beschreibung lenken. Die Bedeutung wird nachstehend erläutert.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	BESONDERS WICHTIGE INFORMATION ZUR SICHERHEIT Dieses Symbol soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf grundlegende Anmerkungen hinsichtlich der Sicherheit des Bedieners lenken.
	INFORMATIONEN UND VORKEHRUNGEN Dieses Symbol verweist auf allgemeine Angaben und Empfehlungen.

1.5 GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Hersteller garantiert die Qualität seiner Geräte, sofern diese in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch erteilten Anweisungen verwendet werden, für einen Zeitraum von **12 Monaten** für die mechanischen und elektrischen Teile.

Die Garantie beginnt ab Datum der Übergabe des Gerätes an den Kunden und wird nachgewiesen durch die Rücksendung des gebührend ausgefüllten und unterzeichneten Garantiescheins.





Bei Beanstandungen gilt das auf dem D.D.T (Ital. Transportdokument) angegebene Datum. Zudem auf dem Transportdokument aufgeführt ist die Seriennummer des Gerätes. Keine Garantieansprüche bestehen bei Mängeln oder Schäden, die verursacht werden durch:

- Eine nicht fachgerechte Installation
- Eine nicht ordnungsgemäß vorgenommene Wartung
- Nicht autorisierte Umrüstungen und Änderungen
- Falsche Verwendung des Gerätes
- Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gelieferten Anweisungen


Ausgeschlossen werden der Ersatz des Gerätes und die Verlängerung der Garantiezeit wegen aufgetretenen Defekten.

Die Garantiereparaturen werden nach Ermessen des Herstellers durchgeführt und umfassen weder die Verpackungs- noch Transportkosten.

2.1 AUSSENABMESSUNGEN DER MASCHINE UND DER VERPACKUNG

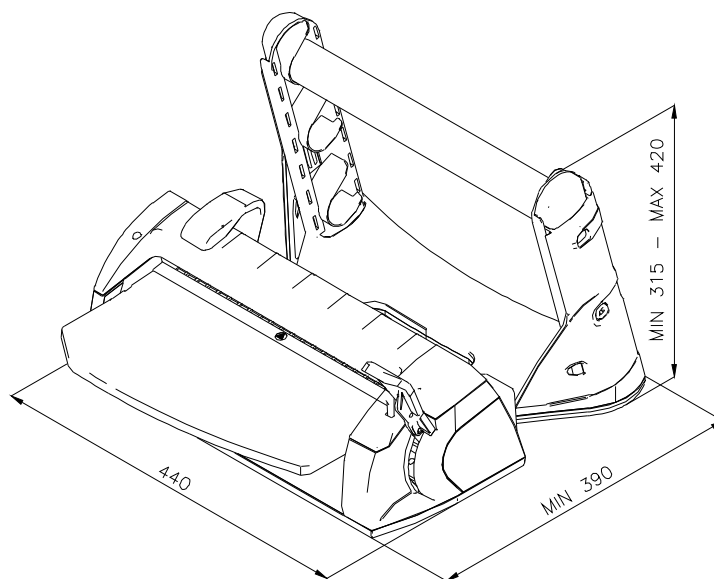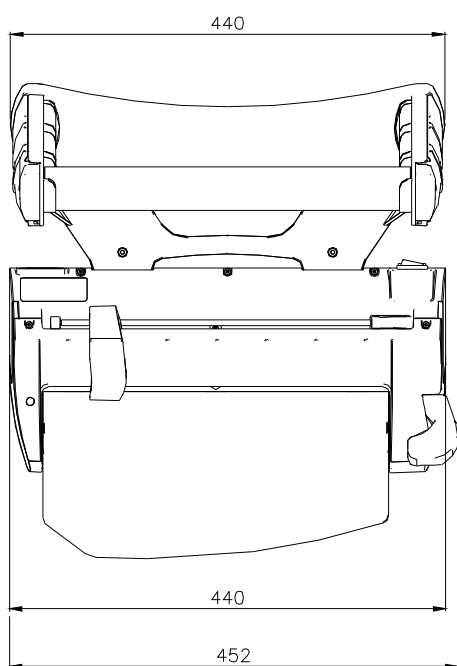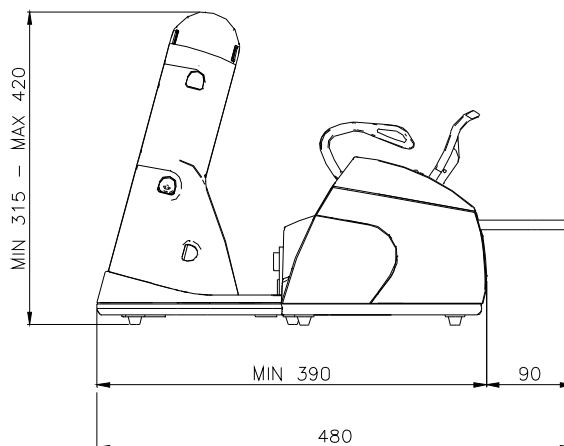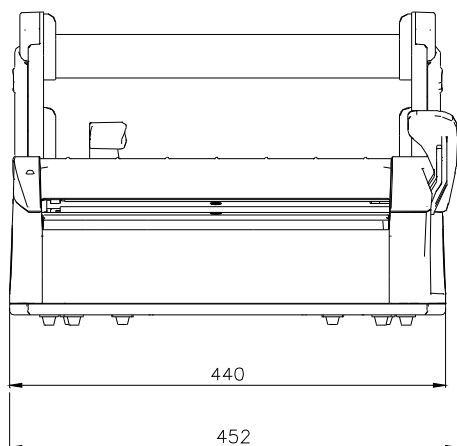

Außenabmessungen des Thermoschweißgerätes

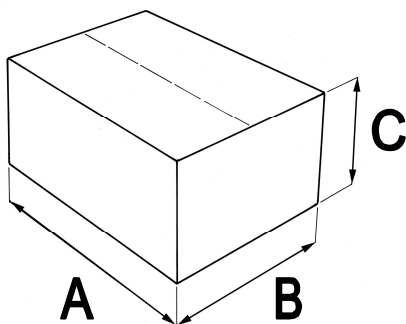

Dimensions of the package:

A = 520 mm

B = 400 mm

C = 365 mm

Total weight: 8,5 kg

2.2 BESCHREIBUNG DES INHALTS

Die Verpackung enthält folgende Teile:

Beschreibung	Menge
Maschinenkörper	1
Rollenhalterung	1
Ablagefläche	1
Rollenhalterrohre	2
Netzanschlusskabel	1
Innensechskantschlüssel	1
Ersatzschmelzsicherungen	2
Bedienungsanleitung	1
Kurzanleitung	1
Garantieschein	1



HINWEIS: Wir empfehlen, **die Originalverpackung aufzubewahren** und für jeden Transport des Gerätes zu verwenden. Die Verwendung einer anderen Verpackung könnte zu Produktbeschädigungen während des Versands führen.

3.1 INSTALLATION


Das Gerät unter Beachtung der folgenden Hinweise installieren:

- Das Folienschweißgerät auf eine ebene Oberfläche stellen und dabei darauf achten, dass ausreichend Platz zum bequemen bzw. ergonomischen Arbeiten gewährleistet ist.
- Das Gerät auf keinen Fall neben Spülbecken u.ä., um Kontakt mit Wasser und eventuelle Kurzschlüsse der elektrischen Anlage zu vermeiden.
- Das Gerät außer Reichweite von Wärmequellen aufstellen.
- Das Gerät in normal belüfteten Räumen installieren.
- Sicherstellen, dass das Netzanschlusskabel nicht geknickt ist und bis zur Steckdose frei verläuft.


1) Den Maschinenkörper und die Rollenhalterung vorsichtig auspacken.

2) Die Rollenhalterung am Maschinenkörper einsetzen, indem Sie sie auf den Stahlschienen einschieben.

3) Die Rollenhalterung ganz hinein schieben, um einen kleinstmöglichen Raumbedarf zu gewährleisten oder die Länge nach Belieben einstellen. Es besteht nämlich die Möglichkeit, den Abstand zwischen Rollenhalterung und Folienschweißgerät zu regulieren.

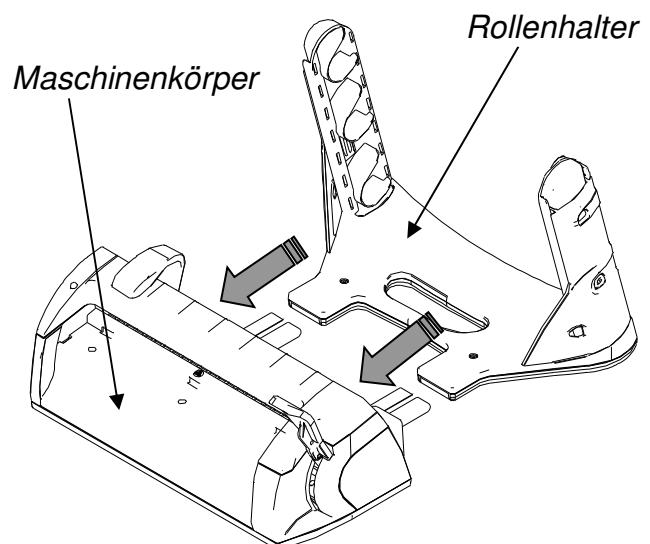


4) Die beiden Schrauben (1 und 2) mit dem mitgelieferten Schlüssel fest zuschrauben.

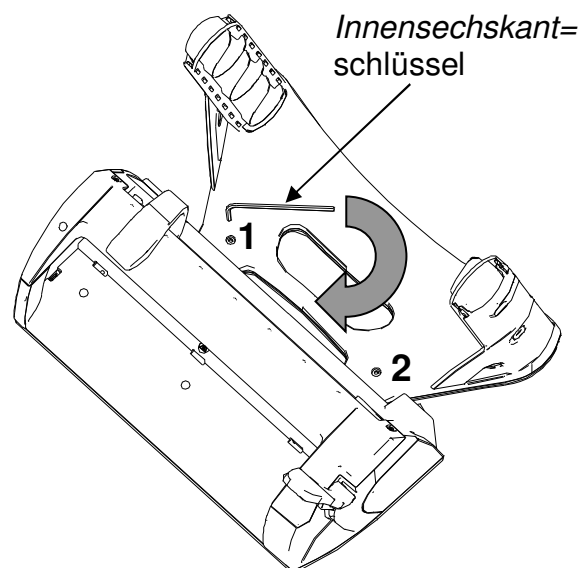


- 5) Eines oder zwei Rohre* an der Rollenhalterung einsetzen, wobei sicherzustellen ist, dass der Zahn der Rollenhalterung in den Schlitz am Rohr einrastet. Gegebenenfalls das Rohr leicht drehen.


**je nach gewünschtem Gebrauch.
(Siehe Abschnitt 3.2)*

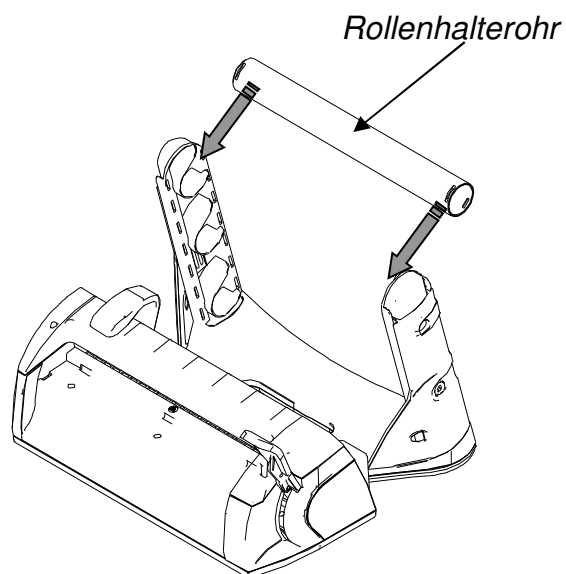

- 6) Die Ablagefläche einsetzen. Die drei Zähne in die entsprechenden Löcher (1) stecken und die Platte senken, bis sie im Gehäuse (2) einrastet.

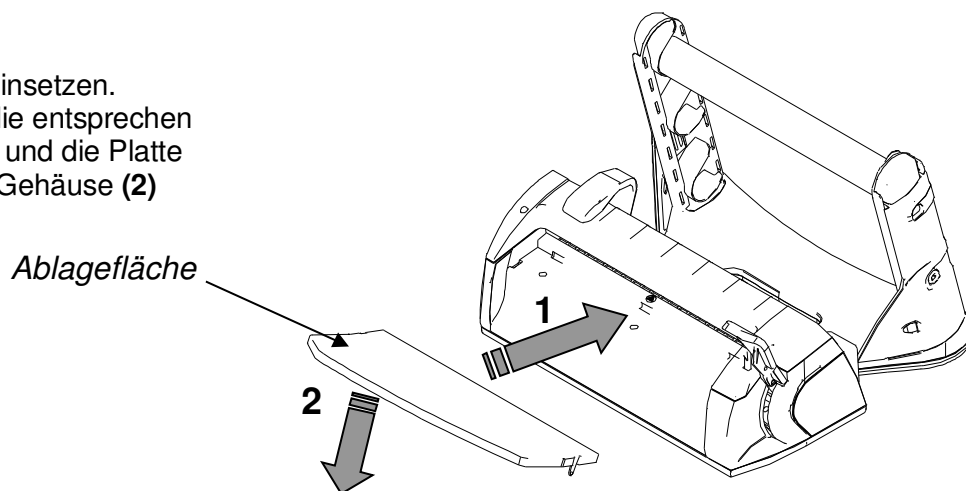

- 7) Das Netzanschlusskabel anschließen. Die Maschine ist nun gebrauchsbereit.

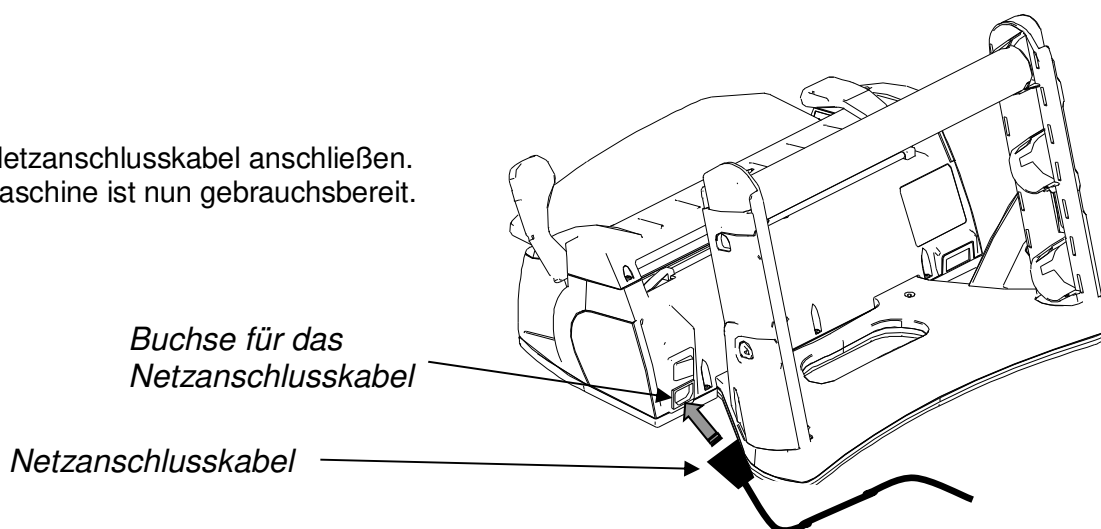


HINWEIS: Das Folienschweißgerät wurde werkseitig getestet und geprüft.

3.2 HÖHENVERSTELLUNG DER ROLLENHALTERUNG

Das Thermoschweißgerät kann auf zweierlei Weise benutzt werden:

A – Mit abgesenkter Rollenhalterung und einem Rohr


B – Mit angehobener Rollenhalterung und zwei Rohren

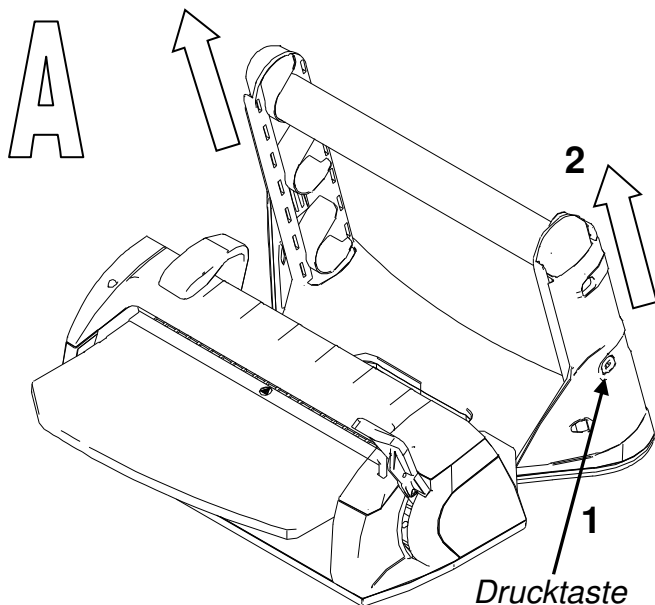

Ist die Rollenhalterung abgesenkt, zum Anheben derselben wie folgt vorgehen:

Hinweis: Für eine leichtere Durchführung dieses Vorgangs das Rohr entfernen.

- 1) Die Drucktasten an den Seiten der Rollenhalterung drücken
- 2) Die beiden Wangen nach oben drücken, bis die Drucktasten in die neue Aufnahme oben einrasten.

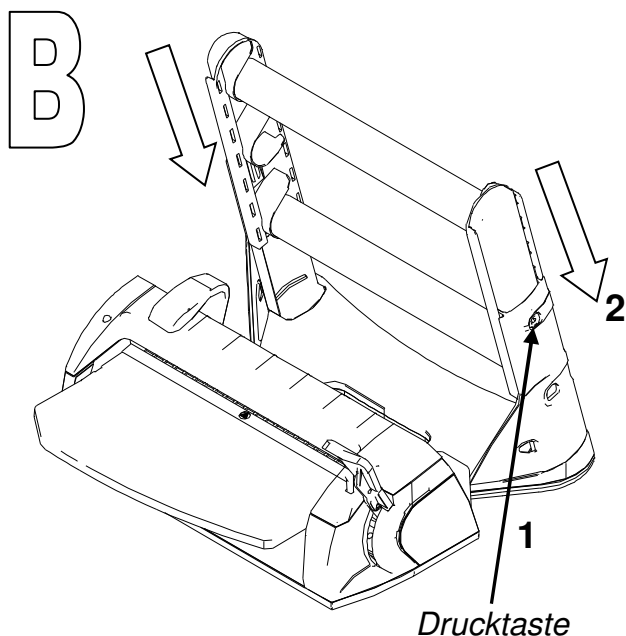

Ist die Rollenhalterung angehoben, zum Absenken derselben wie folgt vorgehen:

Hinweis: Für eine leichtere Durchführung dieses Vorgangs die beiden Rohre entfernen.

- 1) Die Drucktasten an den Seiten der Rollenhalterung drücken.
- 2) Die beiden Wangen nach unten drücken, bis die Drucktasten in die neue Aufnahme unten einrasten.




ACHTUNG:

Wenn die Rollenhalterung angehoben ist, die leichteren Rollen an der oberen Rollenhalterung positionieren.
Maximal 5 kg laden.


3.3 ANWEISUNGEN FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG

Das Thermo-Folienschweißgerät ist so ausgelegt, dass es auf zweierlei Art und Weise benutzt werden kann:



FOLIENSCHWEISSGERÄT IN TISCHAUSFÜHRUNG

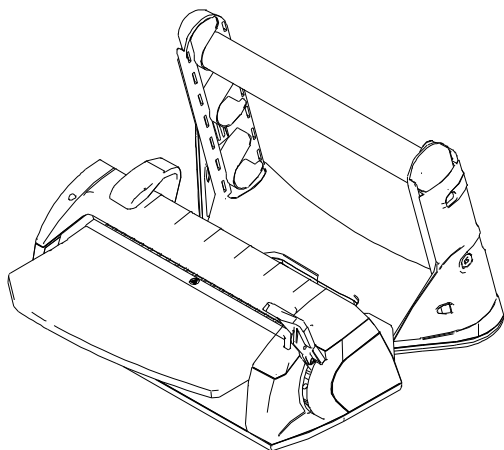

FOLIENSCHWEISSGERÄT IN TISCHAUSFÜHRUNG MIT WANDBEFESTIGTER ROLLENHALTERUNG

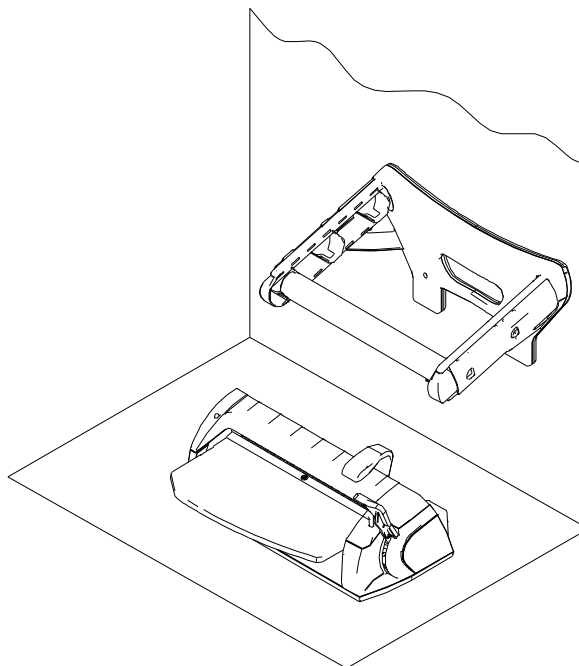


In der Konfiguration mit wandbefestigter Rollenhalterung hat der Maschinenkörper einen Raumbedarf von 330 mm, weil die Stahlschienen fest montiert sind.

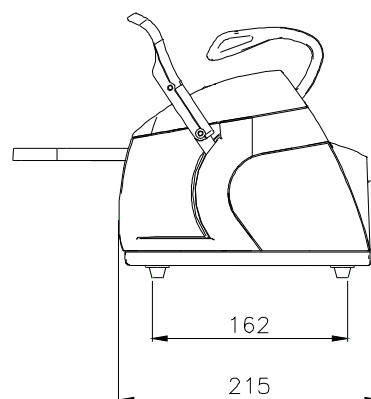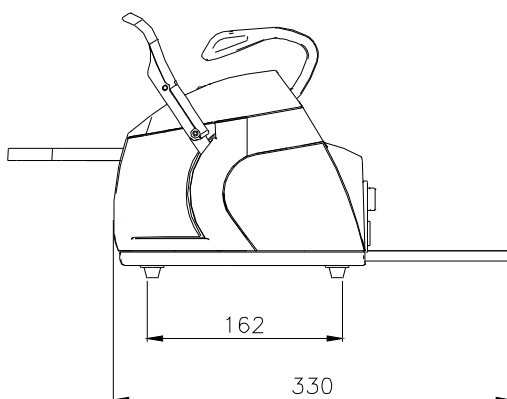



(1) Zum Herabsetzen des Raumbedarfs einfach die sechs Schrauben mit dem mitgelieferten Innensechskant= schlüssel abschrauben und die Schienen entfernen.

Auf diese Weise wird der Raumbedarf auf 215 mm (inkl. Kabel) verringert.

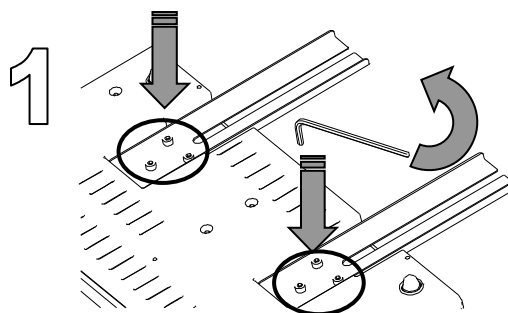


Zur **Wandbefestigung** der Rollhalterung bitte entsprechend den folgenden Anleitungen vorgehen.

- 1) Zwei Dübel mit Durchmesser 6 (Schraubenkopf: max. Durchmesser 9,5 mm, Schraubenkörper: max. Durchmesser 5 mm) mit einem Abstand von 214 mm an der Wand befestigen.
Den Schraubenkopf um 13 mm hervorragen lassen, um die Rollhalterung einzuhängen.

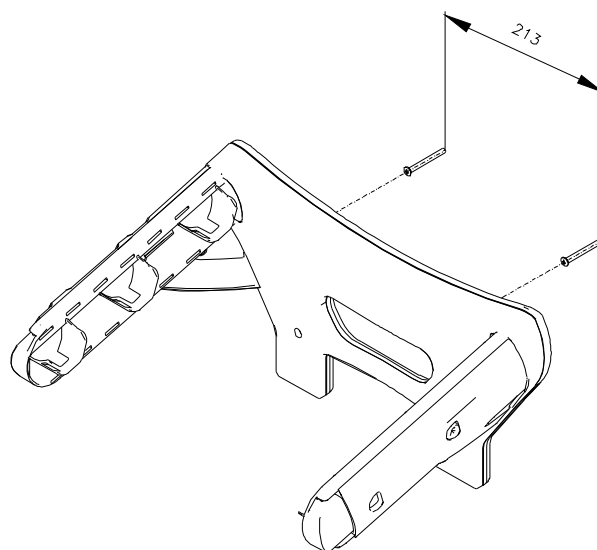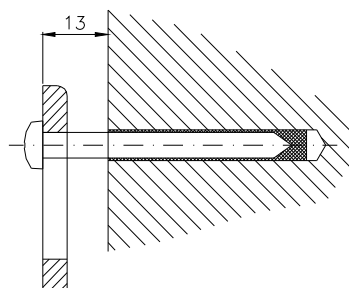

Bitte dem Wandtyp (Zement, Backstein, Gipskarton, usw.) entsprechende Dübel verwenden

- 2) Die Rollhalterung an den beiden an der Wand befestigten Schrauben einhängen.
(1) Die Löcher der Rollhalterung auf die Schraubenköpfe setzen
(2) und die Rollhalterung nach unten drücken, um sie zu befestigen.

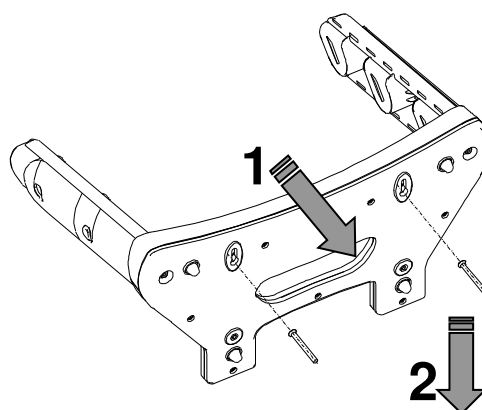

- 3) Die Rohre mit den Rollen einfügen (siehe 3.1 – Installation).



ACHTUNG:

Beim Einsetzen des Rohrs an der Rollhalterung bitte sicherstellen, dass der Zahn der Rollhalterung in den Schlitz am Rohr einrastet. Gegebenenfalls das Rohr leicht drehen.



ATTENZIONE:

Mit wandbefestigter Rollhalterung die Position mit eingesetzten Wangen und einem einzigen Rohr benutzen (siehe 3.2).

3.4 SICHERHEIT

Vor Gebrauch Ihres Folienschweißgerätes lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Ihre Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Schäden am Gerät führen.

ACHTUNG:


Die Finger nicht in den Schweißbereich bringen, wenn die Maschine eingeschaltet ist oder gerade ausgeschaltet wurde.

Wenn es unbedingt erforderlich sein sollte, diesen Bereich zu berühren, so warten Sie bitte unbedingt ab, bis das Folienschweißgerät abgekühlt ist.



Die Finger nicht unter die Schutzhaube des Schweißbereichs bringen, wenn der Andruckhebel abgesenkt wird.

Die Finger niemals in den Bewegungsbereich des Schneidmessers bringen.

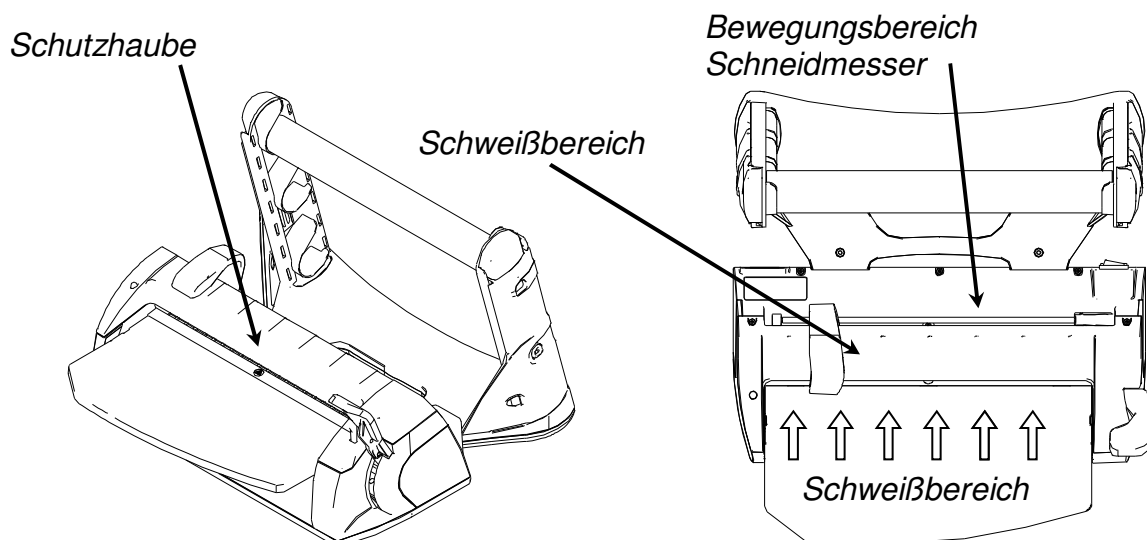

ACHTUNG:

Halten Sie den Bereich um das Folienschweißgerät sauber und trocken.



DAS FOLIENSCHWEISSGERÄT NIEMALS AUSEINANDER BAUEN. DIE INTERNEN HOCHSPANNUNGEN SIND GEFÄHRLICH.

Falls es nicht möglich sein sollte, den Strom abzuschalten, muss der Netzschalter ausgeschaltet werden. Ist dieser von der Maschine entfernt angebracht oder für den Wartungsarbeiter nicht sichtbar, so muss ein Schild mit der Beschriftung "Wartungsarbeiten im Gang" am Schalter angebracht werden, nachdem er auf OFF gestellt wurde.

ACHTUNG:

Das Folienschweißgerät mit einem feuchten Tuch reinigen, nachdem sichergestellt worden ist, dass das Netzanschlusskabel des Gerätes gezogen wurde (vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes eventuelle Feuchtigkeitsrückstände entfernen).

Keine Lösungsmittel verwenden.



Sicherstellen, dass das Gerät gemäß den Vorschriften des Benutzerlandes geerdet ist.

Das Maschinenetikett nicht entfernen.

Sicherstellen, dass das Gerät mit der korrekten Spannung gespeist wird.



BITTE AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE ORIGINALKABEL VERWENDEN.

BITTE AUSSCHLIESSLICH ORIGINALERSATZTEILE VERWENDEN.

Bei Betriebsstörungen der Maschine schauen Sie bitte zur Feststellung der möglichen Ursachen im Handbuch unter dem Abschnitt „Störungsbehebung“ nach. Für weitere Informationen oder eventuelle Reparaturen kontaktieren Sie bitte das Lager oder den Vertreter.

HINWEIS

- Das Gerät entspricht den von den Norminstituten vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanforderungen und ist mit einem bipolaren Stecker für die anforderungsgerechte Erdung des Gerätes versehen.
- Für die Betriebssicherheit des Gerätes ist es von grundlegender Bedeutung, dass die elektrische Anlage mit einer effizienten Erdung ausgerüstet ist und die Strombelastungswerte der Anlage und der Steckdosen der auf dem Leistungsschild angegebenen Stromleistung des Gerätes entsprechen. Lassen Sie die elektrische Anlage bitte von Fachpersonal überprüfen.

BEI NICHTBEACHTUNG DER OBEN BESCHRIEBENEN ANWEISUNGEN ÜBERNIMMT DER HERSTELLE KEINE HAFTUNG

3.5 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kontrollieren, dass die auf dem Leistungsschild des Produkts angegebene Versorgungsspannung mit der am Installationsort zur Verfügung stehenden Spannung übereinstimmt.

Das Gerät muss mittels des Netzanschlusskabels an eine den einschlägigen Vorschriften des Benutzerlandes entsprechend geerdete Stromanlage angeschlossen werden.

**ACHTUNG:**

Das Netzanschlusskabel nicht knicken noch irgendwelche Gegenstände darauf stellen.


4.1 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	200 / 240 V	100 / 120 V
Phasenanzahl	1	1
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Leistung	100 W	100 W
Isolationsklasse	I / IPX0	I / IPX0
Sicherungen	Nr. 2 – 5x 20 T4 A	Nr. 2 – 5x 20 F10 A
Bereich der Umweltbedingungen, für welche das Gerät ausgelegt wurde	• Benutzung im Innenraum • Höhe bis zu 3000 m - • Temperatur: +5 / +40 °C • Max. relative Feuchte: 85% • Max. Spannungsabweichung: ± 10 % • Installationskategorie (Überspannungskategorie): II • Verschmutzungsgrad: 1	
Schalter	Bipolar	
Gewicht	7.1 Kg	
Schweißnahtmaße	12 x 310 mm	
Schweißtechnik	Mit konstanter Temperatur	

5.1 BEDIENUNGSANLEITUNGEN

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Schalter drücken.

Netzschalter

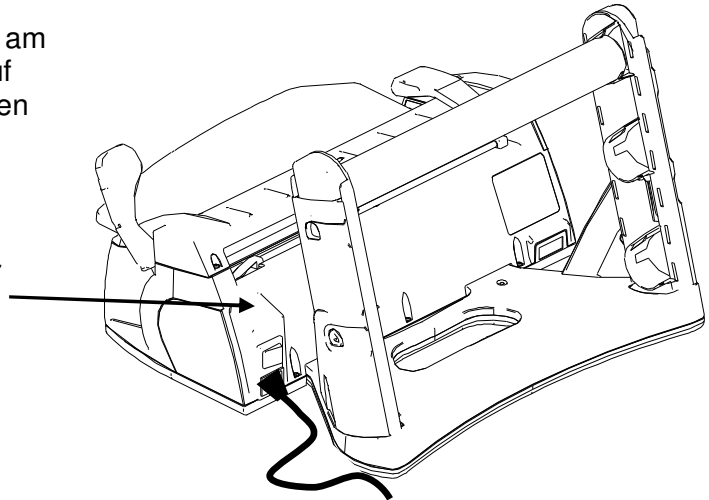


- 2) Die Led auf der Frontseite des Gerätes blinkt während der Aufheizzeit des Gerätes abwechselnd grün und rot auf.

Die Led leuchtet erst dann fest auf, wenn das Heizelement die optimale Schweißtemperatur erreicht hat.

Nun ist das Gerät gebrauchsbereit.


Led


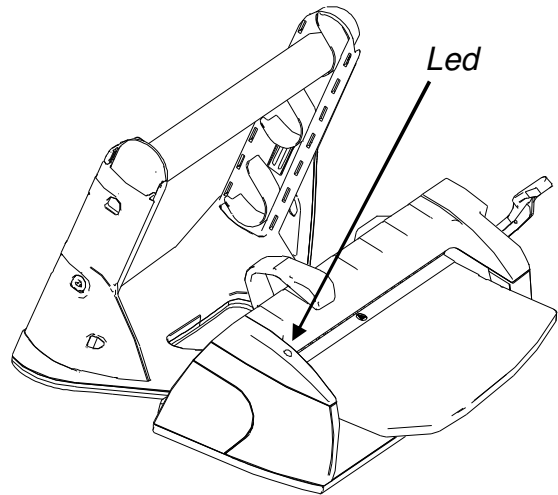


HINWEIS: Wenn während der Aufheizphase (Led blinkt abwechselnd rot und grün auf) der Schweißhebel abgesenkt wird, leuchtet die Led fest rot auf und es ertönt ein intermittierendes Tonsignal, womit das Gerät darauf hinweist, dass es noch nicht betriebsbereit ist. Heben Sie den Hebel an und warten Sie ab, bis die Led fest grün aufleuchtet.

- 3) Das Papier der Sterilisationsrolle unter der Rollenhalterung einführen.


Der Beutel kann entweder mit nach oben oder nach unten gerichteter Folie eingeführt werden. Nur bei Verwendung von Faltenbeuteln muss die Seite aus Polypropylen (Folie) stets nach OBEN gerichtet sein.

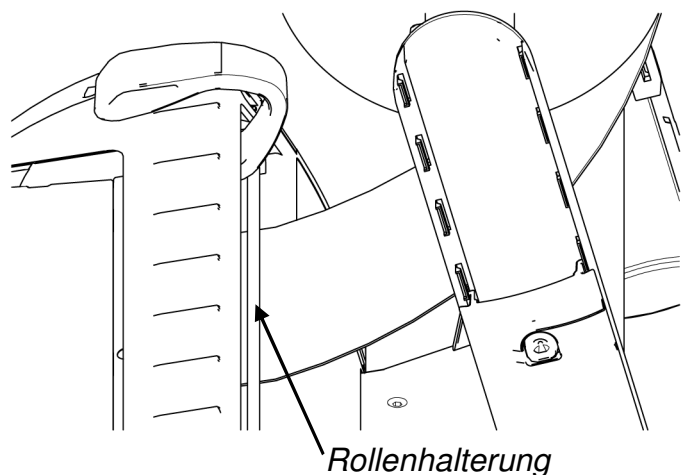

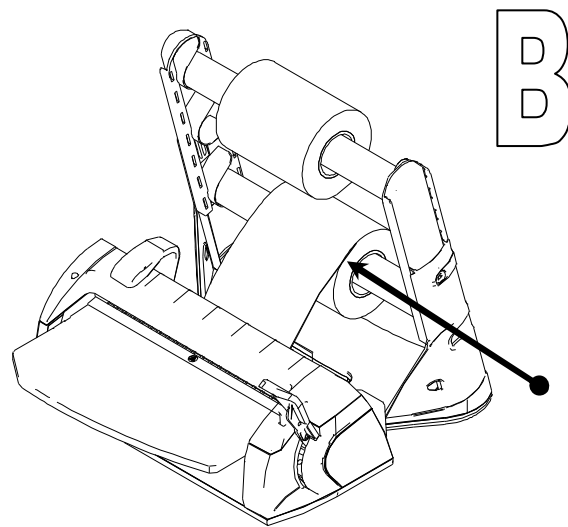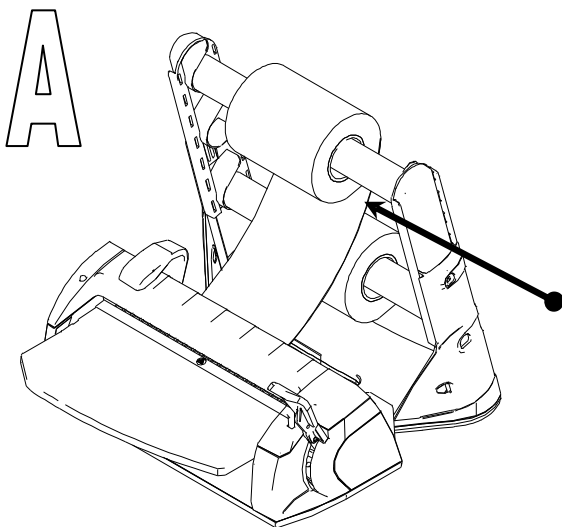Bei der Verwendung von 2 Rollenhalterrohren**A:** Die obere Rolle so einsetzen, dass das Papier von unten abgewickelt wird.**B:** Die untere Rolle hingegen so einsetzen, dass das Papier von oben abgewickelt wird.

- 4) Das Papier auf die gewünschte Länge abrollen und den Schweißhebel senken. Während des Schweiß- bzw. Versiegelungsvorgangs blinkt die Led grün (3 Sekunden lang).

- 5) Den Cursor des Schneidmessers laufen lassen, um von der Rolle den Beutel abzuschneiden (der Hebel muss solange abgesenkt bleiben). Am Ende des Versiegelungsvorgangs leuchtet die Led fest grün auf und es ertönt ein Tonsignal.

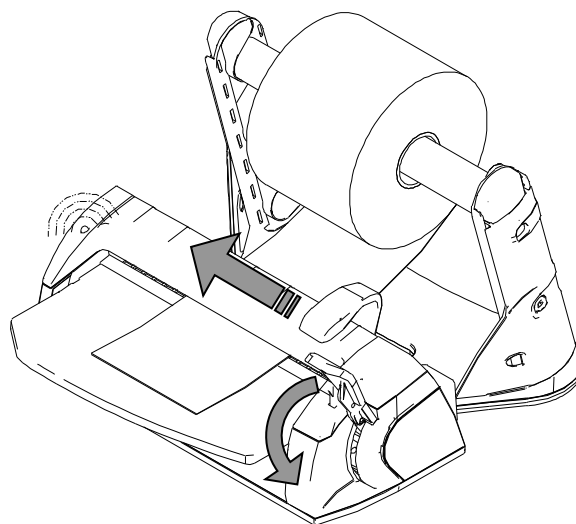


Nun ist der Versiegelungsvorgang vollständig abgeschlossen.

- 6) Den Schweißhebel anheben.

Beim Anheben des Hebels wird die Led wieder grün und das Tonsignal verstummt.

Ziehen Sie den Beutel heraus.

Das Gerät kann sofort für eine erneute Versiegelung gebraucht werden, ohne dass die Abkühlzeit abgewartet werden muss.

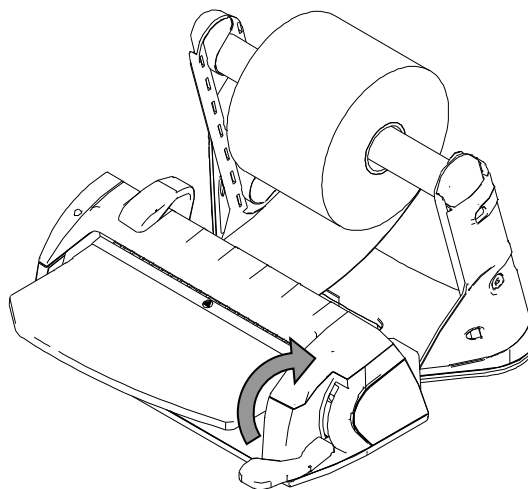

ACHTUNG:

Hebt der Bediener den Hebel nach dem Schweißvorgang nicht an, so schaltet sich das Heizelement automatisch aus, um den Beutel nicht zu verbrennen.
In diesem Fall blinkt die Led rot auf und der Signalton ertönt intermittierend.



Sobald der Hebel angehoben wird, schaltet sich das Heizelement wieder automatisch ein.
Es dauert allerdings einige Sekunden, bis die optimale Schweiß- bzw. Versiegelungstemperatur erreicht wird und man einen neuen Schweiß- bzw. Versiegelungsvorgang durchführen kann.

6.1 REINIGUNG DES FOLIENSCHWEISSGERÄTES

Das Gerät außen mit einem feuchten weichen Tuch reinigen (keine scheuernden oder korrosiven Produkte verwenden), nachdem das Netzanschlusskabel aus der Steckdose gezogen worden ist.

**ACHTUNG: VOR JEDEM EINGRIFF STETS DAS GERÄT SPANNUNGSLOS SETZEN.**

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Unfällen an Personen und zu ernsthaften Schäden am Gerät führen.

**ACHTUNG:**

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten ist zu überprüfen, dass das Gerät kalt ist. Während der Gerätereinigung auf die Messerklinge aufpassen.

**ACHTUNG:**

Vor Arbeitsbeginn ist zu überprüfen, dass die Maschine trocken ist.

6.2 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die Maschine bedarf keiner ordentlichen Wartung.

SÄMTLICHE AUSSERORDENTLICHEN WARTUNGSEINGRIFFE DÜRFEN NUR VON TECHNIKERN DES VOM HERSTELLER AUTORISIERTEN TECHNISCHEN KUNDENDIENSTES DURCHGEFÜHRT WERDEN.

6.3 STÖRUNGSBEHEBUNG

Meldungen für den Bediener

MELDUNGEN	URSACHE	ABHILFE
Die Led ist abwechselnd grün und rot.	Die Maschine heizt gerade auf und die Temperatur ist noch nicht ausreichend für einen korrekten Schweißvorgang.	Abwarten, bis die Led grün aufleuchtet und die Maschine somit betriebsbereit ist.
Die Led leuchtet fest rot auf und es ertönt ein intermittierendes Tonsignal.	Der Schweißhebel wurde während der Aufheizphase abgesenkt, also bei noch nicht betriebsbereiter Maschine.	Den Hebel wieder anheben und abwarten, dass die Led fest grün aufleuchtet.
Die Led blinkt rot auf und es ertönt ein intermittierendes Tonsignal.	Die Höchstzeit für den Schweißvorgang ist abgelaufen und der Hebel ist immer noch abgesenkt.	Unverzüglich den Hebel anheben.
Die Led blinkt orangefarben auf.	Das Gerät ist defekt.	Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst.

7.1 ANWEISUNGEN ZUR VERSCHROTTUNG



Dieses Symbol  auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Altgerät nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern getrennt entsorgt werden muss.

Daher muss der Benutzer das Altgerät zu den eigens von den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstellen bringen oder bringen lassen, oder es beim Kauf eines entsprechenden neuen Gerätes beim Fachhändler einreichen.

Die getrennte Müllsammlung und die darauf folgende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Produktion von Geräten mit recyclebaren Materialien und schränken die durch eine unsachgemäße Müllentsorgung verursachten negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen ein.

Die ordnungswidrige Entsorgung seitens des Benutzers wird mit der Verhängung von Verwaltungsstrafen bestraft.

Manufacturer:

W&H Sterilization S.r.l
Italy, I-24060 Brusaporto (BG)
Via Bolgara, 2
t +39/035/66 63 000
f +39/035/50 96 988
e office@wnhster.it
wh.com

Importer: