

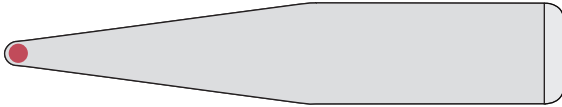
Gebrauchsanweisung

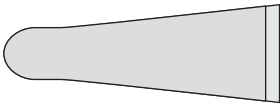
Cameraschutzhüllen

Deutsch (de)



Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf folgende Artikel:

Universal-Cameraschutzhülle Für alle marktüblichen Kamerasysteme geeignet	
	
REF	70310
Maße	4,6 x 23,5 cm
Verpackungseinheit	250 Stück

Shortcam / Kleine Cameraschutzhülle Für alle marktüblichen Kamerasysteme geeignet		
		
REF	70311	70311-A
Maße	1,8/3,4 x 9,5 cm	1,8/3,4 x 9,5 cm
Verpackungseinheit	250 Stück	500 Stück

REF 140063, 140064,
352000

- Die Universal-Cameraschutzhülle so weit wie möglich über die Intraoralkamera ziehen
- Die rote Abdeckung vom Klebepunkt entfernen
- Den oberen Teil der Hülle zurückfalten, glatt ziehen und auf der Rückseite der Kamera fixieren
- Auf einen straffen und faltenfreien Sitz der Folie im optischen Bereich der Kamera achten
- Nach der Nutzung fachgerecht entsorgen

REF 70310

- Die Kleine Cameraschutzhülle über die Intraoralkamera ziehen
- Nach der Nutzung fachgerecht entsorgen

REF 70311

Ref.-Nr. kann von der Art.-Nr. des Händlers abweichen. Bei Nachbestellung bitte die Nr. des Händlers verwenden.

Stand: 30. April 2021



Zweckbestimmung

Die Cameraschutzhüllen sind einmal verwendbare, transparente Kunststoff-Schutzhüllen zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen unter Patienten und zum Schutz der intraoralen Kamera bei digitalen Dental-Röntgenaufnahmen. Die Schutzhüllen sind kompatibel mit den gängigen intraoralen Handkameras auf dem Markt.

Leistungsdaten

Die Schutzhüllen sind aus latexfreiem, geruchlosem Kunststoff gefertigt und das Material wurde auf mögliche Hautunverträglichkeit getestet.

Die Schutzhüllen beeinflussen die Leistung der Kamerasysteme (Linsen) nicht.

Die Einmal-Schutzhülle dient als Unterstützung der zahnärztlichen Hygienemaßnahmen, ersetzt aber nicht Vorgaben der Hersteller zur Desinfektion oder Sterilisation der wiederverwendbaren intraoralen Handkameras.

Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes*

- Das Medizinprodukt darf nur von (ausgebildetem) zahnärztlichen Personal angewendet werden.
- Die Cameraschutzhüllen sind ausschließlich mit neuen Einmalhandschuhen zu verwenden, dadurch werden Kreuzkontaminationen vermieden.
- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch der Kamera eine neue Hygieneschutzhülle.
- Verwenden Sie nur für Kamerasysteme passende Hygieneschutzhüllen.
- Hygieneschutzhüllen sind Einwegartikel und dürfen unter keinen Umständen wiederverwendet werden.
- Bei Mehrfachanwendung können Kreuzkontaminationen zwischen Patienten auftreten, diese können zu Infektionen führen.
- Entsorgen Sie die Hygieneschutzhülle nach jedem Patienten/Einsatz.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte Hygieneschutzhülle.
- Einfache Anwendung und Entfernung gemäß den umseitigen Abbildungen.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Symbol-Bezeichnung – Erklärung der auf Verpackung und Etikettierung verwendeten Symbole gemäß EU-Medizinprodukte-Standard DIN EN ISO 15223-1:2017-04			
	Gebrauchsanweisung beachten		Bestellnummer
	Nicht zur Wiederverwendung		Chargenbezeichnung
	Nicht steril		Medizinprodukt
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen		Produktidentifikation
	Vor Nässe schützen		Anzahl Boxen in Verpackungseinheit
	Verwendbar bis		Anzahl Cameraschutzhüllen je Box
	Lagertemperatur		Anzahl Cameraschutzhüllen je Box (Shortcam)
	Hersteller		CE-Kennzeichnung

*Literatur: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>

²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011