



Insertar el Silensor-sl



Sacar el Silensor-sl

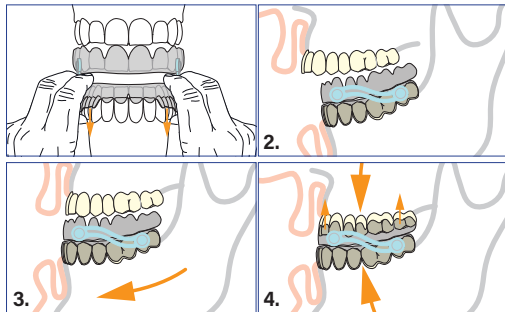

Jamás sacar el Silensor-sl así!

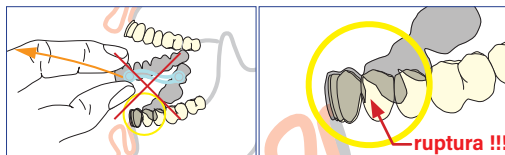


Tiene problemas de morder por la mañana?

Su musculatura se ha orientada diferentemente, esto puede durar un rato, pero no tiene consecuencias.

Muerda por algunos minutos, que figura en el imágen, en esta tira auxiliaría a morder y la reorientación acelerará considerablemente.



Antes y después del uso limpiar la tira auxiliaría a morder con jabón, lavar y guardar en un lugar seco.

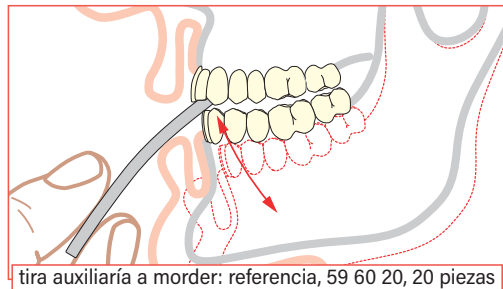

ERKODENT®

Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • info@erkodent.com