

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Gründe für die **Assistina Twin**



assistina  TWIN

Sales Guide

Los geht's!

Grünes Licht für mehr Zeit, Geld – und eine gesündere Umwelt.



Die neue Assistina Twin vereinfacht den Praxisalltag um einiges. Das einzigartige und innovative Aufbereitungsgerät mit Doppelkammer erleichtert den Hygieneprozess immens, arbeitet höchst effizient und rechnet sich schon nach kurzer Zeit. Und das ganz unabhängig davon, ob man das im Vergleich zu einem anderen Multiportsystem oder zu herkömmlichen Ölspraydosen sieht.

10
überzeugende
Gründe für die
Assistina Twin:

1. Schnelligkeit

Pflegt Instrumente in nur 10 Sekunden.



Die neue Assistina Twin benötigt für eine umfassende Ölpflege der Getriebeteile und die Reinigung der Spraykanäle nur 10 Sekunden. Damit ist sie das schnellste Aufbereitungsgerät am Markt. Auch in Sachen Bedienung: Denn das System lässt sich mit nur einem einzigen Knopfdruck starten.

Der Vorteil:

eine gründliche und präzise Ölpflege von bis zu 360 Instrumenten pro Stunde – und damit eine jederzeitige Verfügbarkeit perfekt gepflegter und gereinigter Instrumente.



2. Kontinuität

Setzt Wartezeiten ein Ende.



Dank ihres Zweikammersystems und der kurzen Durchlaufzeit kann die neue Assistina Twin nonstop benutzt werden. Denn während der 10 Sekunden, in denen das Instrument in Kammer 1 auf einen simplen Knopfdruck hin gepflegt wird, kann Kammer 2 bereits bestückt werden.

Der Vorteil:

Keine Wartezeiten, die zu kurz sind, um einer anderen Tätigkeit nachzugehen und zu lang, um in einem arbeitsintensiven Umfeld gelassen zu bleiben.



3. Flexibilität

Sorgt für mehr Flexibilität
und weniger Aufwand.



Das Zweikammernsystem der Assistina Twin kann vor Aufbereitungsbeginn mit entsprechenden Adaptern bestückt werden angepasst an die Bedürfnisse Ihres Praxisalltags. Das W&H Angebot umfasst Adapter für alle gängigen Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luftscaler und Luftmotore.



Der Vorteil:

der Arbeitsablauf wird gerade im Vergleich zu Ölspraydosen wesentlich effizienter und flexibler.

4. Präzision


Pflegt punktgenau,
ohne zu überölen.



Die neue Assistina Twin arbeitet mit exakt dosierter Ölmenge. Dafür sorgt die eingebaute elektronische Prozessüberwachung. Durch die neu entwickelte Technologie der Ölzerstäubung erreicht der feine Nebel wirklich jeden Teil des Getriebes.

Der Vorteil:

kein unnötiger Verbrauch durch Überölen und kein Risiko für daraus entstehende Komplikationen bei der Behandlung des Patienten.

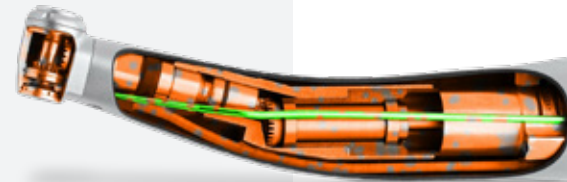

5. Effizienz

Pflegt 2800 Instrumente –
ohne Kartuschenwechsel.




Das Twin Care Set der neuen Assistina Twin besteht aus zwei Kartuschen, deren Inhalt gesamt für mehr als 2.800 Instrumente ausreicht. Damit ist die Assistina Twin anderen Ölpflegesystemen in Sachen Preis/Leistung deutlich überlegen.

Gesamtkosten bei 12.060 Instrumenten pro Jahr*



* Berechnung basierend auf 30 Patienten pro Tag x 2 Instrumenten inkl. Verschleißmaterial (Filter etc.)
lt. offiziell empfohlenen Verkaufspreisen.

- Zur genauen Berechnung des Return of Investment steht Ihnen auf wh.com ein speziell entwickeltes Berechnungstool zur Verfügung:

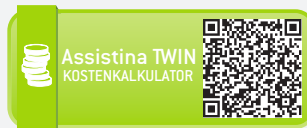

6. Einfachheit

Braucht wenig Zeit
für den Kartuschenwechsel.



Die Kartuschenvorrichtungen der Assistina Twin sind so gebaut, dass die beiden Kartuschen (1x Activefluid für Spraykanäle, 1x Service Oil F1 für die rotierenden Teile) einfach und ohne Verwechslungsrisiko eingesetzt werden können. Die elektronische Prozessüberwachung meldet rechtzeitig, wenn der Inhalt der Kartuschen zur Neige geht.



Der Vorteil:

schneller, einfacher und risikofreier Kartuscentausch ohne Werkzeuge – und damit mehr Zeit für andere Tätigkeiten.

7. Sicherheit

Schützt

Ihre Mitarbeiter.



Die Assistina Twin verfügt über eine aktive Absaugung und einen speziell entwickelten HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter). Dadurch wird der Ausstoß jeglicher Emissionen in die Umgebung verhindert.



Der Vorteil:

schützt Ihre Mitarbeiter vor schädlichen Aerosolen und verhindert unangenehme Gerüche in der Praxisluft.

8. Umweltschutz

Schützt

die Natur.



Alleine der Inhalt eines einzigen Assistina Twin Care Sets entspricht zwanzig Ölspraydosen, die abgesehen vom Ausstoß schädlicher Aerosole und Treibgase und ihrem Dasein als Einwegverpackung auch viel Platz zur Aufbewahrung benötigen.



Der Vorteil:

weniger Umweltschädigung und Abfall, mehr Platz in der Praxis.

9. W&H Service

Pflegt einfach –
und ist einfach
zu pflegen.

Bei der Entwicklung des Geräts wurde besonderer Wert auf Servicefreundlichkeit gelegt. Daher kann das Service bei allen W&H Servicestellen durchgeführt werden – und auch in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Denn zertifizierte W&H Servicetechniker können die Assistina Twin auch direkt vor Ort warten. Das spart Zeit, Geld, Nerven und unnötige Transporte.



10. W&H

Innovativ
und zuverlässig.

Mit der Assistina Twin entscheiden Sie sich für ein Gerät aus dem Hause W&H. Und damit für ein Gerät, das auf Basis 125-jähriger Erfahrung nach höchsten Qualitätsrichtlinien entwickelt und produziert wird. Darüber hinaus steht W&H für eine Anzahl von Innovationen im dentalmedizinischen Bereich. Die Assistina Twin wird mit 12-Monats-Garantie ausgeliefert.



Auf einen Blick:

Assistina Twin versus Ölspraydose

- 1 **Schneller:** 10 Sekunden pro Instrument
- 2 **Effizienter:** Zweikammernsystem für ununterbrochenen Workflow
- 3 **Präziser:** innovative Ölzerstäubung für perfekte Reinigung und Pflege auch der hintersten Winkel des Instruments
- 4 **Günstiger:** mittelfristig deutlich weniger kostenintensiv als Ölspraydosen
- 5 **Flexibler:** dank der großen Auswahl an Adaptern
- 6 **Platzsparender:** kein Stauraum für Spraydosen-Vorrat notwendig
- 7 **Sicherer:** keine gefährlichen Aerosole und keine unangenehme Geruchsentwicklung
- 8 **Umweltfreundlicher:** keinerlei Emissionen und weniger schädliche Abfälle
- 9 **Verlässlicher:** Dank ausgezeichnetem W&H Service
- 10 **Innovativer:** ein Gerät der Marke W&H

Assistina Twin versus Multiportsysteme

- 1 **Schneller:** 10 Sekunden pro Instrument, keine unnötigen Wartezeiten
- 2 **Effizienter:** Zweikammernsystem für ununterbrochenen Workflow
- 3 **Präziser:** innovative Ölzerstäubung für perfekte Reinigung und Pflege auch der hintersten Winkel des Instrumentes
- 4 **Günstiger:** weniger kostenintensiv als andere Multiportsysteme
- 5 **Anwenderfreundlicher:** leichte Bedienbarkeit, einfacher, werkzeugfreier Kartuscentausch
- 6 **Ökonomischer:** ein Assistina Twin Care Set für bis zu 2.800 Instrumente
- 7 **Praktischer:** sofortige Verfügbarkeit des Instruments
- 8 **Raumsparender:** leichtere Befüllung durch die Schiebevorrichtung
- 9 **Verlässlicher:** Dank ausgezeichnetem W&H Service
- 10 **Innovativer:** ein Gerät der Marke W&H





assistina^{TWIN}



Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörfälle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20474 ADT Rev. 002 / 22.07.2019
Änderungen vorbehalten

Hersteller:

**W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH**
Ignaz-Glaser-Straße 53,
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com, **wh.com**

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com