

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Einfach, effizient, schnell.

Assistina Twin jetzt mit
Quick Connect by W&H.



assistina **Q** TWIN


Assistina Twin mit **Quick Connect by W&H**

Die Assistina Twin von W&H ist einzigartig unter den Pflegegeräten: Mit ihrem innovativen Zweikammersystem, der Ölpflege in Rekordzeit und dem umweltfreundlichen Care Set überzeugt sie auf ganzer Linie.

Nun wurde die Assistina Twin um eine innovative Adapterlösung ergänzt:
Quick Connect by W&H.
Dieses Adaptersystem bietet Ihnen noch mehr Vorteile für Ihren Praxisalltag.



Die innovative Adapterlösung
für Übertragungsinstrumente.

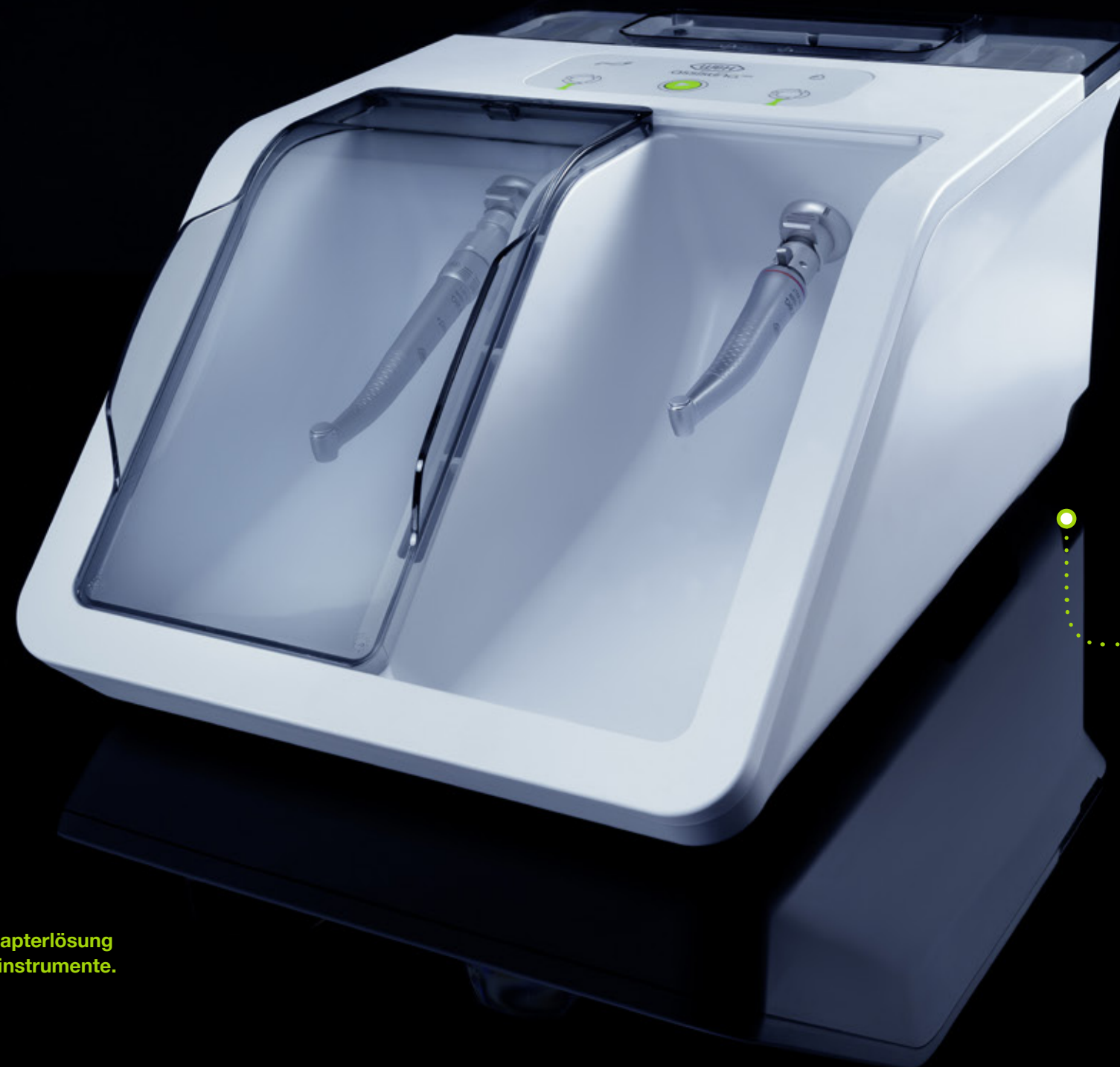

Quick. Click. Check.

Einfache Bedienung

Durch einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten mittels Entriegelungsknopf.

Schneller Adapterwechsel

Dank optimaler Vorbereitung: Die unterschiedlichen Adapter können außerhalb des Geräts vor und während des Pflegevorgangs vorbereitet werden.

Mehr Flexibilität


Durch die Zusammenstellung der Adapter, die Sie tatsächlich benötigen.

Verbesserte Arbeitsabläufe

Dank einfacher Betätigung und schneller Anbindung mit Quick ISO- oder Quick RM-Adapter.

Ihren Bedürfnissen angepasst

Dank integriertem Quick Connect by W&H fügt sich die Assistina Twin noch besser in Ihre Arbeitsabläufe ein und gestaltet diese noch effizienter. Warum? Weil Sie das Pflegegerät mit genau den Adaptern ausstatten können, die Sie für Ihre Übertragungsinstrumenten benötigen.

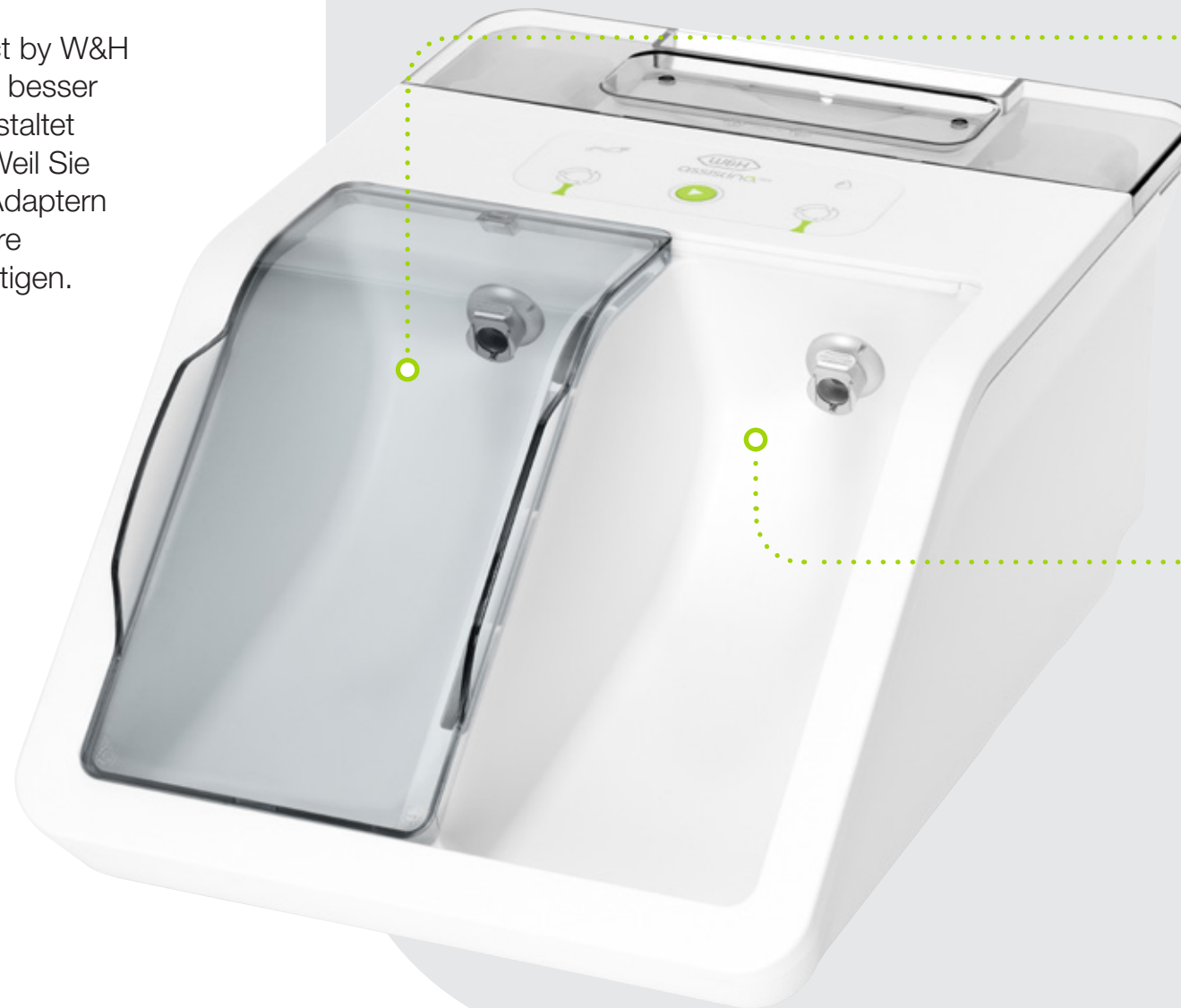

Quick RM für Turbinen.




Quick ISO für Hand- und Winkelstücke.



NEU mit Quick Connect by W&H

ALT

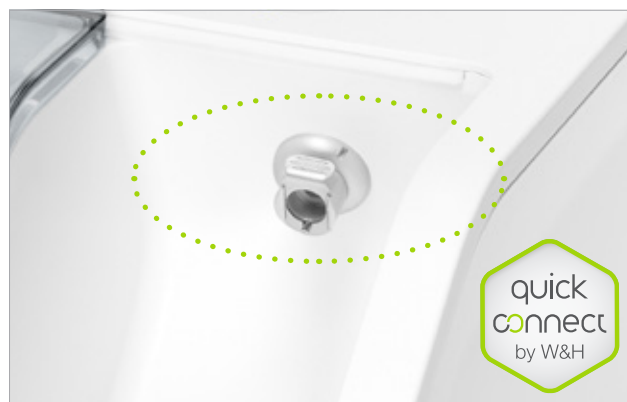

Einfache und schnelle Adapterwechsel optimieren Ihre Arbeitsabläufe und steigern die Effizienz in der Praxis.

Sie entscheiden, welche Adapter Sie tatsächlich benötigen. Statten Sie Ihre Assistina Twin ganz nach Ihren Bedürfnissen aus und bestücken die beiden Kammern nur mit den für Sie passenden Adaptern.



Ölpflege ohne Wartezeit

Grünes Licht für mehr Nachhaltigkeit:
Mit der Assistina Twin gehören
Wartezeiten während der Ölpflege der
Vergangenheit an. Sie ist das erste
Aufbereitungsgerät, das mit zwei
abwechselnd nutzbaren Prozesskammern
ausgestattet ist und somit eine nonstop
Bestückung ermöglicht. Entspannt
aufbereiten, effizienter denn je!

Sandra Schnäp
Zahnarztassistentin

»Wow, ist die flott! Dank dem
Zweikammersystem benötige
ich für die Aufbereitung
der Instrumente nur einen
Bruchteil der Zeit. Sie ist
extrem leise und sieht dabei
auch noch super aus.«



Läuft wie geschmiert



1
Instrument in Kammer 1
aufstecken.

2
Kammer 1 schließen
und Prozess starten.

3
Zweites Instrument aufstecken
und Kammer 2 schließen,
sobald Prozess von Kammer 1
beendet ist.

4
Instrument von Kammer 1
entnehmen und Schritte
1 bis 2 wiederholen.



Ölpflege in Rekordzeit

Noch nie wurden Ihre Instrumente so schnell gepflegt wie mit der Assistina Twin. Durch die innovative Technologie der Ölzerstäubung ist es W&H gelungen, den Pflegeprozess auf eine Rekordzeit von nur 10 Sekunden zu senken. Für ein rasend schnelles und unvergleichlich gründliches Pflegeergebnis.



Bahnbrechende Technologie

Gründliche und umfassende Ölpflege der Getriebeteile (orange) und Reinigung der Spraykanäle (grün) durch die innovative Technologie der Ölzerstäubung.

Ein innovatives System

Das Öl wird zerstäubt, bevor es mit hohem Druck durch das Instrument geblasen wird. So werden Verschmutzungen noch effektiver aus dem Inneren des Instruments entfernt. Durch den feinen Nebel wird zudem jeder noch so entlegene Winkel des Getriebes benetzt, ohne dass dabei die Getriebeteile in Bewegung versetzt werden müssen. Sämtliche Aerosole werden mittels aktiver Absaugung und integriertem HEPA-Filter aus den Prozesskammern eliminiert.

Praktisch für jede Praxis

Die Assistina Twin passt sich den individuellen Anforderungen Ihrer Praxis an. Sie schafft bis zu 360 Instrumente pro Stunde nicht nur wegen des innovativen Prozessverfahrens mit der kurzen Prozesszeit, sondern auch dank ihres ergonomischen Designs und der großen Auswahl an Adaptern.

Dr. Christian Müller
Zahnarzt mit eigener Praxis

»Nun habe ich die Gewissheit, dass meine Instrumente zwischen den Behandlungen aufbereitet werden können, ohne dass dabei Wartezeiten für mich oder meine Patienten entstehen. Ein echter Gewinn für meine Praxis.«



Maximale Ölpflege bei minimalem Verbrauch

Dank smarter Prozessüberwachung pflegt die Assistina Twin stets gründlich bei minimalem Verbrauch. Das Assistina Twin Care Set muss erst nach rund 2.800 Instrumenten gewechselt werden. So pflegen Sie Ihre Instrumente nicht nur sicher und schnell, sondern auch noch kosteneffizienter denn je.



Assistina Twin Care Set
so ergiebig wie 20 Ölspraydosen*



Twin Care Set
Besteht aus jeweils einer Kartusche Reinigungslösung, einer Kartusche Service Oil F1 und einem HEPA-Filter. Alle Verbrauchsmaterialien sind spielend leicht, ohne Werkzeug, zu tauschen.

Sichere, komplette Aufbereitung dank W&H

Sterilisation, Hygiene und Pflege in der zahnärztlichen Praxis werden immer wichtiger. W&H bietet bestmögliche Verfahren an Hygieneprotokollen als Komplettlösung für die Aufbereitung Ihrer Hand- und Winkelstücke und Turbinen.



W&H bietet eine große Auswahl an Zubehör zur Optimierung der Sterilisationsverfahren. Kleine Extras mit großer Wirkung. Die Arbeit in der Praxis wird einfacher und Ihr Team spart Zeit.

Technische Daten



Typ:	MB-302 Assistina Twin
Prozess:	Reinigung der Spraykanäle, Ölpflege
Geeignet für:	Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luftscaler, Luftmotore
Netzspannung:	100–240 V AC
Maximale Leistungsaufnahme:	18 VA
Luftverbrauch:	ca. 40 NI/min.
Betriebsdruck:	5–10 bar (Regelung durch eingebauten, automatischen Druckregler)
Maße (B × T × H):	297 × 435 × 190 mm
Gewicht:	3,5 kg
Füllmenge:	200 ml Reinigungslösung W&H Activefluid 200 ml W&H Service Oil F1

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com