


# CA<sup>®</sup> Pro / CA<sup>®</sup> Pro+

Die kraftvolle Alignerfolie mit flexibler Elastomerschicht.

Mehr Ausdauer, weniger Druck: CA<sup>®</sup> Pro setzt neue Maßstäbe in der Alignertherapie. Ein flexibler Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale sorgt für ein kontinuierliches Kraftniveau bei reduzierter Initialkraft und höherem Tragekomfort.

CA<sup>®</sup> Pro kann sowohl als Ein-Schienen-Alignermaterial als auch innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA<sup>®</sup> Protokoll verwendet werden.

- // hohe Elastizität und Bruchsicherheit durch flexible Elastomerschicht
- // kontinuierliche Kraftübertragung, minimaler Kraftverlust
- // angenehmes Tragegefühl durch sanfte Initialkraft
- // auch als CA<sup>®</sup> Pro+ mit aufgebracht Schutzfolie erhältlich

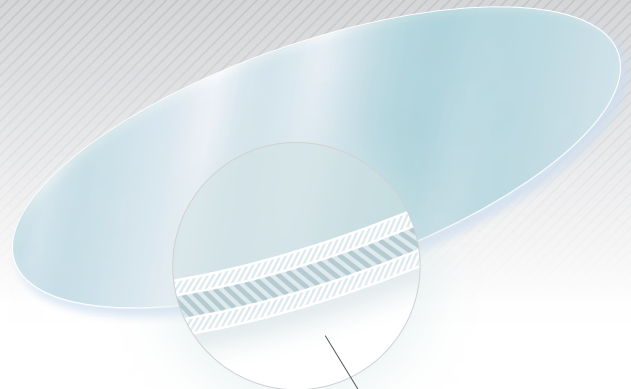

CA<sup>®</sup> Pro

Die innovative Doppelschalenkonstruktion mit Elastomerkern. Gleichbleibendes Kraftniveau. Weniger Initialkraft.



## Lieferprogramm:

### CA<sup>®</sup> Pro (ohne aufgebrauchte Schutzfolie)

// CA <sup>®</sup> Pro	0,5 mm	Ø 125 mm	<b>3640.1</b> 10 Stück	<b>3640.2</b> 100 Stück
// CA <sup>®</sup> Pro	0,625 mm	Ø 125 mm	<b>3641.1</b> 10 Stück	<b>3641.2</b> 100 Stück
// CA <sup>®</sup> Pro	0,75 mm	Ø 125 mm	<b>3642.1</b> 10 Stück	<b>3642.2</b> 100 Stück

CE

### CA<sup>®</sup> Pro+ (mit aufgebrauchte Schutzfolie)

// CA <sup>®</sup> Pro+	0,5 mm	Ø 125 mm	<b>3644.1</b> 10 Stück	<b>3644.2</b> 100 Stück
// CA <sup>®</sup> Pro+	0,625 mm	Ø 125 mm	<b>3645.1</b> 10 Stück	<b>3645.2</b> 100 Stück
// CA <sup>®</sup> Pro+	0,75 mm	Ø 125 mm	<b>3646.1</b> 10 Stück	<b>3646.2</b> 100 Stück

CE

CA<sup>®</sup> Pro+ ist auch mit einem Durchmesser von 120 mm erhältlich.

# IMPRIMO® LC Splint flex


Das neue 3D-Druckerharz mit thermoaktivem Memoryeffekt. Passt sich perfekt an.

Das neue lichthärtende, methacrylatbasierte 3D-Druckerharz ist für die Herstellung von hochpräzisen, transparenten Aufbisssschienen sowie von Knirscher- und Unterkieferprotrusionsschienen indiziert.

Der thermoaktive Memoryeffekt sorgt für eine perfekte Anpassung des Materials. Die große Flexibilität im ausgehärteten Zustand gewährleistet einen hohen Tragekomfort, geringe Bruchanfälligkeit und gute Polierbarkeit. Wie fast alle IMPRIMO® LC Druckerharze ist auch IMPRIMO® LC Splint flex frei von Verdünnermonomeren. Der Anwender erhält somit ein Produkt, das eine risikoarme und weitgehend unbedenkliche Handhabung möglich macht. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

## Funktionen und Vorteile:

- //** Hohe Flexibilität
- //** Thermoaktiver Memoryeffekt
- //** Exzellente mechanische Eigenschaften
- //** Parameter für Asiga MAX™, Asiga PRO 4K, RS wash, RS cure, IMPRIMO® Clean und IMPRIMO® Cure verfügbar

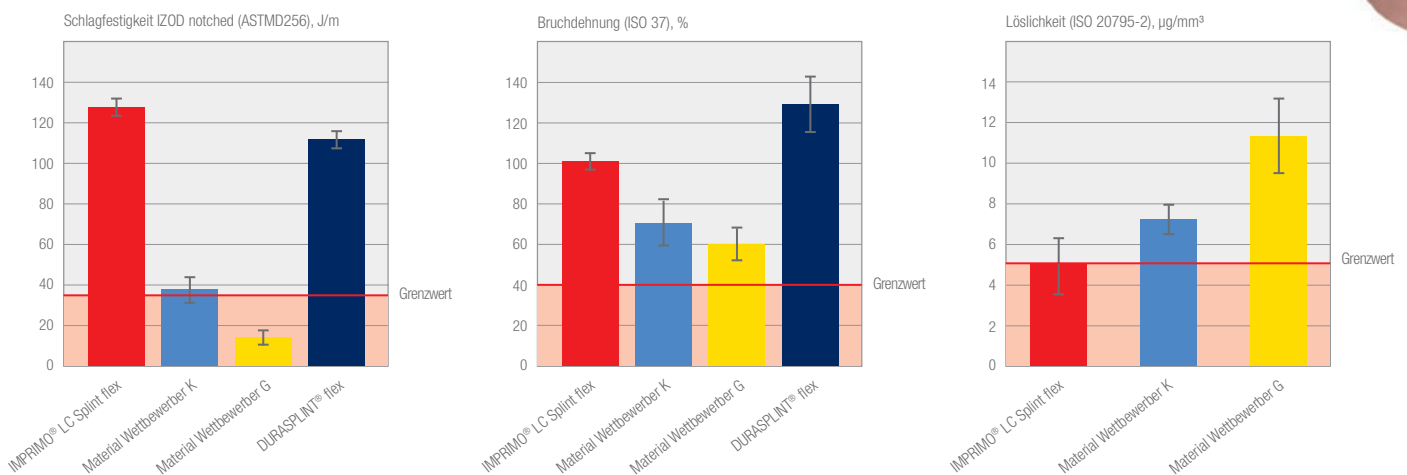

## Lieferprogramm:

<b>// IMPRIMO® LC Splint flex</b>	500 g	6525.1
<b>// IMPRIMO® LC Splint flex</b>	1000 g	6525.2

CE

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.  
 Sie finden uns unter: [www.scheu-dental.com/vertrieb\\_dach](http://www.scheu-dental.com/vertrieb_dach)



# IMPRIMO® Model Separator

Das wasserbasierte, blau-transparente Gel zur Isolierung von 3D-gedruckten Modellen. Für eine optimale Isolierwirkung.

Mit dem IMPRIMO® Model Separator erreichen Sie einen optimalen Isoliereffekt zwischen IMPRIMO® LC Druckerharzen und STEADY RESIN Autopolymerisaten bei der Herstellung von herausnehmbaren KFO-Apparaturen. Das Isoliergel enthält keine flüchtigen, organischen Lösungsmittel und sorgt somit für eine unbedenkliche Anwendung. IMPRIMO® Model Separator ist nicht geeignet für 3D-Modelle aus einem Filament-Drucker.

## Funktionen und Vorteile:

- /// Optimale Isolierwirkung durch Ausbildung eines gleichmäßigen Films auf dem Modell
- /// STL-Datensatz zum 3D-Druck des Aufstellers für Pumpflaschen und Pinsel als Download verfügbar
- /// Erhältlich als 100 ml Pumpflasche mit Pinsel und als Refill in der 500 ml Nachfüllflasche

## Lieferprogramm:

/// IMPRIMO® Model Separator (Pumpflasche inkl. Pinsel)	100 ml	6551.1
/// IMPRIMO® Model Separator REFILL (Nachfüllflasche)	500 ml	6551.2
/// Pinsel Leonhardy	1 Stück	6510.002



# CA® TIP 5

Die Alignerzange CA® TIP 5 zur Korrektur von Schienen- und Aligner-Rändern. Verhindert Druckstellen an der Gingiva.

Die Alignerzange CA® TIP 5 ist speziell für die Anpassung von Alignern-Rändern zur Vermeidung von Druckstellen im Bereich der Gingiva indiziert.

Das macht CA® TIP 5 ideal für CA® PROFESSIONAL, aber auch für alle anderen Systeme, die gingiva-getragene Aligner anbieten.

## Funktionen und Vorteile:

- /// Ideal zur Bearbeitung von Schienenrändern dank abgewinkeltem Zangenkopf
- /// Sterilisierbar
- /// Aus Edelstahl. 5 Jahre Garantie auf Material, Verarbeitung, Bruch und Korrosion

## Lieferprogramm:

/// CA® TIP 6	1 Stück	5323.1
---------------	---------	--------


CE



SMILE LITE FULL

CA® PROFESSIONAL FAMILY

CA  
DIGITAL  
SCHEUGROUP

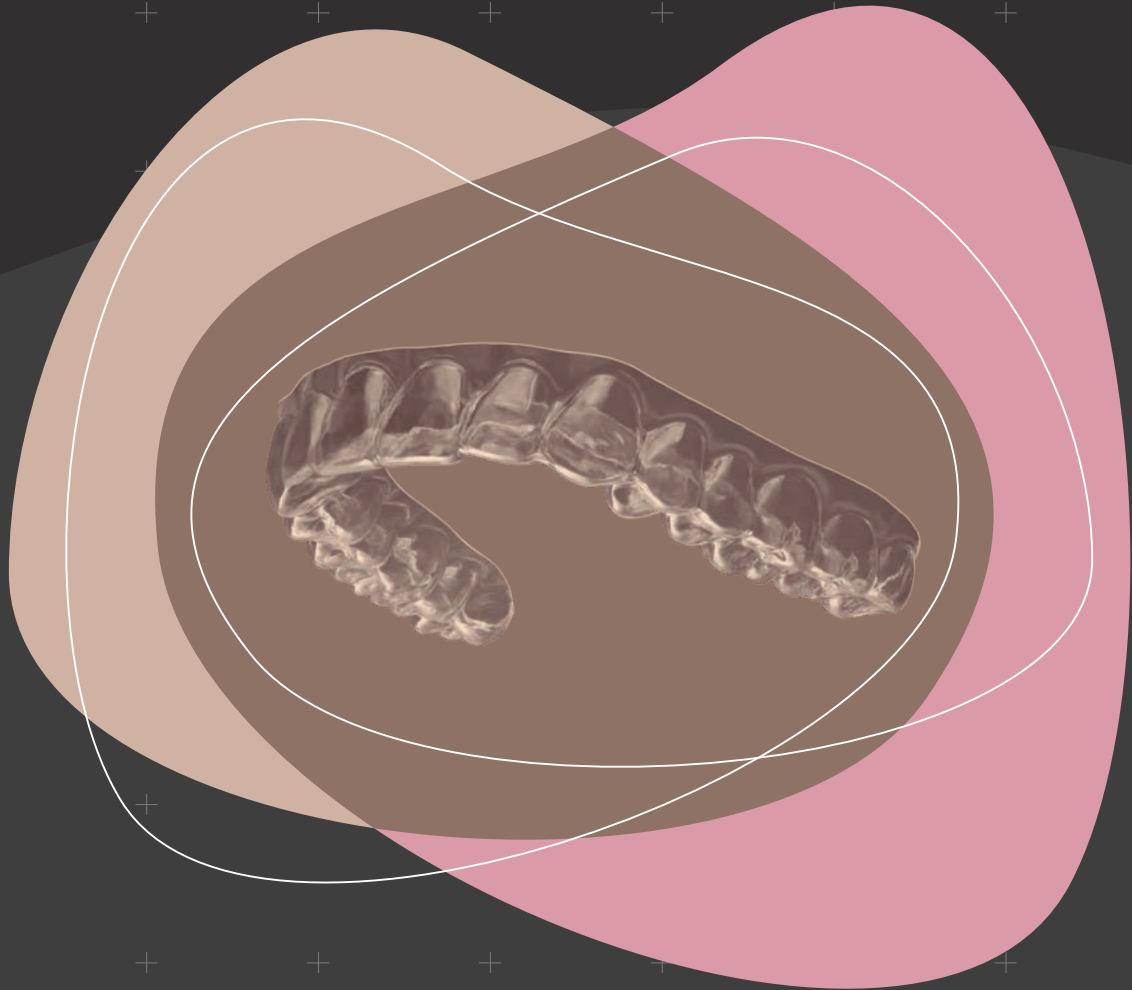

JETZT FÜR ALLE INDIKATIONEN:  
DIE CA® PROFESSIONAL FAMILIE

DAS ALIGNER-SYSTEM  
MIT RUNDUM-SUPPORT