

# MEHR VERGNÜGEN!

## CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal



### Vorteile auf einen Blick

01

#### UNIVERSELL

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal ist ein universell einsetzbares Komposit mit einem einfachen Farbsystem. Eine einzige Farbe ist die Lösung für alle Restaurationen im Seitenzahnbereich. Für den ästhetisch anspruchsvolleren Frontzahnbereich stehen zwei Farboptionen zur Verfügung.

02

#### ÄSTHETISCH

Unabhängig von der natürlichen Zahnfarbe lassen sich mit den drei verfügbaren Komposit-Farben Restaurationen erstellen, die sich harmonisch in die bestehenden Strukturen einfügen. Dafür sorgen unter anderem eine optimale Lichtstreuung und gute Polierbarkeit. So lassen sich auf einfache Weise hohe ästhetische Ansprüche erfüllen.

03

#### KOMFORTABEL

Die Anwendung ist aufgrund des einfachen Handlings zeitsparend und ästhetisch. Eine komplexe Farbbestimmung entfällt, sowie die Nutzung eines Blockers. Der Materialbestand und die damit verbundene Lagerhaltung reduziert sich enorm. Fehlerquellen können so eliminiert werden. Dieses Komposit ist einfach und effektiv in seinem Handling und in seiner Anwendung.

### AUSGEZEICHNETE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Biegefestigkeit                        | 118 MPa  |
| Füllstoffgehalt                        | 78 wt%   |
| Druckfestigkeit                        | 347 MPa  |
| Volumenschrumpfung                     | 1,9 %    |
| Aushärtungstiefe                       | 2,0 mm   |
| Verarbeitungszeit unter Umgebungslicht | 4,5 Min. |

Quelle: Kuraray Noritake Dental Inc.

### Das Farbkonzept

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal ist ein universelles Komposit mit einem einfachen Farbsystem, das den Verzicht auf die oft so komplizierte Zahnfarbbestimmung ermöglicht.

## FARBAUSWAHL

Das CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal-Farbkonzzept besteht aus 3 Farben:

- Die Farbe **Universal (U)** ist für alle Restaurationen im Seitenzahnbereich geeignet.
- Für den ästhetisch anspruchsvolleren Frontzahnbereich stehen mit **Universal Light (UL)** und **Universal Dark (UD)** zwei Farben zur Verfügung.

Für alle Seitenzahnrestaurationen

**Universal (U)**

Für alle Frontzahnrestaurationen

**Universal Light (UL)**

**Universal Dark (UD)**


HELLE FARBEN

DUNKLE FARBEN

| A1     | A2     | A3     | A3.5   | A4     |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| B1, B2 | D2, C1 | C2, D3 | B3, B4 | C3, C4 |

## KURARAY NORITAKE DENTAL'S LIGHT DIFFUSION TECHNOLOGIE (LDT)

Die Integration der Light Diffusion Technologie (LDT) von Kuraray Noritake war die Voraussetzung für die Entwicklung des CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal-Farbkonzepes. Diese Technologie sorgt im Restaurationsmaterial für eine ähnliche Streuung des einfallenden Lichtes wie auf der benachbarten Zahnhartsubstanz. Dies führt dazu, dass sich das Material unauffällig in das Gesamtbild integriert. Die Behandlungsergebnisse sind trotz aller Verfahrensvereinfachungen langfristig ästhetisch.

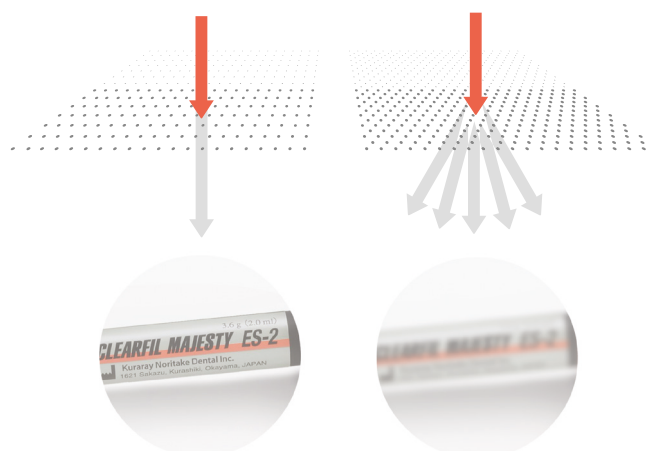

Lichtstreuung ohne LDT

Lichtstreuung mit LDT

## PRODUKTSORTIMENT

| ARTIKELNUMMER | CLEARFIL MAJESTY™ ES-2              | INHALT                     |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| #3181-EU      | <b>UNIVERSAL Syringe (U)</b>        | 1 syringe U: 2,0ml (3,6g)  |
| #3183-EU      | <b>UNIVERSAL Syringe Light (UL)</b> | 1 syringe UW: 2,0ml (3,6g) |
| #3184-EU      | <b>UNIVERSAL Syringe Dark (UD)</b>  | 1 syringe UL: 2,0ml (3,6g) |
| #3182-EU      | <b>UNIVERSAL Syringe White (UW)</b> | 1 syringe UD: 2,0ml (3,6g) |
| #3191-EU      | <b>UNIVERSAL PLT (U)</b>            | 20 PLT U: 0,25g            |
| #3193-EU      | <b>UNIVERSAL PLT Light (UL)</b>     | 20 PLT UW: 0,25g           |
| #3194-EU      | <b>UNIVERSAL PLT Dark (UD)</b>      | 20 PLT UL: 0,25g           |
| #3192-EU      | <b>UNIVERSAL PLT White (UW)</b>     | 20 PLT UD: 0,25g           |

Mehr Informationen unter [kuraraynoritake.eu/universal-composite](http://kuraraynoritake.eu/universal-composite)