

Auf einen Blick

Die neue KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Der Workflow

1. Intraoral-Aufnahmen


Erste visuelle Kontrolle als Überblick über die dentale Situation

2. Transilluminationstechnologie

Tieferegehende Einblicke in die Zahnstruktur und Kariesdiagnostik

3. Fluoreszenz-Aufnahmen

Zusätzliche Sicherheit vor Behandlungsabschluss, z. B. vor Setzen der Füllung gesamtes kariöses Material aus der Kavität entfernt?

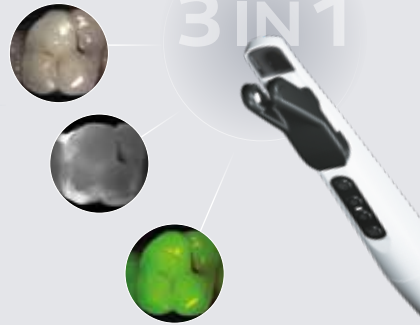

Top Features

- Full HD
- 1 Tip
- Permanenter Autofokus
- Einsatz bei jeder O1 und Prophylaxebehandlung vorab als Kariescheck möglich

Die Vorteile

Qualität und Effizienz

- **Extraorale und intraorale Aufnahmen:**
Portrait bis Makro dank permanentem Autofokus
- **Kein Aufsatzwechsel:**
Nur 1 Tip für den gesamten Workflow und alle Modi
- **Full-HD-Qualität:**
Gestochen scharfe Bilder und größerer Bildausschnitt
- **Kein Scharfstellen nötig:**
Permanenter Autofokus braucht keinen extra Knopfdruck
- **Optimale Integration in den Behandlungsworkflow und die -einheit**

Patientenkommunikation

- **Höhere Behandlungsakzeptanz:**
Verständnis durch sofortige Darstellung am Bildschirm
- **Mehr Füllungen möglich:**
Karies wird schnell, einfach und optimal sichtbar
- **Weniger Röntgenaufnahmen:**
Durch Transilluminationstechnologie
- **Keine Röntgenstrahlung:**
Behandlung von Kindern, Schwangeren, strahlungssensitiven Patienten

Auf einen Blick

Die neue KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Warum sich die DIAGNOcam Vision Full HD lohnt

- **3-in-1:**
Einmalige Investition in nur 1 Kamera statt in 3
- **Nur 1 Tip für den gesamten Workflow:**
Kein Aufsatzwechsel, keine Investition in verschiedene Aufsätze
- **Permanenter Autofokus:**
Automatisch scharfe Bilder ohne Knopfdruck
- **Zeitersparnis:**
Sofortiger Überblick über dentale Situation durch 3-in-1-Technologie, kein Aufsatzwechsel durch 1-Tip-Prinzip, keine verwackelten Bilder durch permanenten Autofokus
- **Weitere smarte Features:**
Full HD, Status LEDs, induktive Energieübertragung zwischen Handstück und Tip (hermetische Abdichtung des Handstücks), Ringspeicher (wählt bestes Bild)
- **Mehr Karies erkennen, mehr Karies behandeln**

Die Software

- **Kostenfreie Update Version 2.1.0, als ausführbare Datei (.exe) im KaVo TIP Portal**
- **Optimierungen im Vergleich zur Vorgängerversion:**
 - Integration DIAGNOcam Vision Full HD sowie Zahnschema und Zahnstatus
 - Höhere Laufstabilität und -Sicherheit
 - Schnelleres und stabileres Livebild nach Kameraentnahme
 - Schnelle Verfügbarkeit gespeicherter Bilder



90092950_de 05/21_REVO © Copyright KaVo Dental GmbH.

Kontakt KaVo Service Team:

Tel. +49 7351 56-2700 | service.multimedia@kavokerr.com

KAVO
Dental Excellence