

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Effizient. Flexibel. Sanft.

Piezo Scaler
Handstücke PB-3
und PB-5 L Q
Ultraschallscaler
der Spitzenklasse



Piezo Scaler mit Spitzenleistung

Der W&H Ultraschallscaler glänzt durch seine hohe Abtragsleistung und der sanften, patientenschonenden Anwendung. Er bietet höchsten Komfort und ist dank effektivem W&H Spitzensystem flexibel im Einsatz. Modernste Piezotechnologie verbessert Effizienz und taktils Empfinden bei allen klinischen Indikationen.



W&H Spitzensystem

Das mit Endanwendern entwickelte Spitzensystem ist perfekt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte abgestimmt.



Maximale Effizienz

Leistungsstark und sanft zugleich für eine schonende Anwendung und eine schmerzfreie Behandlung.

Leicht zu reinigen

Beide Piezo Scaler Handstücke lassen sich zum leichteren und besseren Reinigen einfach zerlegen, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.




Handlich und komfortabel

Die Form des Handstücks und das geringe Gewicht sorgen für höchsten Komfort.



5-fach Ring LED

Taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle durch 5 LEDs mit dem PB-3 LED Handstück.

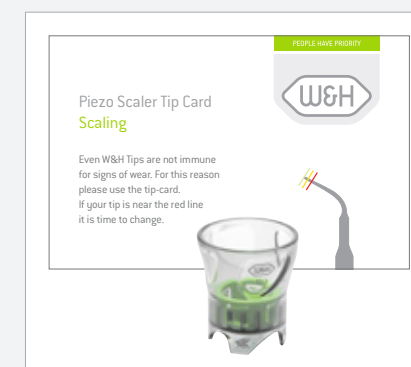

Nützliches Zubehör

Spitzen einfach und sicher mit dem Spitzenwechsler wechseln und mit der Spitzenkarte überprüfen.




Behandlungsstelle stets gekühlt

Der integrierte Spray sorgt für eine konstante und effektive Kühlung der Behandlungsstelle.

Vielfältige Anwendung

Dank stufenloser Leistungsregulierung lassen sich die W&H Piezo Scaler mühelos auf die jeweilige Anwendung und Spitze einstellen. Von Prophylaxe und Parodontologie über die Implantaterhaltung oder Endodontie bis zur Mikropräparation von Restaurationen, die Anwendungsmöglichkeiten sind besonders vielfältig.

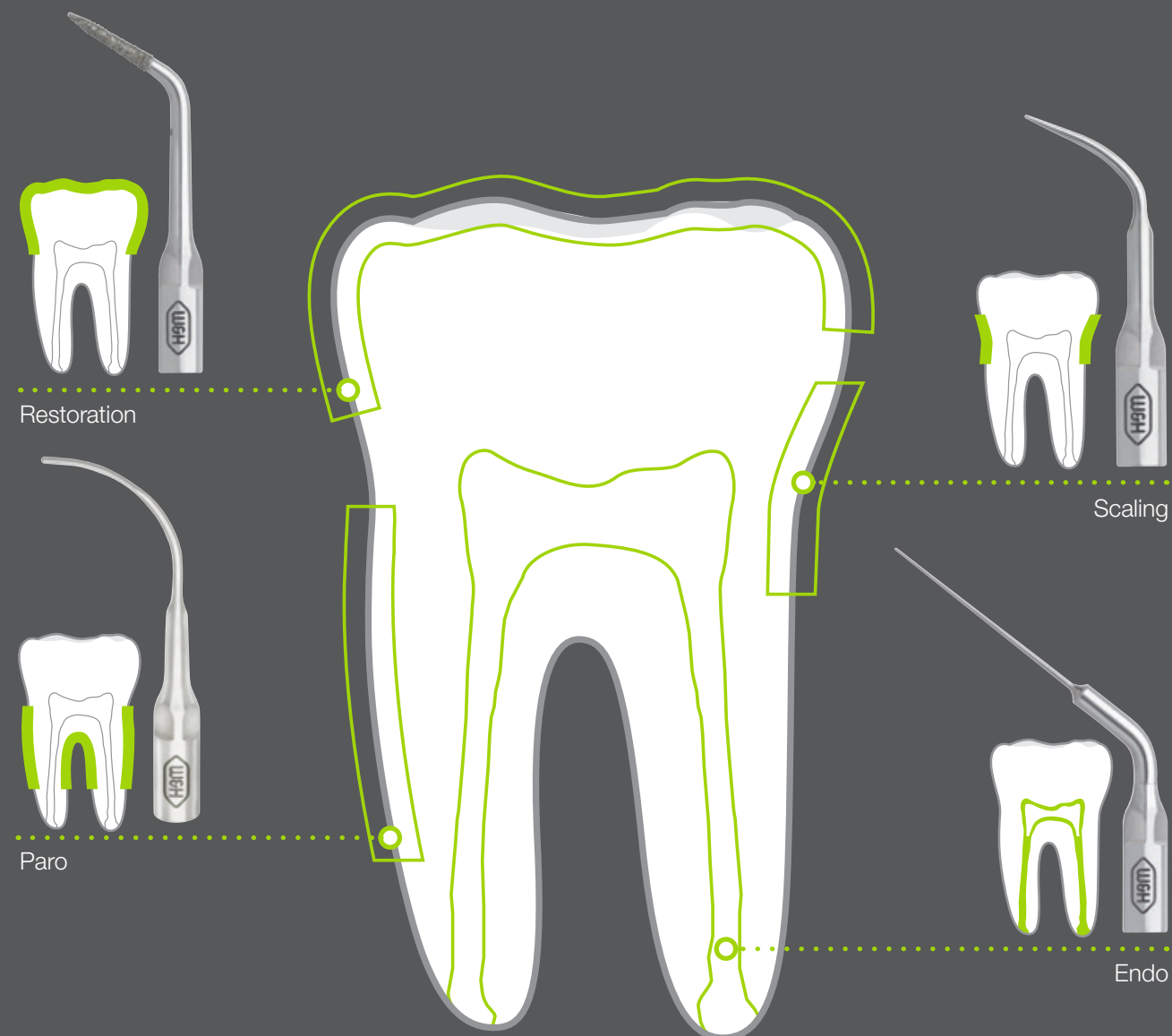

W&H Piezo Scaler

Die W&H Piezo Scaler lassen sich optimal in Ihren individuellen Workflow integrieren. Entscheiden Sie sich für die exklusive Stand-alone-Lösung Tigon+, einen Proxeo Ultra Piezo Scaler oder nutzen Sie die Vorteile einer Built-in Solution – der komfortablen Integration in Ihre Dentaleinheit.



Tigon+

Exklusive Stand-alone-Lösung mit temperierter Flüssigkeit für ein Maximum an Patientenkomfort.



PB-530

Der W&H Piezo Scaler mit kabelloser Fußsteuerung für mehr Bewegungsfreiheit und höchsten Anwenderkomfort.



PB-520/PB-510

Die kompakten Modelle der Proxeo Ultra Piezo Scaler überzeugen mit oder ohne Tank.



Built-in Solution

Ausgewählte Einheitenhersteller bieten W&H Piezo Scaler als integrierte Antriebslösung im Rahmen des Gesamtsystems an. Die Bedienung erfolgt einfach und bequem über die Steuerzentrale Ihrer Dentaleinheit. Fragen Sie bei W&H oder Ihrem Einheitenhersteller nach den Piezo Scälern von W&H als Built-in Solution.

Integrierte Piezotechnologie

Ob das PB-5 L Q, PB-5 L oder das PB-3 Built-in Set, beide integrierbaren Piezo Scaler von W&H können bequem mit der Fußsteuerung der Einheit betrieben, per Köcherschalter aktiviert und per Drehregler gesteuert werden.



Piezo Scaler Built-in Set
Einfache Einbaulösung für die Integration in Ihre bestehende Dentaleinheit.



Leistung anpassen
Mit dem Drehregler können Sie die Leistung optimal auf die Anwendung abstimmen.



LED Handstück
Das LED-Ring ermöglicht eine taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



Built-in Set analog
Machen Sie Ihre Behandlungseinheit zukunftsfit. Mit den W&H Built-in Solutions, wie etwa dem PB-3 Built-in Set analog. Die Piezo Scaler Einbaulösung der neuen Generation – kompatibel und kombinierbar.



PB-2 E LED Built-in Set analog
Das Built-in Set PB-2 E LED wird mit dem PB-3 LED Handstück geliefert.

Technische Daten

Piezo Scaler Handstück	PB-3	PB-5 L Q	PB-5 L	PB-5 L S
Licht:	ohne Licht	LED-Ring		
Gewicht:	52,5 g	55 g		
Länge ohne Spitze:	104,3 mm	135 mm (mit Kupplung)		
Durchmesser:	20,2 mm	18,5 mm		

Built-in Set analog	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Piezo Controller:	PC-1.0	
Anschlusset elektrisch:	✓	
Drehregler:	✓	
Versorgungsschlauch:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Handstück:	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Spitzenwechsler mit eingesetzter Spitze:	TW-1: 1U, 1P	TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P

Tania Eberle
Dentalhygienikerin, Deutschland

»Was manuell oft nicht zu erreichen ist, schafft der W&H Piezo Scaler mit Leichtigkeit. Ein sehr überzeugendes Produkt!«



Stand-alone-Lösungen
Alle Informationen zu den W&H Piezo Scaler Stand-alone-Lösungen, wie dem Tigon+, Proxeo Ultra und Pyon 2 finden Sie auf wh.com



Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken


	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* Q-Link Spitzen (z. B. 1UQ, 2UQ) sind mit dem PB-5 L Q kompatibel.

** W&H Spitzen mit Satelec Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogerätes zu sorgen.

Farbcodesystem

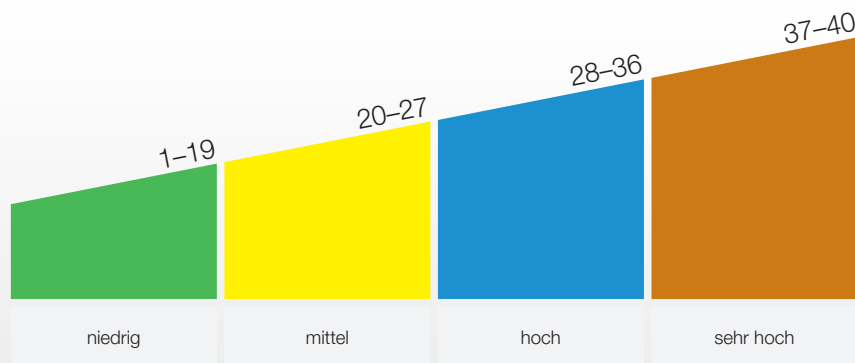

Angabe der Leistungsstufen für
W&H Spitzen mit Satelec Gewinde

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com