

KAVO

eSCALER

Präzision und Qualität
auf höchstem Niveau.



Die Highlights auf einen Blick

Behandlung für alle Fälle

Spitzen für sub- und supragingivale Anwendungen.

Qualität, der Sie vertrauen können

Made by KaVo in Deutschland.

Hervorragende Sicht

Perfekte Lichtqualität durch innovative, ringförmige LEDs.

Maximale Flexibilität

Integrierbar in alle aktuellen KaVo Dentaleinheiten und nachrüstbar für alle bestehenden Dentaleinheiten mit PiezoLED.

Dynamic Performance Technology™

Die dynamische Leistungsanpassung sorgt für schonende aber effektive Patientenbehandlungen.

Intuitiv und präzise zugleich

Linear oszillierende Spitzenbewegung und stufenlose Leistungseinstellung.


Aufbereitung leicht gemacht

Alle Komponenten sind thermodesinfizier- und sterilisierbar.




Dynamic Performance Technology™

Dank der Dynamic Performance Technology™ erkennt der KaVo eSCALER wie viel Druck während der Behandlung ausgeübt wird. Um die Zahnschubstanz zu schonen, ist für die Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein weniger mehr. Erhöht der Behandler den Druck, um Zahnstein oder Konkrement zu entfernen, wird die Leistung dem Druck entsprechend kontinuierlich erhöht. Dadurch ist eine sanfte, angenehme und zeitgleich effektive Behandlung möglich.

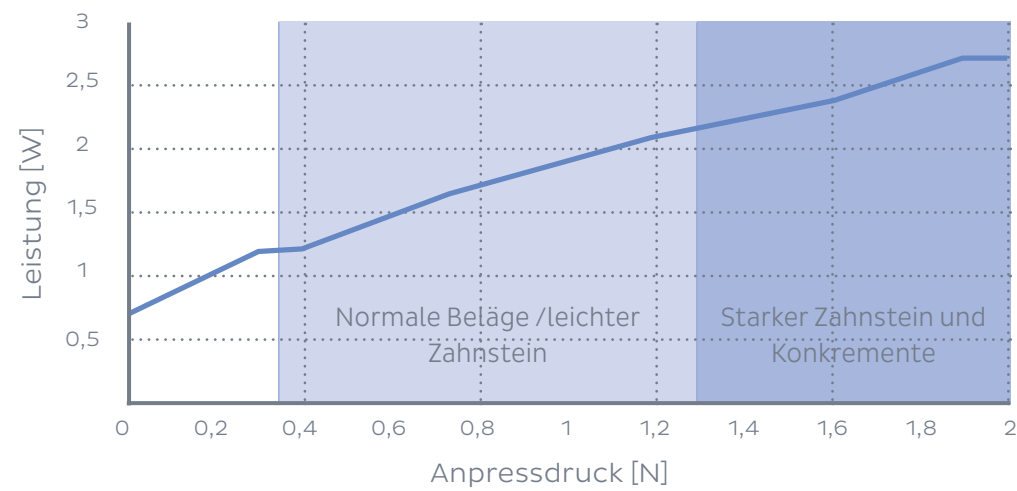

Aufbereitung

Mit dem KaVo eSCALER setzen Sie auf kompromisslose Hygiene und maximale Sicherheit – immer RKI-konform. Dank seiner durchdachten Konstruktion können das LED-Modul und der Lichtleiter einfach abgenommen werden. Alle Komponenten, einschließlich der Spitzen, sind thermo-desinfizier- und sterilisierbar. Der Aufbereitungsadapter ist bereits im Lieferumfang enthalten. Vertrauen Sie auf eine Lösung, die gültige Hygienevorschriften mühelos erfüllt und Ihren Praxisalltag spürbar erleichtert.

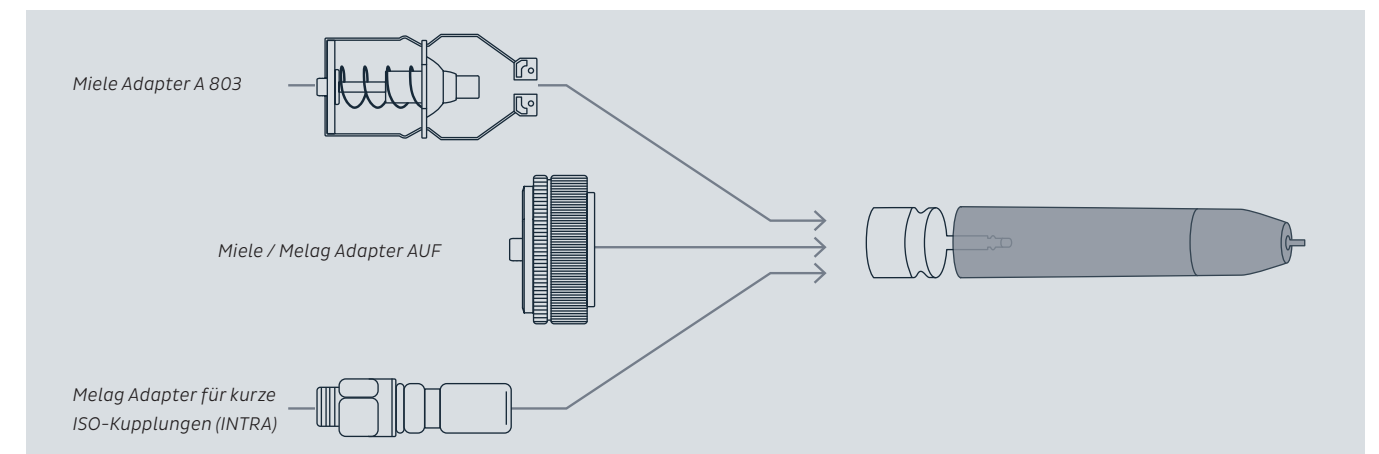


Hygiene Center

Dank eines angepassten Einsatzes im Hygiene-Center der KaVo Dental-einheiten ist auch die Reinigung des KaVo eSCALER Instrumentenschlauchs intuitiv und einfach.



Zubehör / Komponenten

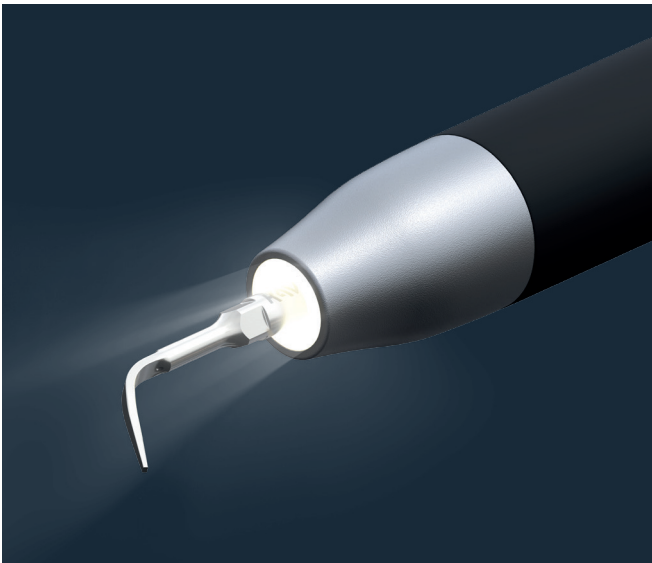

Der KaVo eSCALER überzeugt durch herausragende Zuverlässigkeit und Robustheit, wie sie nur deutsche Ingenieurskunst bieten kann. Außerdem können Sie beim KaVo eSCALER ganz einfach sowohl den Lichtleiter als auch das Lichtmodul austauschen. Ein Ersatzlichtleiter ist bereits im Standardlieferumfang enthalten. So bleiben Sie jederzeit flexibel und einsatzbereit.

Vielseitig und für die Zukunft gerüstet:
Das KaVo eSCALER Spitzenportfolio

Vielseitiges Spitzenportfolio von der Entfernung von Pigmentflecken bis hin zur Entfernung von Zahnstein und Konkrementen im sub- und supragingivalen Einsatzbereich.

eSCALER	Tip K201	Tip K202	Tip K203	Tip K214
Mat. Nr.	1.015.4741	1.015.4742	1.015.4743	1.015.4744
Produkt	Universelle Scaling Spitze	Universelle Scaling Spitze	Paro Spitze	Paro Spitze
Anwenderbereich	Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten	Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein und subgingivalen Konkrementen bis zu 4mm Taschentiefe in allen Quadranten	Für die Entfernung subgingivaler Ablagerungen und Konkrementen für tiefe Zahntaschen (bis zu 10mm)	Für die Anwendung in parodontalen Zahnfleischtaschen. Speziell für Kontroll- und Wiederholungsbehandlungen geeignet
Zahnschmelz	Zahnschmelz	Zahnschmelz und Wurzeloberfläche	Zahnschmelz und Wurzeloberfläche	Wurzeloberfläche
KaVo eSCALER Kompatibilität	✓	✓	✓	✓
PiezoLED / PIEZOsoft Kompatibilität	✓	✓	✓	✓

Bitte die jeweiligen Empfehlungen für Leistungseinstellungen beachten

Alle Produkte können
einzeln bestellt werden.

Folgende Komponenten sind Teil des Standardlieferumfangs des KaVo eSCALERS, wenn der KaVo eSCALER als Teil der Einheitenkonfiguration oder als Nachrüstsatz bestellt wird:

1x KaVo eSCALER Starter Set (1.015.2000)

- 1x KaVo eSCALER Handstück
- 1x eSCALER Aufbereitungsadapter
- 1x eSCALER Ersatzlichtleiter
- 1x eSCALER Verschleißmesskarte

1x KaVo Tip Set (1.015.2050)

- 1x eSCALER Tip K201
- 1x eSCALER Tip K202
- 1x eSCALER Tip K203
- 3x eSCALER Drehmomentschlüssel



Dental Excellence in jedem Bereich

Wofür wir als Marke stehen

KaVo ist schon immer da und wird es immer sein. Entsprechend stehen wir und unsere Produkte seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Verlässlichkeit, sodass sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können.

KaVo versteht es elementare Anforderungen, Ergonomie, höchste Hygieneansprüche und Design kompromisslos zum besten Gesamtpaket zu verbinden. Durch das perfekte Zusammenspiel aus Dynamik und Expertise sind wir hierbei immer am Puls der Zeit.



KaVo Dentaleinheiten -
die Investition in Ihre Gesundheit



KaVo Instrumente -
den Unterschied fühlen



KaVo Imaging -
mehr sehen, besser planen



Dentale Ausbildung -
exzellent lernen

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten vorzunehmen.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina und eSCALER sind eingetragene Marken der KaVo Dental GmbH.