

OneGloss M ■ OneGloss ■ OneGloss PS



One-Step Finierer und Polierer für Komposit und Schmelz


Die einstufigen Silikonpolierer mit Aluminiumoxid bieten das ideale Finish für alle Arten von Komposit-Restaurationen, indem einfach der Anpressdruck von der Ausarbeitung bis zur Politur verändert wird – ohne Instrumentenwechsel und ohne Polierpaste!

Das Sortiment umfasst vier Formen, die optimal auf die zu bearbeitenden Zahnflächen abgestimmt sind. Die OneGloss M Instrumente, bei denen die Polieraufsätze auf einem Winkelstück-Schaft aus Edelstahl montiert wurden, sind sterilisierbar. Als Einwegvarianten stehen die unmontierten OneGloss- und die auf einem strapazierfähigen Kunststoff-Mandrell vormontierten OneGloss PS Polierer zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

■ PRAXIS

Ausarbeiten und Polieren von Komposit-Restaurationen und Schmelzflächen in einem Arbeitsgang, Abtragen von Eingliederungszementen ohne Beschädigung empfindlicher Inlays, Beseitigung von Oberflächenverfärbungen sowie Schmelzpolitur nach einer Zahnreinigung

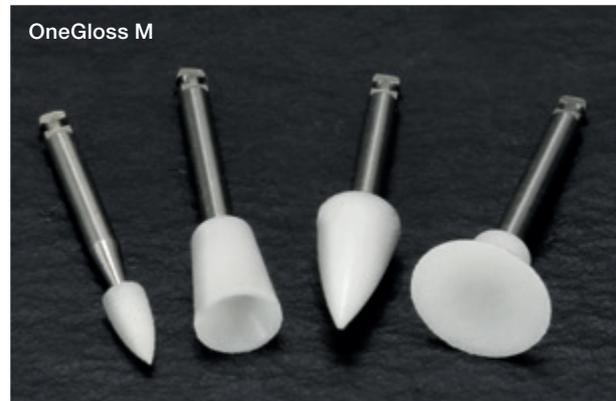

highlights

- Silikonpolierer mit Aluminiumoxid
- Optimales Verhältnis von Anpressdruck zu Umdrehungszahl
- Kein Instrumentenwechsel notwendig
- Politur ohne Polierpaste
- Optimale Schleifleistung
- Vibrationsarmes Arbeiten

OneGloss M / OneGloss:
Min⁻¹ Empf. 3.000 - 10.000 / Max. 15.000 /
 AD: 0,3 N bei Politur / 1,0 N bei Ausarbeitung

OneGloss PS:
Min⁻¹ Empf. 3.000 - 5.000 / Max. 5.000 /
 AD: 0,3 N bei Politur / 1,0 N bei Ausarbeitung



Form	Kelch	Midispitze	IC	Minispitze	Mandrell
ISO-Nr.	060	060	100	030	
OneGloss M	0187	0188	0189	0186	
OneGloss	0181	0182	0183		0435
OneGloss PS	0176	0177	0178		

info

Wenn hoher Anpressdruck ausgeübt wird oder bei der Schmelzpolitur sollte intermittierend mit Wasserspray gearbeitet werden.

OneGloss M Polierer sind sterilisierbar.

OneGloss und OneGloss PS Polierer sind Einwegartikel.

Best.-Nr.	Menge	Produkt
OneGloss M		
0186-0189	12 St.	OneGloss M, montiert, Schaft W Formen: Kelch, Midispitze, IC, Minispitze
OneGloss		
0180	1 St.	OneGloss Kit, 60 unmontierte Polierer (je 20x Kelch, Midispitze, IC) + 3 W-Mandrells
0181-0183	1 St.	OneGloss Nachfüllpackung, 50 St., unmontiert, Formen: Kelch, Midispitze, IC
0435	6 St.	W-Mandrell
OneGloss PS		
0175	1 St.	OneGloss PS Kit, 50 St.: Kelch 15 St., IC 15 St., Midispitze 20 St., alle einzeln verpackt
0176-0178	50 St.	OneGloss PS, alle einzeln verpackt, Formen: Kelch, Midispitze, IC