

Gegen Reflux: Protect-Kanülen von Dürr Dental

Gleich mitbestellen!



Nebenlufteinlässe können verhindern, dass es beim „Ansaugen“ der Kanüle zu einem Rückfluss von kontaminierten Sekreten aus dem Saugsystem kommt.

Universalkanüle Protect

Die ergonomisch geformten und autoklavierbaren Kanülen zur Spraynebelabsaugung sind selbst mit Nebenlufteinlässen äußerst leise.

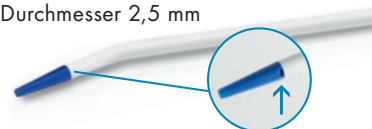
- 20er Pack, Grau ■
- 5er Pack, Grau ■
- 5er Pack, Gelb ■
- 5er Pack, Blau ■



Chirurgische Einwegkanüle




Die ca. 17 cm lange Kanüle mit dem \varnothing 2,5 mm verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.

- 20er Pack, Kanülen-Durchmesser 2,5 mm
- 100er Pack, Kanülen-Durchmesser 2,5 mm



Jetzt bei Ihrem Fachhändler bestellen:

Ja, Orotol® hat mich überzeugt.
Ich bestelle (bitte Menge angeben):

-  **Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion**
Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
-  **MD 555 cleaner Spezialreiniger**
Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
-  **MD 550 Mundspülbecken-Reiniger**
Gebindegröße: 750 ml-Flasche

Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Depots.

Das starke Team gegen Keime, Schlamm und Co.

Orotol® plus und MD 555 cleaner



PO07-137-01 / App-dd.de / 0/01/01/01 Technische Änderungen vorbehalten

Absender _____
Name: _____
Strasse: _____
PLZ/Ort: _____
Datum/Unterschrift: _____



Schluss mit Ablagerung und Verstopfung

Ungefähr die Hälfte aller Sauganlagen ist in ihrer Leistung eingeschränkt

Der Grund: viele Anlagen werden zwar desinfiziert, aber nicht richtig gereinigt. Das aber ist dringend nötig: Schließlich hat man es hier mit vielen aggressiven Stoffen zu tun, wie z.B. Blut, Sekrete, Zahnmaterial, Füllungswerkstoff oder Prophylaxe-Pulver. Diese bilden einen äußerst zähen Schlamm. Das führt zu Verstopfungen, die einen Leistungsabfall und im schlimmsten Fall einen kompletten Praxisstillstand zur Folge haben können.

Die Lösung von Dürr Dental: Orotol® plus und MD 555 cleaner

Orotol® plus und MD 555 cleaner schützen in Kombination alle Sauganlagen-Bestandteile (auch Leitungen!) vor Ablagerungen, Verkeimung und Verkrustung. Bei regelmäßiger Anwendung können Sie eine Leistungsbeeinträchtigung verhindern und das Leben Ihrer Sauganlage verlängern.



Mit Orotol® plus und MD 555 cleaner



Abscheidebehälter, schlammfrei



Zentrifugentrommel läuft rund - ohne Schlamm



Zentrifugengehäuse, Verkrustungen sind hier ausgeschlossen



Ohne Orotol® plus und MD 555 cleaner



Abscheidebehälter, voller Schlamm



Zentrifugentrommel, durch Schlamm in der Leistung beeinträchtigt



Zentrifugengehäuse, verkrustet - Totalausfall der Saugmaschine

Ein starkes Team für die Sauganlage

Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies, hochergiebiges Flüssig-Konzentrat für die gleichzeitige Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Für Saugsysteme, von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Keine Resistenzbildung gegen Keime
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Werterhaltend für die Sauganlage
- Löst Biofilm und beugt Verschleimung vor (Blut, Proteine)
- Langzeitwirkung
- Breites Wirkungsspektrum

Wirkstoffe

QAV

Gebindegröße

1 l-Flasche
2,5 l-Flasche

Anwendung im

OroCup

Orotol® plus: Konsequenter gegen

- Bakterien
- Hefepilze
- Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und Coronaviren



MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Konzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen von Pulverstrahlmitteln
- Löst Verkrustungen und Verschleimungen aus Kalk und Prophylaxepulver (Entkalker)
- Ideal in Kombination mit Orotol® plus oder Orotol® ultra
- Wirkungsvolle Zusammensetzung aus organischen Säuren und schaumfreien Tensiden

Gebindegröße

2,5 l-Flasche

Anwendung im

OroCup

MD 555 cleaner: Konsequenter gegen

- Prophylaxe-Pulver
- Prophylaxe Pearl-Produkte
- Salze/Carbonate
- Kalk

