

DESIGN AT ITS BEST!




KKD® RWT® COLOR


Röntgenhaltersystem für die
Rechtwinkel-/ Paralleltechnik
X-ray Holder system for the
Right Angle- / Paralleling Technique




Exaktes Anvisieren aller gängigen Rund- und Rechtecktuben durch Abstufungen im Visiererring.
Precise aiming of all current round- and rectangular cones due to the special stepped design.

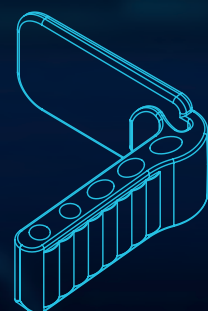


Das neue Lochdesign erlaubt ein noch einfacheres Aufstecken und Lösen der Bißplatten von der Führungsstange.
The new design of holes enables an even easier attaching and separating of the bite blocks to/ from the indicator arm.

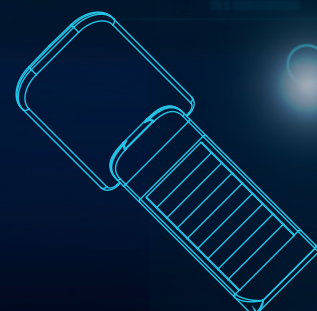

Weiterentwickelte Fixierlippe: Folien und Filme werden noch schonender in Position gehalten.
Enhanced clamping part: image plates and films are gently hold in position.

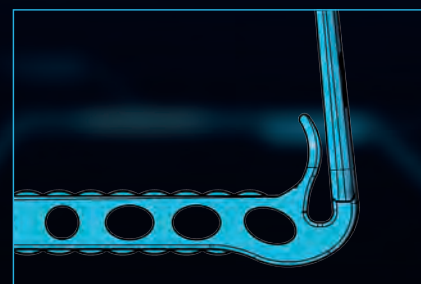


Weiterentwickelte Bißplatten: noch durchdachter und komfortabler in der Handhabung.
Bite blocks at their best: sophisticated and more comfortable to handle.

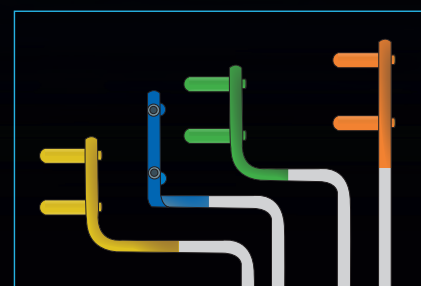

Einfache und schnelle Zuordnung aller Teile durch Farbcodierung.
Easy and fast assembling due to colour coding.

Hochwertige Führungsstangen aus rostfreiem, medizinischem Stahl.
High-quality indicator arms made of stainless medical steel.

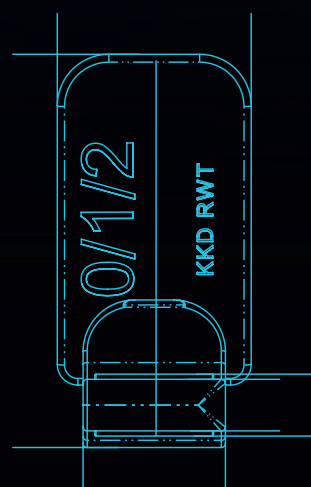


Abgerundete Form mit weniger Kanten.
Blocks are more rounded, hence less edges.



Rückseite mit Größen-Beschriftung.
On the back appropriate sizes are indicated.



Für digitale Speicherfolien und Röntgenfilme.
For x-ray films and image plates.

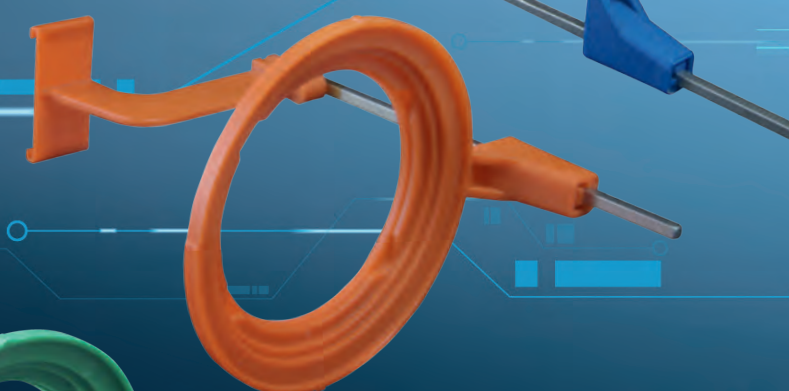

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 9073-15
e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



MD61310 / 20.08.2024

Gemeinsam für gesunde Zähne!
Together for healthy teeth!

KKD® RWT® COLOR

ANTERIOR Aufnahmen im Frontzahnbereich | radiographs in the anterior region



POSTERIOR Aufnahmen im Seitenzahnbereich | radiographs in the posterior region



ENDO Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen | Endometric radiographs during endodontic treatments



BITEWING Bissflügel aufnahmen | bitewing radiographs



KKD® RWT® COLOR

Die KKD® RWT® COLOR Instrumentensätze bilden in Verbindung mit einem Langtubus (Rund- oder Rechteckausführung) die Umsetzung der Rechtwinkel-/ Paralleltechnik in der konventionellen und digitalen Röntgendiagnostik. Die Visierringe sind universell für alle gängigen Röntengeräte geeignet (z.B. Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca usw.).

The KKD® RWT® COLOR instrument sets together with a long cone (rectangular- or round type) constitute the implementation of the Right Angle- / Paralleling Technique in conventional & digital x-ray diagnosis. The rings are universally suitable for all current x-ray units (e.g. Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca etc.).

RWT® COLOR Grundausrüstung/ Basic equipment

Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bissflügel aufnahmen
Complete assortment for anterior-, posterior- and bitewing radiographs

Inhalt/ Content:

- 4 Visierringe/ aiming rings
(1x Anterior REF 5420, 1x Bitewing REF 5422, 2x Posterior REF 5421)
- 4 Führungsstangen/ indicator arms
(1x Anterior REF 5226, 1x Bitewing REF 5228, 2x Posterior REF 5227)
- 18 Bissplatten/ bite blocks
(6 St./ pcs. von/ of Anterior REF 5406,
6 St./ pcs. von/ of Posterior REF 5407,
2 St./ pcs. von/ of Posterior small REF 5408,
2 St./ pcs. von/ of Bitewing #2 REF 5412,
je/ ea. 1 St./ pc. of Bitewing #0 von/ of REF 5414 und/ and #3 REF 5413)



RWT® COLOR Starter-Kit

Röntgenhaltersystem für die Rechtwinkel-/Paralleltechnik
X-ray Holder system for the Right Angle-/Paralleling Technique

Inhalt/ Content:

- 3 Führungsstangen/ indicator arms
(1x Anterior REF 5226, 1x Bitewing REF 5228, 1x Posterior REF 5227)
- 3 Visierringe/ aiming rings
(1x Anterior REF 5420, 1x Bitewing REF 5422, 1x Posterior REF 5421)
- 4 Bißplatten/ bite blocks
(1 St./ pc. von/ of Anterior REF 5406, 1 St./ pc. von/ of Posterior REF 5407,
1 St./ pc. von/ of Posterior REF 5408, 1 St./ pc. von/ of Bitewing REF 5412)



RWT® COLOR Bitewing Set

Sortiment für Bißflügel aufnahmen
Assortment for bitewing radiographs

Inhalt/ Content:

- 1 Visierring/ aiming ring
(1x REF 5422)
- 1 Führungsstange/ indicator arm
(1x REF 5228)
- 4 Bissplatten/ bite blocks
(1 St./ pc. von/ of REF 5413, 2 St./ pcs. von/ of REF 5412,
1 St./ pc. von/ of REF 5414)

Alle Teile/
all parts:



134 °C

3 bar
5 min



RWT® COLOR Endo Set

Sortiment für die Endodontie
Assortment for endometric radiographs

Inhalt/ Content:

- 1 Visierring/ aiming ring
(1x REF 5432)
- 1 Führungsstange/ indicator arm
(1x REF 5229)
- 4 Bissplatten/ bite blocks
(REF 5435S)