

Im Original am besten

Dürr Dental Original Zubehör und Verbrauchsmaterialien





Das passt einfach zusammen

Patientenkomfort, Hygiene und Bildqualität sollten bei der Röntgendiagnostik in jeder Praxis im Mittelpunkt stehen. Setzen Sie deshalb auch bei Zubehör und Verbrauchsmaterial für Ihren Speicherfolienscanner auf Originalqualität von Dürre Dental. Durch die Verwendung perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten stellen Sie eine lange Lebensdauer Ihrer Speicherfolien und eine einwandfreie Funktion Ihres Speicherfolienscanners sicher.



VistaPosition PSP

Das neue Paralleltechnik Haltersystem von Dürer Dental



Das speziell für die Verwendung mit Speicherfolien entwickelte Haltersystem vereint neue praktische Lösungen in einem Produkt. Speziell entwickelte Bissplatten fixieren die Speicherfolien sicher und sanft an Ort und Stelle. Die besondere Ergonomie der Bissplatte sorgt dafür, dass

beim Einbringen der Speicherfolie in den Halter diese nicht geknickt oder gequetscht wird und so die Lebensdauer der Folie verlängert werden kann. Die hochwertig verarbeiteten und farbcodierten Einzelteile ermöglichen ein kinderleichtes Zusammenfügen der einzelnen Komponenten.



reddot design award
winner

Exakte Positionierung der Speicherfolien

- Reproduzierbarkeit der Aufnahmen

Langlebigkeit der Speicherfolien

- Schutz vor Verbiegen der Speicherfolie
- Schonendes Einbringen
- Stabile Fixierung in der Bissplatte

Verzerrungsfreie Abbildung

- Ideal für Endo-Kontrollaufnahmen

Kompatibilität

Das VistaPosition PSP Haltersystem ist kompatibel mit nahezu allen gängigen Speicherfoliensystemen und Intraoral-Röntgengeräten.



Mit Hilfe der durchgehenden Farbcodierung findet man die passende Stange auch in stressigen Situationen im Handumdrehen und der Zusammenbau gelingt mühelos!


Das Sortiment deckt folgende Indikationsbereiche ab:

- Anterior – blau
- Posterior – gelb
- Bissflügel – rot
- Endo – grün

Alle Teile von VistaPosition sind tauch- und thermodesinfizierbar sowie autoklavierbar.

VistaPosition PSP Titanium

Das Premiumprodukt für höchste Ansprüche zeichnet sich durch die Verwendung von Titan bei der Führungsstange aus. Dadurch lässt sich eine deutliche Gewichtsreduktion erzielen und es erhöht den Patientenkomfort. Weiterhin erleichtert es die zuverlässige, exakte Positionierung bei Intraoralröntgen-Aufnahmen!

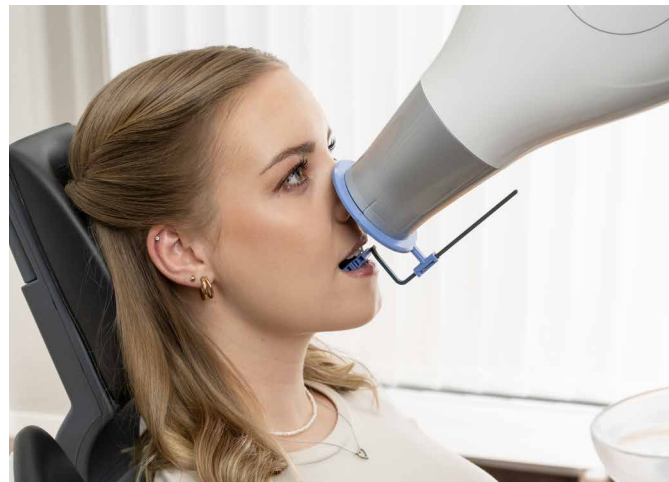

VistaScan Speicherfolie IQ*

Mit der neuen VistaScan-Generation mit RFID-Funktion und VistaSoft AI bietet Ihnen die VistaScan Speicherfolie IQ umfangreiche AI-gestützte Funktionen. Dies macht die Anwendung im Praxisalltag deutlich einfacher, erhöht den Anwenderkomfort und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Bildqualität.

*Für VistaScan Geräte, die für die Nutzung mit VistaScan IQ Speicherfolien entwickelt wurden (z.B. VistaScan Ultra View, VistaScan Mini 2.0)



Automatische Erkennung der anatomischen Region**

VistaSoft AI rotiert Intraoralaufnahmen in die richtige anatomische Position.

Automatische Erkennung von seitenverkehrten Belichtungen

VistaSoft AI erkennt, wenn die Speicherfolie von der falschen Seite belichtet wurde und empfiehlt, diese in der Software zu spiegeln.

Automatische Speicherfolienqualitätsprüfung

VistaSoft AI prüft automatisiert die Qualität der VistaScan IQ Speicherfolie und empfiehlt gegebenenfalls einen Austausch.

QR-Code ermöglicht Inventarisierung

Der QR-Code auf der VistaScan Speicherfolie IQ macht es einfach, den Zustand aller in der Praxis verwendeten Speicherfolien zu verfolgen.

Exzellente Bildqualität auf 100% aktiver Fläche

Im Vergleich zu Intraoralsensoren stehen bei der VistaScan IQ Speicherfolie 100% der Bildfläche für die Befundung zur Verfügung.

Automatische Zahnerkennung**

Mittels künstlicher Intelligenz werden direkt nach der Aufnahme alle dargestellten Zähne erkannt und im Zahnschema hinterlegt.

Eindeutige Patientenzuordnung zu jedem gescannten Bild

Der SmartScan-Workflow macht die Zuordnung der Aufnahme zum richtigen Patienten noch einfacher und sicherer.*

* Funktion bei VistaScan Mini View 2.0 und VistaScan Mini Easy 2.0 verfügbar

**Funktion abhängig von Softwareversion. Verfügbar ab VistaSoft 3.0.20 auch für VistaScan Speicherfolien Plus.

VistaScan Speicherfolie Plus**

Die seit vielen Jahren erprobte VistaScan Speicherfolie Plus ist der zuverlässige Begleiter für alle VistaScan ohne RFID-Funktion. Die fünf verschiedenen Formate bieten im Vergleich zu anderen Bildempfänger-Technologien für alle Indikationen die passende Lösung. So sorgt die VistaScan Speicherfolie Plus nicht nur für eine hohe Patientenakzeptanz, sondern auch für zufriedene Anwender.

** Für VistaScan Geräte, die für die Nutzung mit VistaScan Speicherfolie Plus entwickelt wurden (z. B. Mini View, VistaScan Perio und VistaScan Combi)



Exzellente Bildqualität auf 100% aktiver Fläche

Im Vergleich zu anderen digitalen Bildempfängern ist bei der VistaScan Speicherfolie Plus sichergestellt, dass 100% der Bildfläche für die Befundung zur Verfügung stehen.

Patientenkomfort


Im Vergleich zu alternativen Bildempfängern stellt die dünne und flexible Speicherfolie den maximalen Patientenkomfort sicher und ist auch in schwierigen Situationen einfach zu positionieren.

Lange Lebensdauer

Seit Beginn gilt die VistaScan Speicherfolie Plus als robust, langlebig und zuverlässig. In Verbindung mit der original VistaScan Lichtschutzhülle wird ihre Lebensdauer erhöht, da diese beiden Produkte optimal aufeinander abgestimmt sind.


Auf das Format kommt es an!

Mit unserem umfangreichen Größenportfolio (S0 – S4) steht Ihnen für jede Indikation immer das passende Format zur Verfügung.

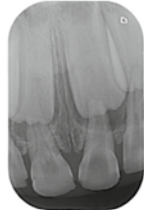


Größe 0

- Frontzahnaufnahmen bei Kindern

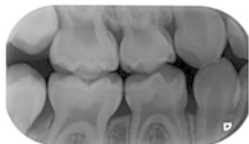


Größe 1

- Seitenzahn- oder Bissflügel aufnahmen bei Kindern
- Frontzahnaufnahmen bei Erwachsenen mit engen Platzverhältnissen (vertikal)
- Endo-Aufnahmen bei engen Platzverhältnissen (vertikal)

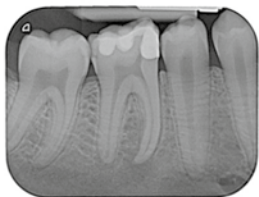


Größe 2

- Seitenzahn- oder Bissflügel aufnahmen bei Erwachsenen
- Frontzahnaufnahmen bei großzügigen Platzverhältnissen bei Erwachsenen
- Endo-Aufnahmen bei großzügigen Platzverhältnissen

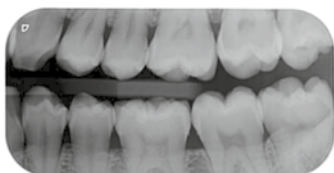

Größe 3

- Optimiertes Format für Bissflügel aufnahmen, um mehr diagnostische Reichweite zu erzielen

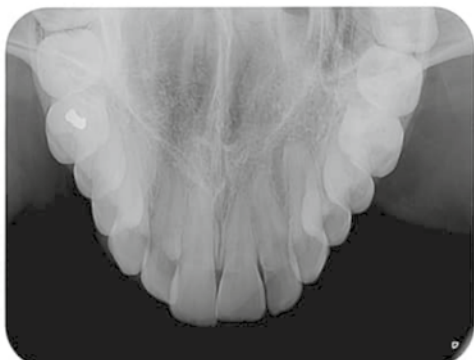

Größe 4

- Aufbiss aufnahmen, um z. B. verlagerte Zähne oder Speichelsteine optimal darzustellen

VistaScan Lichtschutzhülle Plus

Lichtschutzhüllen sind mitverantwortlich für eine lange Lebensdauer Ihrer Speicherfolien. Verschiedene unabhängige Institute haben die Qualitätsmerkmale geprüft und die Tests haben bestätigt: VistaScan Lichtschutzhüllen Plus sorgen für eine langanhaltend hohe Bildqualität Ihrer intraoralen Röntgenaufnahmen.



Kratzbeständigkeit

Schützt die empfindliche Oberfläche der Speicherfolie zuverlässig vor äußeren mechanischen Einflüssen. Norm: DIN EN ISO 1518-1.

Schutz der Speicherfolie

Die Original VistaScan Lichtschutzhülle wurde entwickelt, um Speicherfolien vor Kontamination und Verschmutzung zu schützen. Dies gewährleistet eine sichere Patientenbehandlung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Speicherfolien. Norm: DIN EN 62366.

Lichtundurchlässigkeit

Schützt die belichtete Speicherfolie zuverlässig vor Licht und unterstützt so eine hohe Bildqualität sowie Diagnosesicherheit. Norm: DIN 6125.

Biologische Unbedenklichkeit

Die VistaScan Lichtschutzhülle Plus hat die Prüfung auf biologische Unbedenklichkeit bestanden. Norm: EN ISO 10993-1.

Dies sorgt für die Sicherheit Ihrer Patienten.

Die Geschmacksneutralität der Lichtschutzhüllen ermöglicht einen hohen Patientenkomfort.

Keimdichtigkeit

Verhindert zuverlässig die Kontamination der Speicherfolie. Norm: DIN 58953-6.

Komplett ausgerüstet

VistaScan IQ Packs				
VistaScan IQ Pack S0	VistaScan Speicherfolie IQ S0	2 Stück	2 x 3 cm	2130106051
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus	1000 Stück		
VistaScan IQ Pack S1	VistaScan Speicherfolie IQ S1	2 Stück	2 x 4 cm	2130106151
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus	1000 Stück		
VistaScan IQ Pack S2	VistaScan Speicherfolie IQ S2	2 Stück	3 x 4 cm	2130106251
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus	1000 Stück		
VistaScan IQ Pack S3	VistaScan Speicherfolie IQ S3	2 Stück	2,7 x 5,4 cm	2130106351
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus	1000 Stück		
VistaScan IQ Pack S4	VistaScan Speicherfolie IQ S4	1 Stück	5,7 x 7,6 cm	2130106451
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus	100 Stück		
VistaScan Speicherfolie Plus*				
VistaScan Speicherfolie Plus S0	VistaScan Speicherfolie Plus S0	2 Stück	2 x 3 cm	2130-040-50
	VistaScan Speicherfolie Plus ID S0	2 Stück	2 x 3 cm	2130-040-60
VistaScan Speicherfolie Plus S1	VistaScan Speicherfolie Plus S1	2 Stück	2 x 4 cm	2130-041-50
VistaScan Speicherfolie Plus S2	VistaScan Speicherfolie Plus S2	4 Stück	3 x 4 cm	2130-042-50
	VistaScan Speicherfolie Plus ID S2	4 Stück	3 x 4 cm	2130-042-60
	VistaScan Speicherfolie Plus S2	12 Stück	3 x 4 cm	2130-042-55
VistaScan Speicherfolie Plus S3	VistaScan Speicherfolie Plus S3	2 Stück	2,7 x 5,4 cm	2130-043-50
VistaScan Speicherfolie Plus S4	VistaScan Speicherfolie Plus S4	1 Stück	5,7 x 7,6 cm	2130-044-50
VistaScan Lichtschutzhülle Plus*				
VistaScan Lichtschutzhülle Plus S0	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S0	100 Stück		2130-080-00
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus, weiß S0	100 Stück		2130-080-50
VistaScan Lichtschutzhülle Plus S1	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S1	100 Stück		2130-081-00
VistaScan Lichtschutzhülle Plus S2	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S2	100 Stück		2130108251
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S2	300 Stück		2130-082-00
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S2	1000 Stück		2130-082-55
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus, weiß S2	300 Stück		2130-082-50
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus, weiß S2	1000 Stück		2130108256
VistaScan Lichtschutzhülle Plus S3	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S3	100 Stück		2130-083-00
VistaScan Lichtschutzhülle Plus S4	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S4	100 Stück	VistaScan Combi/Mini View/Mini Plus	2130-084-00
	VistaScan Lichtschutzhülle Plus S4	100 Stück	VistaScan Perio Plus	
VistaScan Aufbissschutz S4	VistaScan Aufbissschutz S4	100 Stück		2130-074-03

*VistaScan Imageplate Plus

VistaPosition PSP Anterior/Posterior Kit Titanium			
Führungsstange	Anterior Titanium	1 Stück	2130100500
Führungsstangen	Posterior Titanium	2 Stück	
Bissplatten	Anterior	2 Stück	
Bissplatten	Posterior	2 Stück	
Visierring	Anterior	1 Stück	
Visierringe	Posterior	2 Stück	

VistaPosition PSP Bissflügel Kit Titanium			
Führungsstange	Bissflügel Titanium	1 Stück	2130100600
Bissplatte	Bissflügel S0/S1	1 Stück	
Bissplatten	Bissflügel S2 Horizontal	2 Stück	
Bissplatte	Bissflügel S3	1 Stück	
Visierring	Bissflügel	1 Stück	

VistaPosition PSP Endo Kit Titanium			
Führungsstange	Endo Titanium	1 Stück	2130100700
Bissplatten	Endo Q2/Q4	2 Stück	
Bissplatten	Endo Q1/Q3	2 Stück	
Visierring	Endo	1 Stück	

VistaPosition Zubehör Anterior/Posterior			
Führungsstange	Anterior Titanium	1 Stück	2130100351
Führungsstange	Posterior Titanium	1 Stück	2130100350
PSP Bissplatten	Anterior	4 Stück	2130100352
PSP Bissplatten	Posterior	4 Stück	2130100353
Visierring	Anterior	1 Stück	2130100354
Visierring	Posterior	1 Stück	2130100355

VistaPosition Zubehör Bissflügel			
Führungsstange	Bissflügel Titanium	1 Stück	2130100344
PSP Bissplatten	Bissflügel S0/S1	4 Stück	2130100345
PSP Bissplatten	Bissflügel S2 Vertikal	4 Stück	2130100346
PSP Bissplatten	Bissflügel S2 Horizontal	4 Stück	2130100347
PSP Bissplatten	Bissflügel S3	4 Stück	2130100348
Visierring	Bissflügel	1 Stück	2130100349

VistaPosition Zubehör Endo			
Führungsstange	Endo Titanium	1 Stück	2130100341
PSP Bissplatten	Endo Q2/Q4	2 Stück	2130100342
PSP Bissplatten	Endo Q1/Q3	2 Stück	2130100386
Visierring	Endo	1 Stück	2130100343

Neugierig auf mehr?


» www.duerrdental.com



VistaScan




VistaIntra

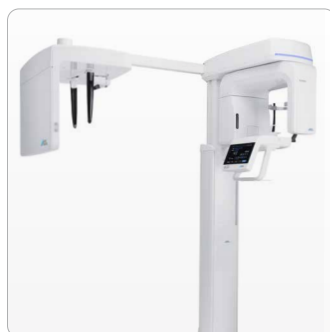


VistaPano




VistaVox

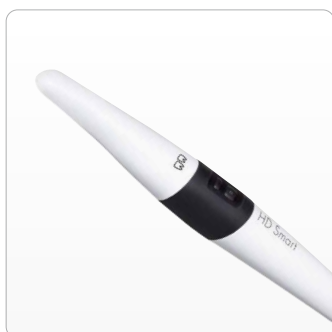

VistaCam

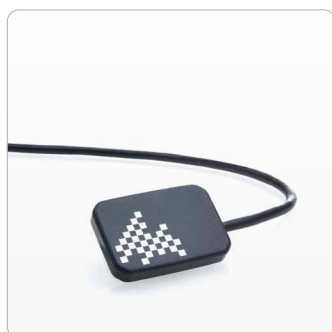

VistaRay

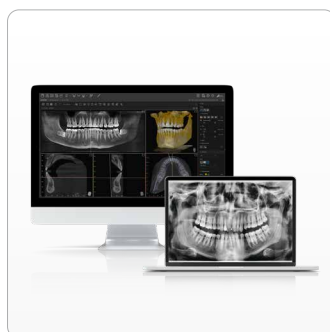

VistaSoft



Zubehör

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM