



ZenFlex™

NiTi Vormgeving Vrijl

Maximale sterkte. Minimaal invasief.

ZenFlex biedt de ideale balans tussen sterkte en flexibiliteit, waardoor u de volledige werk lengte kunt bereiken met minder kans op breuk en met behoud van meer gezond tandweefsel.



Hoge snij-efficiëntie

Dankzij de driehoekige doorsnede en gepatenteerde warmtebehandeling biedt ZenFlex een hoge snij-efficiëntie, waardoor u de volledige werk lengte bereikt, zelfs bij complexe wortelkanaalbehandeling.



Minimaal invasief

Een maximale flutdiameter van 1 mm en een niet-snijdende punt werken samen om transportatie naar de apex te minimaliseren en de structurele integriteit van de tand te behouden.



Uitzonderlijke sterkte

Bestand tegen torsiestress en cyclische vermoeidheid, wat resulteert in minimale breuk en verminderde transportatie.



Uitstekende flexibiliteit

Het gepatenteerde warmtebehandelingsontwerp zorgt voor een uitstekend gecontroleerd geheugen en flexibiliteit tot 90° bochten.




Kerr™

Hoe ZenFlex wint

ZenFlex heeft een hoge snij-efficiëntie dankzij de driehoekige doorsnede en het gepatenteerde warmtebehandelingsproces dat de scherpe snijkant van de flut behoudt.

ZenFlex heeft ook een niet-snijdende punt die zorgt voor meer controle tijdens de procedure. Zoals te zien is op de afbeelding links, behoudt ZenFlex meer tandweefsel dan belangrijke concurrenten. Dit is te danken aan de maximale flutdiameter (MFD) van 1 mm van ZenFlex, die 20% kleiner is dan die van Vortex Blue®.

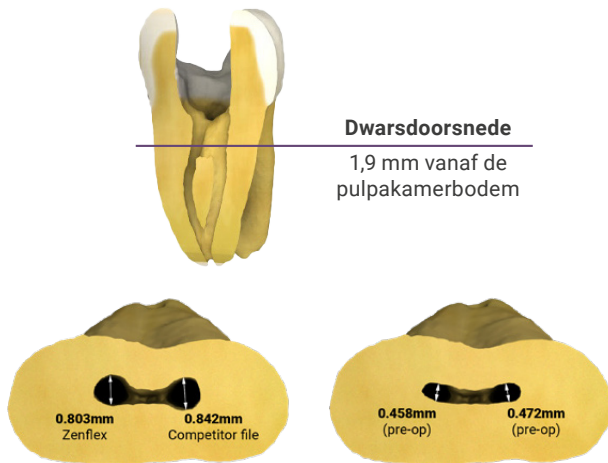


Volg de kromming. Zie het verschil.

Dr. Stephen L. Buchanan, een autoriteit op het gebied van endodontologie, testte ZenFlex en concludeerde:

"ZenFlex is een uitstekend instrument voor het behandelen van complexe wortelkanalen".

● Pre-operatief Kanaal ● Geprepareerd kanaal

*CT scans taken from extracted teeth.

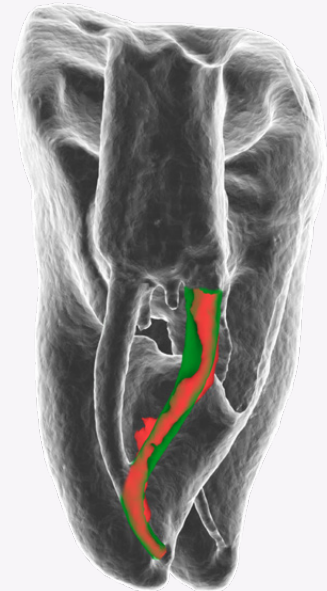

Getuigenissen van tandartsen

“ ZenFlex vormgevingsinstrumenten hebben een variabele flutdiameter die verhinderen dat ze zich in kanalen vastzetten, zorgen voor ruime ruimte voor debris tussen de fluiten en helpen tipbreuk te minimaliseren. Deze geavanceerde instrumenten leveren single-file vormgeving zonder transport van debris dankzij hun variabele warmtebehandeling. De aangepaste warmtebehandeling voor elke vijlgrootte resulteert in kleinere vijlen met meer vormgeheugen om ontwindung te voorkomen en grotere vijlen met opmerkelijke ductiliteit. De maximale flutdiameter van 1 mm draagt bij aan het behoud van de structurele integriteit van de tanden na RCT, en Kerr's AutoFit guttapercha punten passen perfect op de uiteinden van de geprepareerde kanalen die door ZenFlex vijlen zijn gecreëerd. ”



Dr. Stephen L. Buchanan

Flexibiliteit ontmoet geheugen

Elke kanaalanatomie is anders, en sommige zijn complexer dan andere. ZenFlex is ontworpen met gepatenteerde warmtebehandelingstechnologie en biedt uitstekende flexibiliteit tot 90° bochten.



Dankzij het uitzonderlijke, gecontroleerde geheugen behoudt ZenFlex zijn voorgebogen vorm, wat resulteert in eenvoudigere insertie, zelfs in de meest uitdagende kanaalanatomieën.

Nieuw: ZenFlex Gutta Percha Punten

Bereid u voor op nog soepelere wortelkanaalbehandelingen. Maak kennis met onze nieuwe ZenFlex Gutta Percha, het gebruiksvriendelijke guttapercha product dat is ontworpen om te passen bij de verschillende ISO tips van ZenFlex NiTi vijlen en wortelkanaalprocedures.



- Punten die overeenkomen met kanalen die zijn geprepareerd met ZenFlex NiTi vijlen
- Veilige applicatie, vrij van natuurrubberlatex
- Uitstekende pasvorm voor een breed scala aan kanaaldieptes.

“ In mijn praktijk zie ik meer en meer het enorme potentieel van het Traverse/ZenFlex systeem. De nieuwe warmtebehandeling heeft ongeëvenaarde voordelen gebracht voor de vijlen en de wereld van de endodontologie. Geniet ervan en laat u en uw patiënten het verschil ervaren.

Het eerste klinische casus illustreert perfect het minimaal invasieve karakter van de vijlen. Zelfs in sterk verkalkte, smalle en complex gevormde kanalen blijft de oorspronkelijke kanaalvorm behouden dankzij de scherpe snijkant.

Het tweede casus is een demonstratie van hoe de variabele warmtebehandeling van de vijlen, met name de flexibiliteit in het middelste en coronale deel, de bochten vormgeeft. **”**



Adj. Prof. Phillippe Sleiman

ZenFlex: Voor elke behoefte een oplossing.

Ruime keuze aan ISO tip- en taper, voor elke klinische situatie

Bestelinformatie

ZenFlex™ - Refill van 6 stuks

Taper	Tip	21 mm	25 mm	31 mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

ZenFlex™ Gutta Percha punten - Refill van 50 stuks

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9820
.04	.25	825-9825
.04	.30	825-9830
.04	.35	825-9835
.04	.40	825-9840
.04	.45	825-9845
.06	.20	825-9920
.06	.25	825-9925
.06	.30	825-9930
.06	.35	825-9935
.06	.40	825-9940
.06	.45	825-9945

ZenFlex™ - Assortiment van 6 stuks

Taper	Tip	21 mm	25 mm
.04	.20 .25 .30 .45	818-1421	818-1425
.06	.20 .25 .30 .45	818-1621	818-1625

ZenFlex™ Gutta Percha punten - Assortiment van 60 stuks

Taper	Tip	30 mm
.04	.20 .25 .30 .45	825-9800
.06	.20 .25 .30 .45	825-9900



Voor meer flexibiliteit en controle, **Zenflex werkt met uw vertrouwde endomotor en handstukken.**