



ZenFlex™

NiTi Döner Şekillendirme Eđesi

Maksimum Güç. Minimum İnvaziv Müdahale.

İdeal bir güç ve esneklik dengesine sahip olan ZenFlex, tüm çalışma uzunluđuna ulaşmanızı sağlarken diş bütünlüğünü de korur ve kırılma riskini daha da azaltır.



Yüksek Kesme Verimliliđi

Isıl işlem görmüş üçgen kesit tasarımlı ZenFlex, karmaşık dik kökü geometrilerinde bile tüm çalışma uzunluđuna erişmenizi sağlayan yüksek kesme verimliliđi sunar.



Minimum İnvaziv Müdahale

Maksimum 1 mm yiv çapı ve kesici olmayan bir uç, taşımayı en aza indirmek ve dişin yapısal bütünlüğünü korumak için birlikte çalışırlar.



Olađanüstü Güç

Burulma gerilimine ve döngüsel yorulmaya karşı dayanıklı olduđundan minimum kırılma ve daha az taşımaya imkan verir.



Mükemmel Esneklik

Isıl işlem görmüş tescilli tasarım, 90 dereceye kadar kavislerde mükemmel bir kontrollü bellek ve esneklik sağlar.




Kerr™

ZenFlex Nasıl Kazanıyor?

ZenFlex, üçgen kesit yapısı ve özel ısıtım işlem süreci sayesinde yüksek kesim verimliliğine sahiptir ve kesici kenarın keskinliğini korur. ZenFlex ayrıca, işlem sırasında daha fazla kontrol sağlayan kesici olmayan bir uca sahiptir.

Soldaki resimde görüldüğü gibi, ZenFlex, önemli rakiplerine kıyasla daha fazla diş yapısını korur. Bu özellik, ZenFlex'in 1 mm Maksimum Flüt Çapı (MFD) ile ilgilidir ve bu çap, Vortex Blue®'dan %20 daha küçüktür.

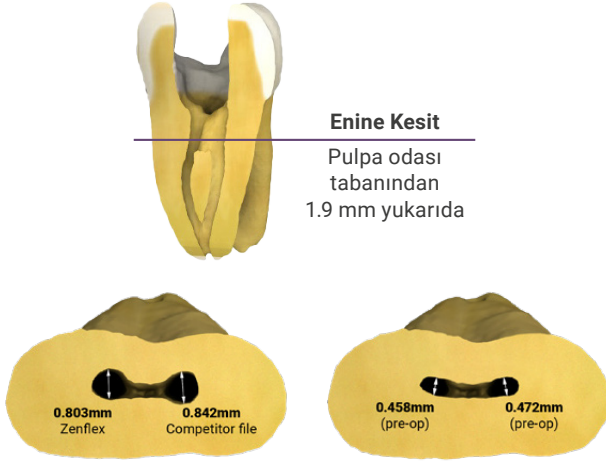


Eğriyi takip edin. Farkı görün.

Dünyanın önde gelen endodonti uzmanlarından biri olan Dr. Stephen L. Buchanan'ı ZenFlex'i test etmeye davet ettik. Buchanan, ZenFlex'in aşırı kavimsel kanalları şekillendirebildiğini tespit etti.

● Operasyon Öncesi Kanal

● Şekillendirilmiş Kanal

*Çekilen dişlerden alınmış CT taramaları.

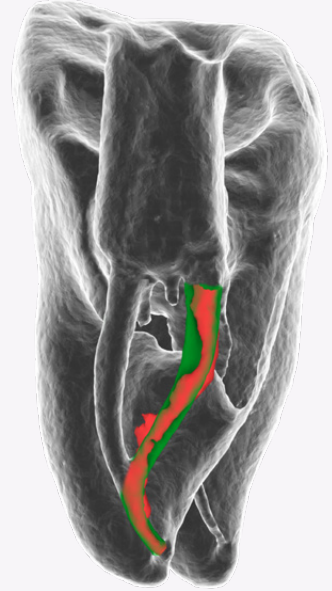

Müşteri Görüşleri

“ ZenFlex şekillendirme eğeleri, kanallarda sıkışmalarını önleyen, geniş kesme boşlukları sağlayan ve uç kırılmasını önlemeye yardımcı olan değişken adımlı flüt açılmasına sahiptir. Bu sofistike eğeler, değişken ısıtım işlemleri sayesinde kanalları taşımadan tek eğe şekilleri sunar. Her eğe boyutu için ısıtım işlemini özelleştirmek, daha küçük eğelerin çözölmeyi önlemek için daha fazla şekil hafızasına sahip olmasını ve daha büyük eğelerin dikkate değer bir süneklik kazanmasını sağlar. Ayrıca, kök kanal tedavisi sonrası dişlerin yapısal bütünlüğünü daha iyi korumak için 1 mm maksimum flüt çapına sahiptir ve Kerr'in AutoFit güta perka konları, ZenFlex Eğeleri tarafından şekillendirilen kanal uçlarına mükemmel uyum sağlar. ”



Dr. Stephen L. Buchanan

Esneklik ile Hafızanın Buluşması

Her kanal anatomisi farklıdır ve bazıları diğerlerinden çok daha karmaşıktır. Isıl işlem görmüş tescilli teknolojiyle tasarlanan ZenFlex, 90 dereceye kadar kavisler için mükemmel esneklik sağlar.



Benzersiz bir kontrollü belleğe sahip olan ZenFlex, önceden kavislendirilen şeklini koruyarak en zorlu kanal anatomilerine bile kolayca girilebilmesini sağlar.

ZenFlex Güta Perka Konuları ile Tanışın

Şekillendirme prosedürleriniz daha da kolaylaşacak. ZenFlex Güta Perka, bir dizi ZenFlex NiTi Eğe ucu boyutuna ve farklı kanal tedavilerine uyacak şekilde tasarlanmış, kullanımı kolay bir güta perka ürünüdür.



- ZenFlex NiTi Şekillendirme Eğeleri tarafından şekillendirilmiş kanallarla uyumlu konlar
- Kauçuk lateks içermeyen sorunsuz uygulama
- Çok çeşitli kanal derinliklerine mükemmel uyum.

“ Klinik pratiğimde Traverse/Zenflex sisteminin inanılmaz potansiyelini giderek daha fazla keşfediyorum. Yeni ısıtma işlemi, eğelere ve endodonti dünyasına benzersiz faydalar sağladı. Keyfini çıkarın ve siz ve hastalarınız farkı hissedin.

İlk klinik vaka, eğelerin minimal invaziv tasarımının ve kesici kenarın, bu kadar kalsifiye, dar ve çoklu eğrili kanallarda bile kanalların orijinal şeklini nasıl koruduğunun mükemmel bir örneğidir.

İkinci vaka, eğelerin değişken ısıtma işleminin, özellikle eğelerin orta ve koronal kısmındaki esnekliğin eğrileri nasıl şekillendirdiğinin bir göstergesidir. ”



Adj. Prof. Phillippe Sleiman

ZenFlex, İhtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Geniş uç ve taper konfigürasyonları seçeneğiyle.

Sipariş Bilgileri

ZenFlex™ - 6'lı Paket

Taper	Tip	21 mm	25 mm	31 mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

ZenFlex™ Güta Perka Konları - 50'li Paket

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9820
.04	.25	825-9825
.04	.30	825-9830
.04	.35	825-9835
.04	.40	825-9840
.04	.45	825-9845
.06	.20	825-9920
.06	.25	825-9925
.06	.30	825-9930
.06	.35	825-9935
.06	.40	825-9940
.06	.45	825-9945

ZenFlex™ - Asorti - 6'lı Paket

Taper	Tip	21 mm	25 mm
.04	.20 .25 .30 .40 .45	818-1421	818-1425
.06	.20 .25 .30 .40 .45	818-1621	818-1625

ZenFlex™ Güta Perka Konları - Asorti - 60'li Paket

Taper	Tip	30 mm
.04	.20 .25 .30 .40 .45	825-9800
.06	.20 .25 .30 .40 .45	825-9900



Ekstra esneklik ve kontrol için **ZenFlex**, tercih ettiğiniz endodontik motor ve el aletleriyle uyumlu çalışır.