

New



ZenFlex™ ONE

Sistema de Limas Reciprocantes

Equilibrio perfecto entre durabilidad y alta eficiencia de corte.
ZenFlex ONE brinda mayor confianza y un acabado suave en el que confiar.



Alta eficiencia de corte

El tratamiento térmico patentado y el diseño de sección transversal triangular preservan los bordes afilados de las estrías, lo que te permite alcanzar la longitud de trabajo completa con menos resistencia y más control durante el procedimiento.



Mínimamente Invasiva

El diámetro de la estría, de 1mm como máximo, y la punta no activa, minimizan la transportación y preservan la estructura integral del diente.



Resistencia Excepcional

La resistencia a la torsión y a la fatiga cíclica minimiza la fractura y reduce la transportación



Puntas de Gutta Percha y Papel Compatibles

Las puntas de gutta percha y papel coinciden con los conductos conformados por las limas reciprocantes ZenFlex ONE.



Kerr™

Confianza, rapidez, suavidad

El tratamiento térmico patentado y el diseño de sección transversal triangular preservan los bordes afilados de las estrías, lo que permite alcanzar la longitud de trabajo completa de forma rápida incluso en geometrías radiculares complejas, con menos resistencia y más control durante el procedimiento. Las estrías se rectifican después del tratamiento térmico para preservar el filo de los bordes de corte.


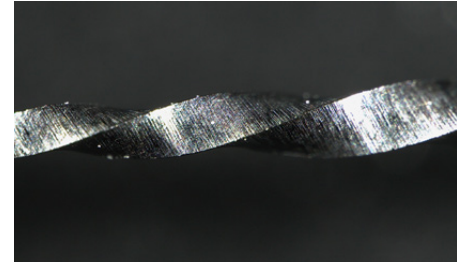


Imagen cortesía del Prof. Philippe Sleiman

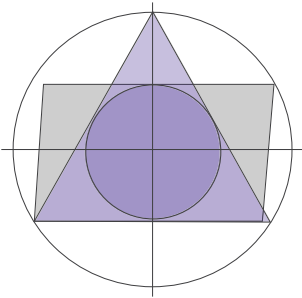


Las grandes áreas que quedan en los bordes de corte triangulares de 3 puntas de ZenFlex ONE, distribuidas cada 120 grados, permiten extraer los residuos de manera efectiva en dirección coronal

▲ ZenFlex ONE ■ Lima de la competencia ○ Canal


Acabado más rápido

El diámetro máximo de la estría de ZenFlex ONE, de 1 mm, combinado con la sección transversal triangular con 3 filos de corte equiláteros, da como resultado un rendimiento de corte mejorado.

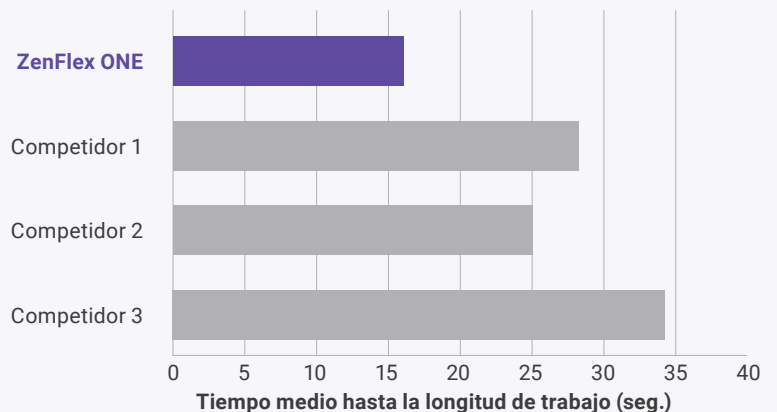

Conservación de más dentina para una raíz más fuerte

El diámetro máximo de la estría y la punta inactiva trabajan en conjunto para minimizar la transportación y preservar la integridad de la estructura dental. El diseño de la estría (1 mm máximo) de ZenFlex ONE y la punta inactiva minimizan la transportación y preservan más la estructura dental que las limas tradicionales de conicidad continua y progresiva.

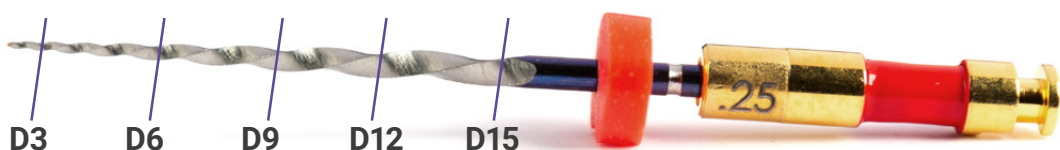

Flexibilidad excepcional

ZenFlex ONE está diseñado con un tratamiento térmico patentado específico para cada tamaño que permite una excelente flexibilidad para curvas de hasta 90° en todos los tamaños.



Minimice el equilibrio entre flexibilidad y resistencia a la torsión con el sistema de limas reciprocantes ZenFlex ONE.


Conductos instrumentados y obturados con el sistema ZenFlex ONE, elements™ Connect y Apex Connect.



Fatiga cíclica

Las limas ZenFlex ONE tienen un 38% más de resistencia a la fatiga cíclica en comparación con las limas de la competencia del tamaño correspondiente

Fatiga cíclica a lo largo del tiempo

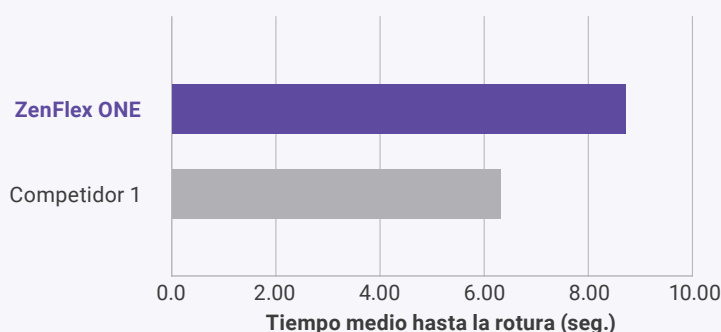

Testimonio

“Mientras que otras limas me han parecido demasiado rígidas o demasiado lentas para avanzar por el conducto, ZenFlex ONE ha logrado un excelente equilibrio entre flexibilidad, resistencia y eficiencia de corte, lo que me permite usarla con confianza en una amplia variedad de casos.”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Descargar caso clínico del Dr. Mashtoub

Sistema de Limas Reciprocantes ZenFlex ONE

Equilibrio Perfecto de Eficiencia, Fiabilidad y Asequibilidad

Puntas de Gutta Percha y Papel

- La gutta percha correspondiente se adapta a los conductos instrumentados con las limas reciprocantes ZenFlex ONE.
- Puntas de gutta percha de color a juego con las limas ZenFlex ONE correspondientes.
- Puntas de papel disponibles.



Información para Pedidos

ZenFlex™ ONE

Limas de instrumentación NiTi - Caja x 3

Tamaño	21 mm	25 mm	31 mm
Pequeño 20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Principal 25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Mediano 35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Grande 45/06	818-2630	818-2631	818-2632



ZenFlex™ ONE

Puntas de Gutta Percha - Caja x 50

Tamaño	Ref. No.
Pequeño 20/06	825-9720
Principal 25/06	825-9725
Mediano 35/06	825-9735
Grande 45/06	825-9745

ZenFlex™ ONE

Puntas de Papel - Caja x 100

Tamaño	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Para obtener más información sobre Kerr Endodontic Solutions, contacte con su representante de Kerr.



Para mayor flexibilidad y control, **ZenFlex ONE funciona con su motor y piezas de mano de endodoncia preferidos.**