

New



ZenFlex™ ONE

Système de limes avec un mouvement réciproque

Grâce à un équilibre parfait entre durabilité et haute efficacité de coupe, ZenFlex ONE vous offre plus de confiance et une finition optimale, fiable.



Efficacité de coupe élevée

Le traitement thermique exclusif et la conception à section triangulaire préservent les arêtes tranchantes de la lime, vous permettant d'atteindre la longueur de travail complète avec moins de résistance et plus de contrôle pendant la procédure.



Minimalement invasive

Un diamètre maximal de la lime de 1 mm et une pointe non-active permettent de minimiser le transport et de maintenir l'intégrité structurelle de la dent.



Résistance exceptionnelle

ZenFlex résiste à la fatigue cyclique et à une torsion élevée, ce qui se traduit par un risque très faible de fracture et de déviation canalaire.



Pointes de gutta-percha et pointes en papier correspondantes

Les pointes de gutta-percha et les pointes en papier correspondent aux canaux préparés par les limes réciproques ZenFlex ONE.



Confiance, rapidité, fluidité

Le traitement thermique exclusif et la conception à section triangulaire préservent le tranchant des arêtes de la lime. On peut alors atteindre rapidement la longueur de travail complète, même pour des géométries radiculaires complexes, avec moins de résistance et plus de contrôle pendant la procédure. Les limes sont meulées après le traitement thermique pour préserver le tranchant des arêtes


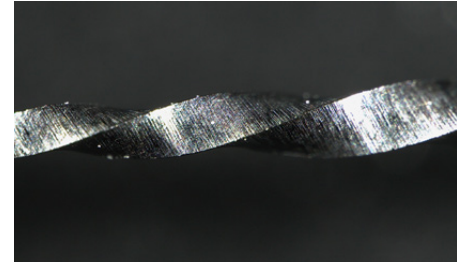


Image gracieusement fournie par le Prof. Philippe Sleiman

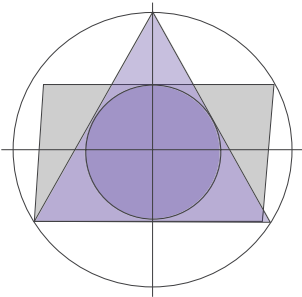


Les grandes surfaces présentes sur les arêtes de coupe triangulaires à 3 points du ZenFlex ONE, réparties tous les 120 degrés, permettent une extraction efficace des débris vers la couronne

▲ ZenFlex ONE ■ Lime concurrente. ○ Canal


Terminez plus rapidement

Le diamètre maximal de 1 mm de la lime ZenFlex ONE, associé à sa section triangulaire avec 3 arêtes de coupe équilatérales, permet une performance de coupe accrue.

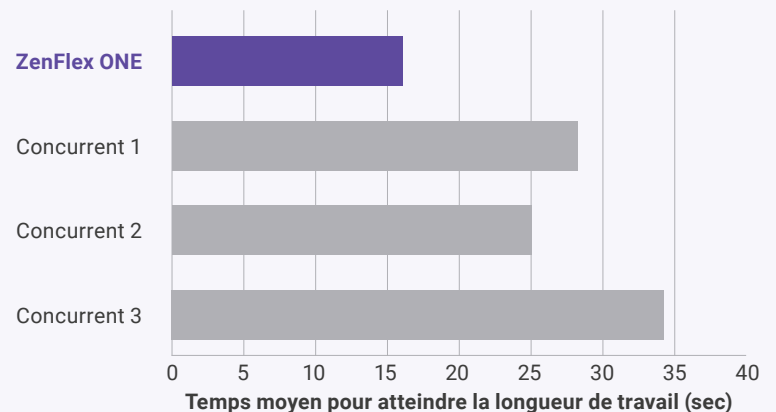

Préserver plus de dentine pour une racine plus solide

Le design de la lime ZenFlex ONE avec son diamètre maximal de 1 mm et sa pointe non coupante minimisent le transport et préservent d'avantage de structure dentaire que les limes traditionnelles avec des diamètres de pointe variable ou constant.

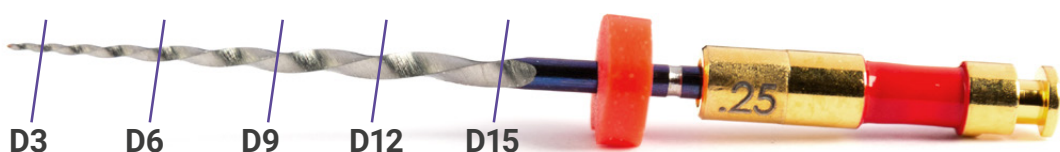

Flexibilité exceptionnelle

ZenFlex ONE bénéficie d'un traitement thermique exclusif adapté à chaque taille de lime, offrant ainsi une flexibilité exceptionnelle pour des courbes allant jusqu'à 90° pour toutes les tailles de limes.



Optimisez l'équilibre entre flexibilité et résistance à la torsion avec le système de lime réciproque ZenFlex ONE.


Canaux façonnés et obturés par le système ZenFlex ONE, elements™ Connect et Apex Connect.



Fatigue cyclique

Les limes ZenFlex ONE ont une résistance à la fatigue cyclique supérieure de 38% par rapport aux limes concurrentes de taille correspondante.

Fatigue cyclique au fil du temps

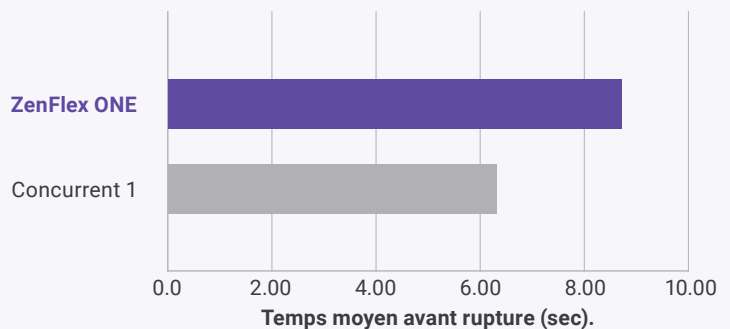

Témoignage client

“ Alors que d'autres limes semblaient trop rigides ou trop lentes pour progresser dans un canal, la ZenFlex ONE offre un excellent équilibre entre flexibilité, résistance et efficacité de coupe, ce qui me permet de l'utiliser en toute confiance dans une grande variété de cas. ”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Download
Dr. Mashtoub
clinical case

Missing
Translation

Système de lime réciproque ZenFlex ONE

Équilibre parfait entre efficacité, fiabilité et coût abordable

Pointes de gutta-percha et pointes de papier

- Les pointes de gutta-percha correspondantes s'adaptent aux canaux préparés par les limes réciproques ZenFlex ONE.
- Pointes de gutta-percha de couleur assortie pour correspondre aux limes ZenFlex ONE correspondantes.
- Pointes de papier disponibles.



Informations de commande

ZenFlex™ ONE

Limes de mise en forme en NiTi - Pack de 3

Taille	21 mm	25 mm	31 mm	
Small	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



ZenFlex™ ONE

Pointes de gutta-percha - Pack de 50

Taille	Ref. No.	
Small	20/06	825-9720
Primary	25/06	825-9725
Medium	35/06	825-9735
Large	45/06	825-9745

ZenFlex™ ONE

Pointes de papier - Pack de 100

Taille	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Pour en savoir plus sur les solutions endodontiques Kerr, contactez votre représentant Kerr.



Pour une flexibilité et un contrôle accru, **ZenFlex ONE** fonctionne avec votre moteur endodontique et vos pièces à main préférés.