

New



ZenFlex™ ONE

Reciprok gépi tágitó rendszer

A tökéletes egyensúly az ellenálló képesség és erős vágóhatékonyság között. A ZenFlex ONE nagyobb magabiztosságot és stresszmentes használatot biztosít, amiben maximálisan megbízhat.



Kiemelkedő vágóhatékonyság

Az egyedülálló hőkezelési eljárás és háromszög keresztmetszetű design megőrzi a vágóélek pengeélességét a menetszéleken, ezzel biztosítva, hogy kevesebb ellenállással érje el a teljes munkahosszt és jobb kontrollt nyújtson a beavatkozás során.



Minimál invazivitás

Az 1 mm-es maximális menetél átmérő és a nem vágó hegy együttesen minimalizálja a transzponálódást és megőrzi a fog szerkezeti épségét.



Egyedülálló ellenálló képesség

A torziós stresszel és a törési fáradás szembeni ellenállás minimalizálja a töréseket és a transzpozíciót.




Méretazonos Guttapercha és Papír Pointok

A Guttapercha és Papír Pointok méretei megegyeznek a ZenFlex ONE reciprok gépi tágitók által preparált csatornák méretével.




Magabiztosság, gyorsaság, egyszerű munkamenet,

Az egyedülálló hőkezelési eljárás és háromszög keresztmetszetű design megőrzi az vágóélek pengeélességét a menetszéleken, ez biztosítja, hogy kevesebb ellenállással érje el a teljes munkahosszt, még komplex gyökércsatorna anatómia mellett is gyorsan - így jobb kontrollt nyújt a beavatkozás során. A menetéleket intaktan hagyják a hőkezelést követően, hogy megmaradjon a vágóélek pengeélessége.

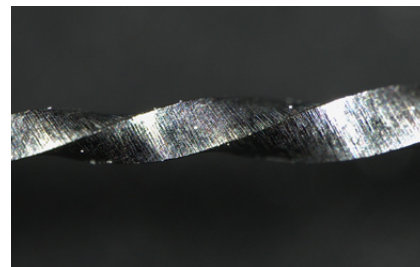

Prof. Philippe Sleiman képanyaga

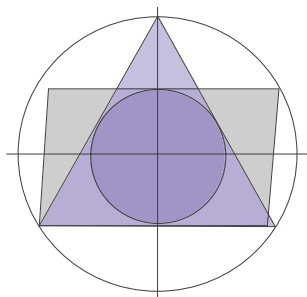


A ZenFlex ONE háromszögletű keresztmetszetének 3 pontos vágóélei és az általuk szabadon hagyott terület 120 fokban terítik a törmeléket, biztosítva annak koronális irányba való terelését.

▲ ZenFlex ONE ■ Konkurens gépi tágitó ○ Gyökércsatorna


Gyors befejezés

A ZenFlex ONE kisebb, 1 mm-es maximális vágóél átmérője, kombinálva a háromszög keresztmetszettel és a 3 szimmetrikusan elhelyezett vágóélel kiemelkedő vágóteljesítményt biztosít.

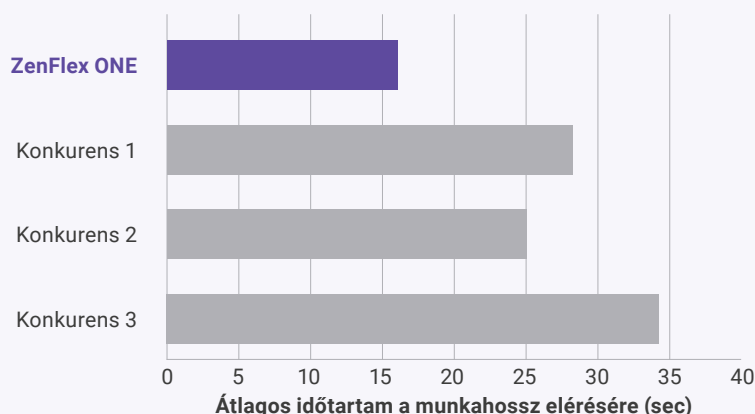

Őrizzen meg több dentint az erősebb fog érdekében

A maximális vágóél átmérő (MFD) és a nem vágó hegy együtt minimalizálja a transzportálódást és megőrzi a fog struktúráját. A ZenFlex ONE 1 mm-es MFD design-ja és a nem vágó hegy minimalizálja a transzportálódást és több foganyagot őriz meg a hagyományos folytonos konicitású és progresszív konicitású gépi tágitókhoz képest.

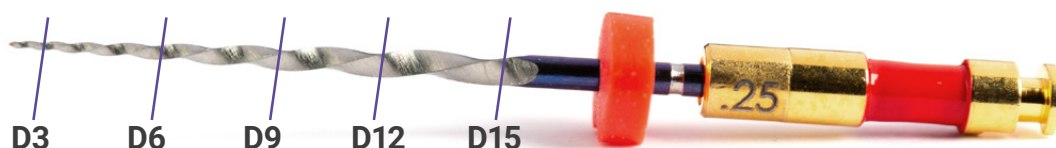

Egyedülálló flexibilitás

A ZenFlex ONE-t dedikáltan, méretspecifikus hőkezeléssel tervezték, ami kiváló flexibilitást biztosít még 90 fokos görbületek esetén - bármely méretet is használva.



Minimalizálható a hajlékonyság és a torziós ellenállás közötti kompromisszum a ZenFlex ONE reciprok gépi tágító rendszerrel.


A csatornákat a ZenFlex ONE és az elements Connect illetve az Apex Connect rendszerekkel munkálták meg és obturálták.



Torziós fáradás

A ZenFlex ONE gépi tágítók 38%-kal ellenállóbbak a torziós fáradással szemben a konkurens termékkel összehasonlítva - azonos dimenziójú fájl esetén..

Torziós fáradás az idő múlásával

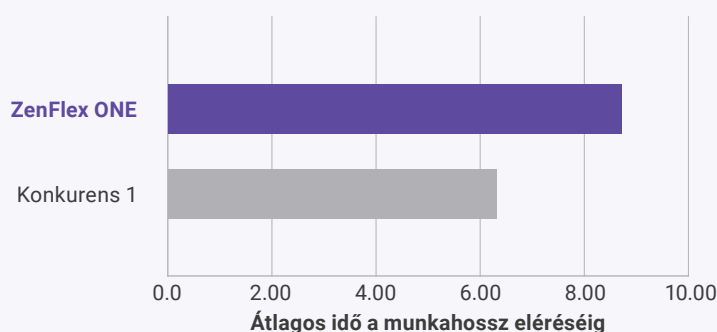

Felhasználói vélemények

“ Míg más tágítók túl merevek vagy túl lassúak a gyökércsatornában való lejutásban, a ZenFlex ONE kiváló egyensúlyt biztosít a hajlékonyság, az ellenálló képesség és a vágási hatékonyság között - így magabiztosan használhatom a legkülönfélébb esetekre is. ”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Töltse le
Dr. Mashtoub
klinikai esetét

ZenFlex ONE Reciprok gépi tágitó rendszer

A tökéletes egyensúly a hatékonyság, a megbízhatóság és a költséghatékonyság között

Guttapercha és Papír Point

- A guttaperchák méretei megegyeznek a ZenFlex ONE reciprok gépi tágitók által preparált csatornák méretével.
- A guttaperchák színkódolása megegyezik a ZenFlex ONE reciprok gépi tágitók színkódolásával.
- Az elérhető papír pointok is méret- és színazonosak.



Megrendelési információ

ZenFlex™ ONE

NiTi gépi tágitó - 3 db / csomag

Méret		21 mm	25 mm	31 mm
Kicsi	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Elsődleges (Primary)	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Közepes	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Nagy	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



ZenFlex™ ONE

Guttapercha pointok - 50 db / csomag

Méret	Ref. sz.	
Kicsi	20/06	825-9720
Elsődleges (Primary)	25/06	825-9725
Közepes	35/06	825-9735
Nagy	45/06	825-9745

ZenFlex™ ONE

Papír pointok - 100 db / csomag

Méret	Ref. sz.
S, P, M, L	972-0130

Ha többet szeretne megtudni a Kerr Endodontics megoldásairól, keresse orvoslátogatóját



Az ön további kényelmére a **ZenFlex ONE** tökéletesen működik az ön által kedvelt endodonciai motorok és kézi darabok bármelyikével