

New



## ZenFlex™ ONE

Sistema di Strumenti Reciprocanti

Il perfetto equilibrio tra durata ed elevata efficienza di taglio. ZenFlex ONE ti offre più sicurezza e una rifinitura omogenea di cui ti puoi fidare.



### Elevata Efficienza di Taglio

Il trattamento termico proprietario e il design triangolare della sezione trasversale preservano i bordi taglienti e affilati della spirale, consentendo di raggiungere l'intera lunghezza di lavoro con meno resistenza e maggiore controllo durante la procedura.



### Minimamente Invasivo

Il diametro massimo della spirale di 1 mm e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre al minimo il trasporto e preservare l'integrità strutturale.



### Resistenza Eccezionale

Resiste allo stress da torsione e alla fatica ciclica, riducendo al minimo le rotture e il trasporto.



### Coni di Guttaperca e Coni di Carta Corrispondenti

"Le dimensioni dei coni di Guttaperca e dei coni di Carta corrispondono ai canali sagomati dagli strumenti Reciprocanti ZenFlex ONE"



**Kerr™**

# Affidabile, veloce, fluido

Il trattamento termico proprietario e il design triangolare della sezione trasversale preservano i bordi taglienti e affilati della spira che ti consente di raggiungere rapidamente l'intera lunghezza di lavoro anche nelle geometrie più complesse della radice, con meno resistenza e più controllo durante la procedura. Le spire vengono rettificate dopo il trattamento termico per preservare l'affilatura dei bordi taglienti.


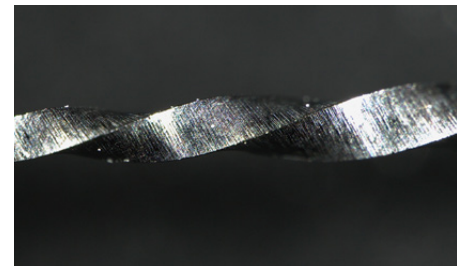


Image in gentile concessione del Prof. Philippe Sleiman

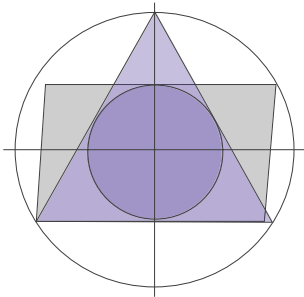


Le ampie aree lasciate libere dai bordi taglienti a 3 punte della sezione triangolare di ZenFlex ONE, distribuite ogni 120 gradi, consentono un'estrazione efficace dei detriti in direzione coronale.

▲ ZenFlex ONE    ■ Strumento concorrente    ○ Canale


## Procedura più rapida

Il piccolo diametro massimo della spira di ZenFlex ONE pari ad 1 mm, combinato con la sezione trasversale triangolare con 3 bordi taglienti equilateri, si traduce in prestazioni di taglio aumentate.

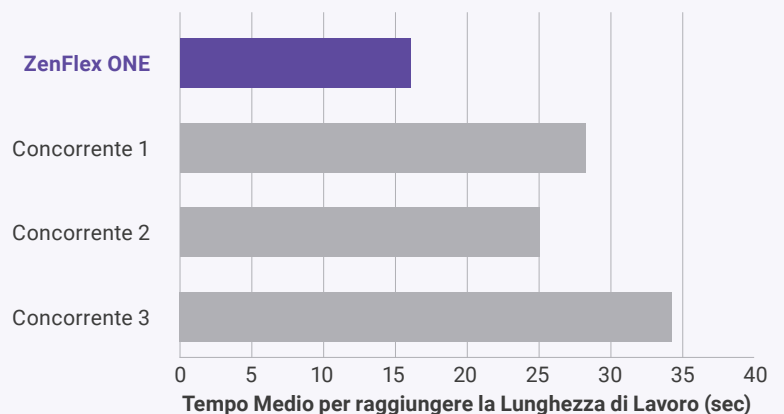

## Preserva più dentina per una radice più resistente

Il diametro massimo della spira e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre al minimo il trasporto e preservare l'integrità della struttura del dente. Il design del diametro massimo della spira (1 mm) di ZenFlex ONE e una punta non tagliente riducono al minimo il trasporto e preservano una maggiore struttura del dente rispetto agli strumenti tradizionali con conicità costante e con conicità progressiva.

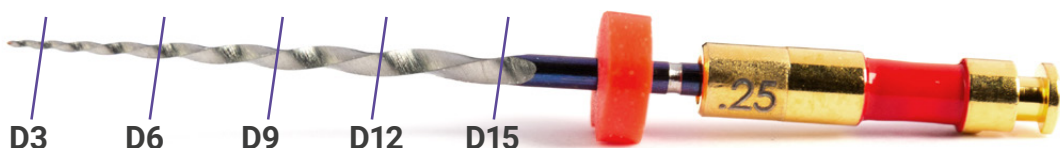

# Flessibilità eccezionale

ZenFlex ONE è progettato e realizzato con un trattamento termico proprietario specifico per ogni misura, che consente un'eccellente flessibilità e offre curvature fino a 90° per tutte le dimensioni.



Riduci al minimo il compromesso tra Flessibilità e Resistenza alla torsione con il Sistema di Strumenti Reciprocanti ZenFlex ONE.


Canali sagomati e otturati con il sistema ZenFlex ONE, elements™ Connect e Apex Connect



## Fatica ciclica

li strumenti ZenFlex ONE hanno una resistenza alla fatica ciclica superiore del 38% rispetto agli strumenti di uguali dimensioni dei produttori concorrenti.

Fatica Ciclica nel Tempo

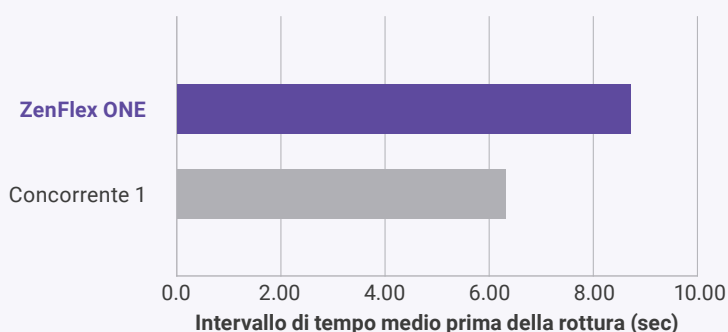

## Zenflex dal punto di vista dei professionisti

“Mentre altri strumenti mi sono sembrati troppo rigidi o troppo lenti nell'avanzare all'interno del canale, ZenFlex ONE ha mostrato un ottimo equilibrio tra flessibilità, resistenza ed efficienza di taglio, al punto che sono in grado di utilizzarlo con sicurezza in un'ampia gamma di casi.”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Scarica il caso clinico del Dr. Mashtoub

# ZenFlex ONE Sistema di Strumenti Reciprocanti

Il perfetto Equilibrio tra Efficienza, Affidabilità e Convenienza

## Coni di Guttaperca e Coni di Carta

- Coni di Guttaperca corrispondenti ai canali sagomanti dagli strumenti Reciprocanti ZenFlex ONE.
- Corrispondenza della colorazione per abbinare i coni di Guttaperca ai relativi strumenti ZenFlex ONE.
- Coni di Carta disponibili



## Informazioni per l'ordine

### ZenFlex™ ONE

Strumenti per Sagomatura in NiTi - Confezione da 3 pz.

Misura		21 mm	25 mm	31 mm
Small	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



### ZenFlex™ ONE

Coni di Guttaperca - Confezione da 50 pz.

Misura	Art. Nr.
Small	825-9720
Primary	825-9725
Medium	825-9735
Large	825-9745

### ZenFlex™ ONE

Coni di Carta - Confezione da 100 pz.

Misura	Art. Nr.
S, P, M, L	972-0130

**Per Maggiori Informazioni sulle Soluzioni Kerr Endodontics, Contatta il Rappresentante Kerr della tua zona**



Per una maggiore flessibilità e controllo, **ZenFlex ONE** funziona con il tuo motore endodontico preferito.