

New



ZenFlex™ ONE

Reciprocierend vijlsysteem

De perfecte balans tussen duurzaamheid en hoge snijefficiëntie. ZenFlex ONE geeft u meer vertrouwen en een gladde afwerking waarop u kunt vertrouwen.



Hoge Snij-efficiëntie

Dankzij de gepatenteerde warmtebehandeling en het driehoekige dwarsdoorsnedeontwerp blijven de scherpe snijkanten van de groef behouden, waardoor u de volledige werk lengte kunt bereiken met minder weerstand en meer controle tijdens de procedure.



Minimaal Invasief

Een maximale flute diameter van 1 mm en een niet-snijdende punt zorgen er samen voor dat het transport van debris tot een minimum wordt beperkt en de structurele integriteit van de tand behouden blijft.



Uitzonderlijke Sterkte

Bestand tegen torsiestress en cyclische vermoeidheid, wat resulteert in minimale breuk en minder transport.



Bijbehorende Gutta Percha en Paper Points


Guttapercha en paperpoints passen bij kanalen gevormd door ZenFlex ONE Reciprocerende vijlen




Kerr™

Vertrouwen, Snel, Soepel

De gepatenteerde warmtebehandeling en het driehoekige dwarsdoorsnedeontwerp behouden de scherpe snijkanten van de groef, waardoor u snel de volledige werk lengte van zelfs complexe wortelgeometrieën kunt bereiken met minder weerstand en meer controle tijdens de procedure. De groeven worden na de warmtebehandeling geslepen om de scherp te van de snijkanten te behouden.

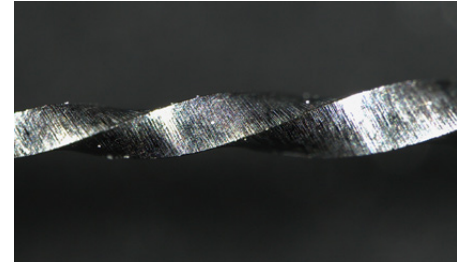

Afbeelding met dank aan Prof. Philippe Sleiman

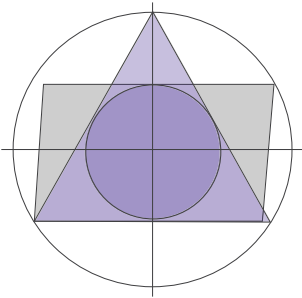


De grote oppervlakken op de ZenFlex ONE driehoekige 3-punts snijranden, verspreid over elke 120 graden, maken het mogelijk om debris effectief coronair te verwijderen.

▲ ZenFlex ONE ■ Vijl van de concurrent ○ Kanaal


Sneller klaar

De kleinere maximale flute diameter van 1 mm van de ZenFlex ONE, gecombineerd met de driehoekige doorsnede met 3 gelijkzijdige snijkanten, resulteert in een verbeterde snijprestatie.

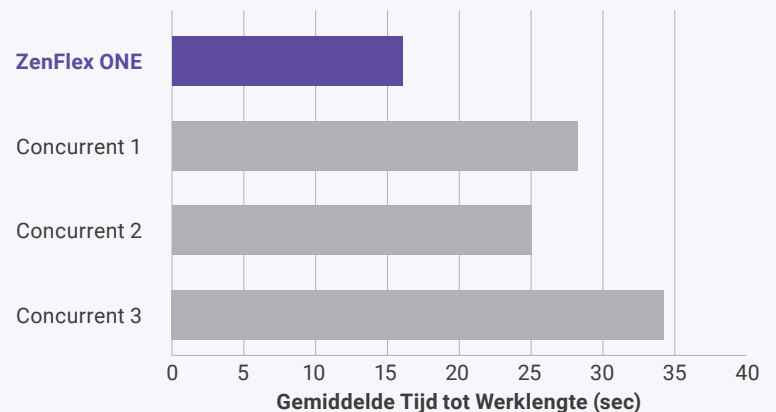

Behoud meer dentine voor een sterkere wortel

De maximale fluitdiameter en een niet-snijdende punt werken samen om transportatie te minimaliseren en de integriteit van de tandstructuur te behouden. Het ontwerp van de maximale fluitdiameter (1 mm) van ZenFlex ONE en een niet-snijdende punt minimaliseren transportatie en behouden meer tandstructuur dan traditionele continu getaperde en progressief getaperde vijlen.

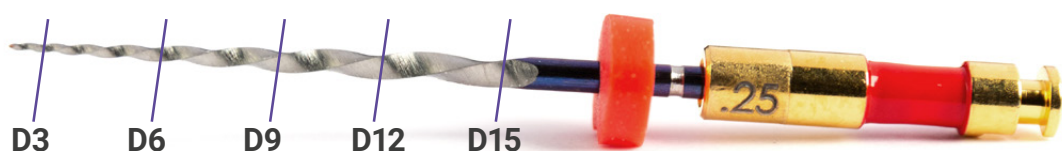

Uitzonderlijke Flexibiliteit

ZenFlex ONE is ontworpen met een gepatenteerde, maat-specifieke warmtebehandeling die uitstekende flexibiliteit mogelijk maakt voor bochten tot 90° voor alle maten.



Minimaliseer het compromis tussen flexibiliteit en torsiekracht met het ZenFlex ONE Reciprocating File System.


Kanalen gevormd en gevuld door het ZenFlex ONE systeem, elements™ Connect en Apex Connect.



Cyclische vermoeidheid

De ZenFlex ONE vijlen hebben 38% meer weerstand tegen cyclische vermoeidheid in vergelijking met concurrerende vijlen van de overeenkomstige grootte.

Cyclische vermoeidheid in de loop van de tijd

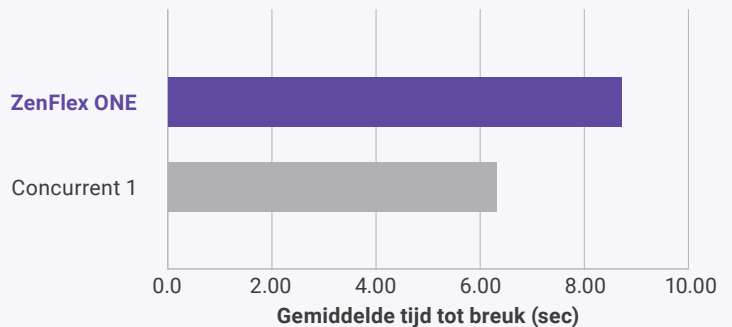

Testimonial

“ Terwijl andere vijlen te stijf of te traag aanvoelden om door een kanaal te gaan, heeft de ZenFlex ONE een geweldige balans van flexibiliteit, sterkte en snijefficiëntie, waardoor ik het met vertrouwen in een breed scala aan gevallen kan gebruiken. ”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Download
Dr. Mashtoub
klinische casus

ZenFlex ONE Reciprocierend vijlsysteem

Perfekte balans tussen efficiëntie, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Gutta Percha Points en Paper Points

- Corresponderende Gutta Percha komt overeen met kanalen gevormd door ZenFlex ONE Reciprocating vijlen.
- De kleuren van de Gutta Percha corresponderen met de kleuren van de ZenFlex ONE vijlen.
- Paper Points beschikbaar



Bestelinformatie

ZenFlex™ ONE

NiTi Shaping Files - Refill 3 stuks

Maat		21 mm	25 mm	31 mm
Small	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



ZenFlex™ ONE

Gutta Percha Points - 50 stuks

Maat		Ref. No.
Small	20/06	825-9720
Primary	25/06	825-9725
Medium	35/06	825-9735
Large	45/06	825-9745

ZenFlex™ ONE

Paper Points - 100 stuks

Maat	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Wilt u meer te weten komen over de Endo oplossingen van Kerr?
Neem dan contact op met uw Kerr vertegenwoordiger.



Voor extra flexibiliteit en controle, **ZenFlex ONE werkt met uw favoriete endodontische motor en handstukken**