

New



ZenFlex™ ONE

Sistema de Limas Reciprocante

Com o equilíbrio perfeito entre durabilidade e alta eficiência de corte.
A Zenflex One dá-lhe mais confiança e um acabamento suave no qual pode confiar



Alta Eficiência de Corte

O tratamento térmico patenteado e o design de secção transversal triangular preservam os rebordos cortantes afiados das estrias que permitem que atinja a longitude total de trabalho com menos resistência e mais controle durante o procedimento.



Minimamente Invasiva

O diâmetro da estria, de 1mm como máximo, e a ponta não ativa, minimizam a transportação e preservam a estrutura integral do dente



Força excepcional

A resistencia á torsão e á fadiga ciclica minimiza a fratura e reduz a transportação



Pontas de Gutta Percha e Papel Compatíveis

As pontas de gutta percha e papel coincidem com os canais instrumentados pelas limas reciprocantes ZenFlex ONE



Kerr™

Confiança, rapidez, suavidade

O tratamento térmico patentado e o desenho de secção transversal triangular preservam os rebordos afiados das estrias, o que permite alcançar a longitude de trabalho completa de forma rápida inclusive em geometrias radiculares complexas, com menos resistencia e mais controle durante o procedimento. As estrias retificam-se depois do tratamento térmico para preservar o fio dos rebordos de corte.


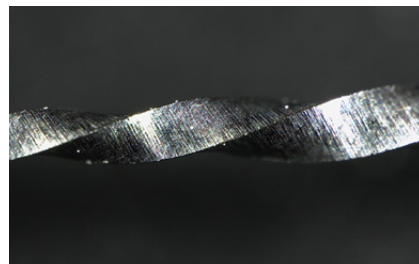


Imagem cortesia do Prof. Philippe Sleiman

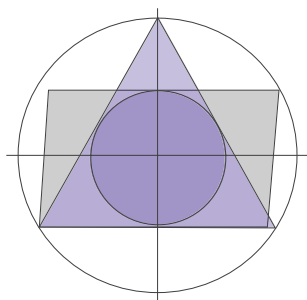

As grandes áreas que ficam nos rebordos de corte triangulares de 3 pontos de ZenFlex ONE, distribuidas cada 120 graus, permitem extrair os residuos de maneira efetiva na direcção coronal.


▲ ZenFlex ONE

■ Lima da concorrência

○ Canal


Termine mais rápido

O diametro máximo da estria de ZenFlex ONE, de 1 mm, combinado com a secção transversal triangular com 3 rebordos equiláteros de corte, resulta em maior desempenho de corte.

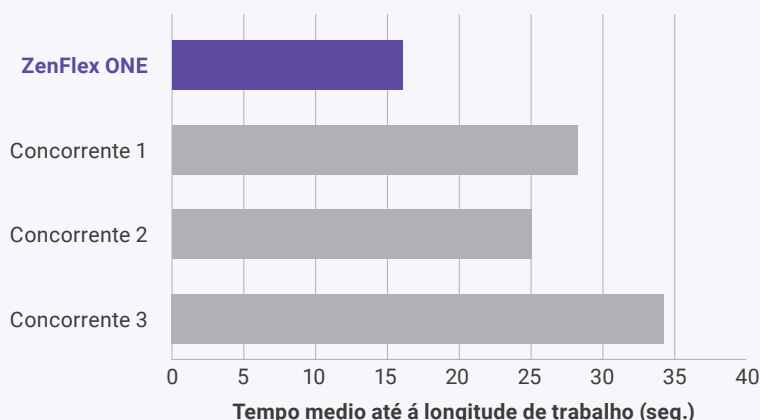

Preservar mais dentina para uma raiz mais forte

O diâmetro máximo da estria e a ponta inativa trabalham em conjunto para minimizar a transportação e preservar a integridade da estrutura dentária. O desenho da estria (1 mm máximo) de ZenFlex ONE e a ponta inativa minimizam a transportação e preservam mais a estrutura dentária que as limas tradicionais de conicidade continua e progressiva.

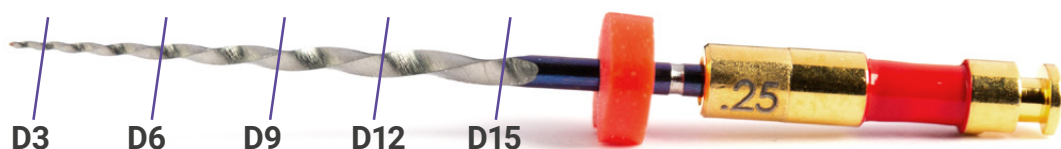

Flexibilidade excepcional

ZenFlex ONE está desenhada com um tratamento térmico patenteado específico para cada tamanho que permite uma excelente flexibilidade para curvas até 90° em todos os tamanhos.




Minimize o equilíbrio entre flexibilidade e resistência á torsão com o sistema de limas recíprocantes ZenFlex ONE.

Canais instrumentados e obturados com o sistema ZenFlex ONE, elements™ Connect y Apex Connect.



Ciclo de fadiga

As limas ZenFlex ONE têm 38% mais de resistência á fadiga cíclica em comparação com as limas da concorrência do tamanho correspondente.

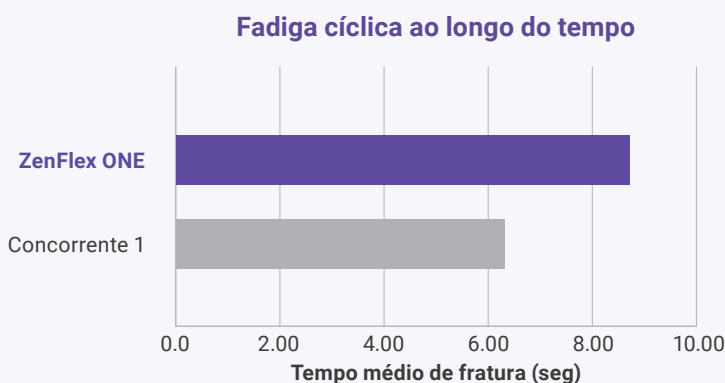

Testemunho de clientes

“ Enquanto que outras limas pareceram-me demasiado rígidas ou demasiado lentas para avançar pelo canal, ZenFlex ONE conseguiu um excelente equilíbrio entre flexibilidade, resistência e eficiência de corte, o que me permite usá-la com confiança numa ampla variedade de casos. ”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



Download
Dr. Mashtoub
clinical case

Missing
Translation

Sistema de Limas Reciprocantes ZenFlex ONE

Equilíbrio Perfeito de Eficiência, Fiabilidade e Acessibilidade

Pontas de Gutta Percha e Papel

- A gutapercha correspondente adapta-se aos canais instrumentados com as limas reciprocantes ZenFlex ONE.
- Pontas de gutapercha de cor para corresponder com as limas ZenFlex ONE.
- Pontas de papel disponíveis.



Informação para Pedidos

ZenFlex™ ONE

NiTi Shaping Files - Caixa de 3

Tamanho		21 mm	25 mm	31 mm
Pequeno	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Principal	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medio	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Grande	45/06	818-2630	818-2631	818-2632



ZenFlex™ ONE

Gutta Percha Points - Caixa x 50

Tamanho	Ref. No.
Pequeno	825-9720
Principal	825-9725
Medio	825-9735
Grande	825-9745

ZenFlex™ ONE

Gutta Paper Points - Caixa x 100

Tamanho	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Para obter mais informação sobre Kerr Endodontic Solutions, contate com o seu representante de Kerr.



Para maior flexibilidade e controle, **ZenFlex ONE funciona com o seu motor e peças de mão de endodontia preferidos.**