

New



ZenFlex™ ONE

Resiprokasyonlu Eğe Sistemi

Mükemmel dayanıklılık ve yüksek kesme verimliliğinin dengesiyle. ZenFlex ONE size daha fazla güvenebileceğiniz pürüzsüz bir bitiş sağlar.



Yüksek Kesme Verimliliği

Özel ısı işlemi ve üçgen kesit tasarımı, yivlerin keskinliğini korur. Bu sayede, işlem sırasında daha az dirençle ve daha fazla kontrolle tam çalışma uzunluğuna ulaşabilirsiniz.



Minimum İnvaziv Müdahale

Maksimum 1 mm yiv çapı ve kesici olmayan bir uç, taşımayı en aza indirmek ve dişin yapısal bütünlüğünü korumak için birlikte çalışırlar.



Olağanüstü Güç

Burulma gerilimine ve döngüsel yorulmaya karşı dayanıklı olduğundan minimum kırılma ve daha az taşımaya imkan verir.



Uyumlu Güta Perka ve Konları

Güta Perka ve Konları, ZenFlex ONE Resiprokasyonlu Eğeler tarafından şekillendirilen kanallarla uyumludur.




Kerr™

Güvenli, hızlı, pürüzsüz

Özel ısı işlemi ve üçgen kesit tasarımı, yivlerin keskin kenarlarını korur. Bu sayede, işlem sırasında daha az dirençle ve daha fazla kontrolle, karmaşık kök geometrilerinde bile tam çalışma uzunluğuna hızla ulaşabilirsiniz. Kesici kenarların keskinliğini korumak için yivler ısı işleminden sonra şekillendirilir.



Image courtesy of Prof. Philippe Sleiman

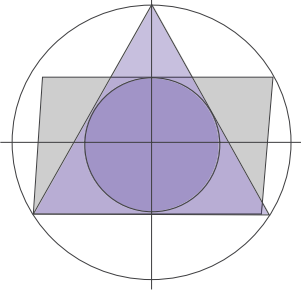

ZenFlex ONE'in üçgen 3-nokta kesici kenarlarında, her 120 derecede bir yayılan geniş alanlar, debrizin etkili bir şekilde koronal yönde çıkarılmasını sağlar.


▲ ZenFlex ONE

■ Rakip eğe

○ Kanal


Daha hızlı bitir

ZenFlex ONE'in maksimum yiv çapının 1 mm olması ve üç kesici eşkenar kenarlı üçgen kesit tasarımı, artan kesme performansı sağlar.

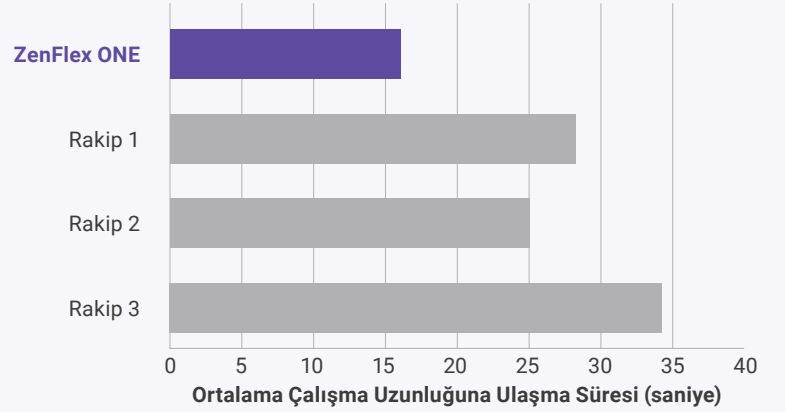

Daha güçlü bir kök için daha fazla dentin koruyun

ZenFlex ONE'in maksimum yiv çapı ve kesici olmayan ucu, taşımayı minimize etmek ve diş yapısının bütünlüğünü korumak için birlikte çalışır. ZenFlex ONE'in maksimum yiv çapı (1 mm) tasarımı ve kesici olmayan ucu, taşımayı minimize eder ve geleneksel sürekli konik ve kademeli konik eğelerden daha fazla diş yapısını korur.

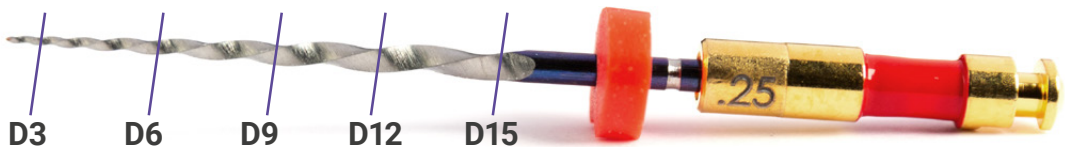

Mükemmel esneklik

ZenFlex ONE, tüm boyutlar için 90° kavislere kadar mükemmel esneklik sağlayan ısıl işlem görmüş tescilli tasarıma sahiptir.




ZenFlex ONE Resiprokasyonlu Eğe Sistemi ile Esneklik ve Torsiyonel Güç Arasındaki Dengeyi Kurun.

ZenFlex ONE sistemi, elements™ Connect ve Apex Connect ile şekillendirilen ve obtürasyon sağlanan kanallar



Döngüsel yorgunluk

ZenFlex ONE eğeleri, karşılaştırılabilir boyuttaki rakip eğelere göre döngüsel yorgunluğa %38 daha fazla direnç gösterir.

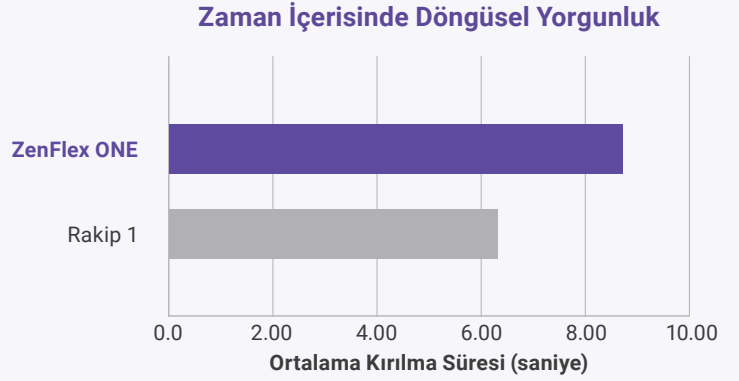

Müşteri görüşleri

“ Diğer eğeler ile bir kanal boyunca ilerlemek için çok sert veya çok yavaş hissetmişken, ZenFlex ONE esneklik, güç ve kesme verimliliği açısından harika bir denge sağladı, bu nedenle onu çeşitli vakalarda güvenle kullanabiliyorum. ”

Dr. Ferras Mashtoub, DDS



İndirebilirsiniz
Dr. Mashtoub
klinik vaka


ZenFlex ONE Resiprokasyonlu Eğe Sistemi

Verimlilik, Güvenilirlik ve Uygun Fiyatın Mükemmel Dengesi

Need revision, it only refers to Gutta Percha and does not mention Paper points

Güta Perka ve Konları

- ZenFlex ONE Resiprokasyonlu eğelerle şekillendirilen kanallara uygun Güta Perka.
- ZenFlex ONE eğelerine uygun renk uyumlu Güta Perka Konları.
- Güta Perka Konları mevcut.

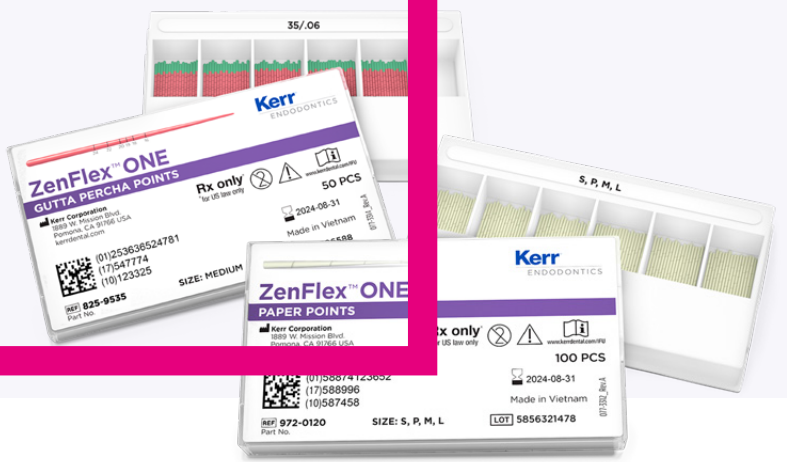

Sipariş bilgileri

ZenFlex™ ONE

NiTi Şekillendirme Eğeleri - 3'lü Paket

Boyut	21 mm	25 mm	31 mm
Small	20/06	818-2621	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2632



ZenFlex™ ONE

Güta Perka Konları - 50'li Paket

Boyut	Ref. No.
Small	20/06
Primary	25/06
Medium	35/06
Large	45/06

ZenFlex™ ONE

Paper Points - 100'li Paket

Boyut	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Mixing
Tramline

Kerr Endodontik çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Kerr temsilcinizle iletişime geçin



Ekstra esneklik ve kontrol için, ZenFlex ONE tercih ettiğiniz endodontik motor ve el aletleri ile çalışır.

Kerr Türkiye İletişim Ofisi | Seba Office Boulevard | Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 D-Blok, Kat:6, Daire 44
34485 Sarıyer | İstanbul | Türkiye | kerrdental.com

©2025 Kerr Corporation. Tüm markalar ilgili sahibinin ürünüdür. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Tüm Hakları Saklıdır.. MKT-25-0294-TR Rev-0

Kerr™