

smartPen

Die neuen monopolaren Elektrodenhandgriffe
Touch and feel the difference!

smartPen

Hochwertige Premium-Elektrodenhandgriffe für Ihre tägliche Arbeit im OP

Die Anwendung der HF-Chirurgie ist im OP-Alltag unabdingbar. Neben der bipolaren Arbeitsweise zum Beispiel mit bipolaren Pinzetten, werden monopolare Elektrodenhandgriffe in Verbindung mit einer Aktivelektrode zum Schneiden, Präparieren und Koagulieren eingesetzt.

Mit der neuen Generation an Elektrodenhandgriffen gibt KLS Martin dem Anwender ein Arbeitsmittel an die Hand, das den heute gestellten ergonomischen Anforderungen Rechnung trägt.

- ✓ Ergonomisch
- ✓ Hochwertig
- ✓ Sicher

Überblick smartPen-Elektrodenhandgriffe


| Art.-Nr. | Elektroden-Aufnahme | Aktivierung | Gerätestecker |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Elektrodenhandgriffe mit fest angeschlossenem Kabel | | | |
| 80-217-13-04 | 4,0 mm | 2 Tasten | KLS Martin |
| 80-210-13-04 | 4,0 mm | 2 Tasten | Internationaler 3-Pin |
| 80-210-18-04 | 4,0 mm | 2 Tasten | Erbe VIO, ICC, ACC |
| 80-217-05-04 | 4,0 mm | 1 Taste | KLS Martin |
| 80-220-02-04 | 4,0 mm | ohne Taster, über Fußschalter | KLS Martin |
| 80-220-41-04 | 4,0 mm | ohne Taster, über Fußschalter | Bovie |
| 80-220-31-04 | 4,0 mm | ohne Taster, über Fußschalter | Erbe VIO, ICC, ACC |
| 80-210-21-04 | 2,4 mm | 2 Tasten | Internationaler 3-Pin |
| 80-210-23-04 | 2,4 mm | Wippschalter | Internationaler 3-Pin |
| Elektrodenhandgriffe mit abnehmbarem Kabel | | | |
| 80-227-00-04 | 4,0 mm | 2 Tasten | - |
| Anschlusskabel | | | |
| 80-227-01-04 | - | - | KLS Martin |
| 80-227-02-04 | - | - | Erbe VIO, ICC, ACC |
| Dentalhandgriffe mit fest angeschlossenem Kabel | | | |
| 80-214-13-04 | 1,6 mm | 1 Taste | KLS Martin |
| 80-214-12-04 | 1,6 mm | ohne Taster, über Fußschalter | KLS Martin |

Die Features auf einen Blick

Ergonomisch unschlagbar, liegt gut in der Hand. Überzeugen Sie sich selbst!

Aktivierung von Cut und Koag

mit Hilfe von Pushbuttons oder Wippschalter.
Hochwertig und langlebig.

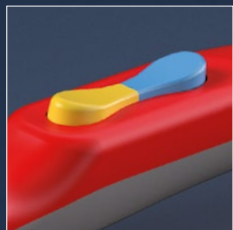

Hochwertige Materialien


- Hohe elektrische Spannungsfestigkeit
- Große Anzahl an Sterilisationszyklen
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel

Knickschutz

am Übergang zum Kabel*

Hochwertiges Kabel,

Kabellänge 4 m

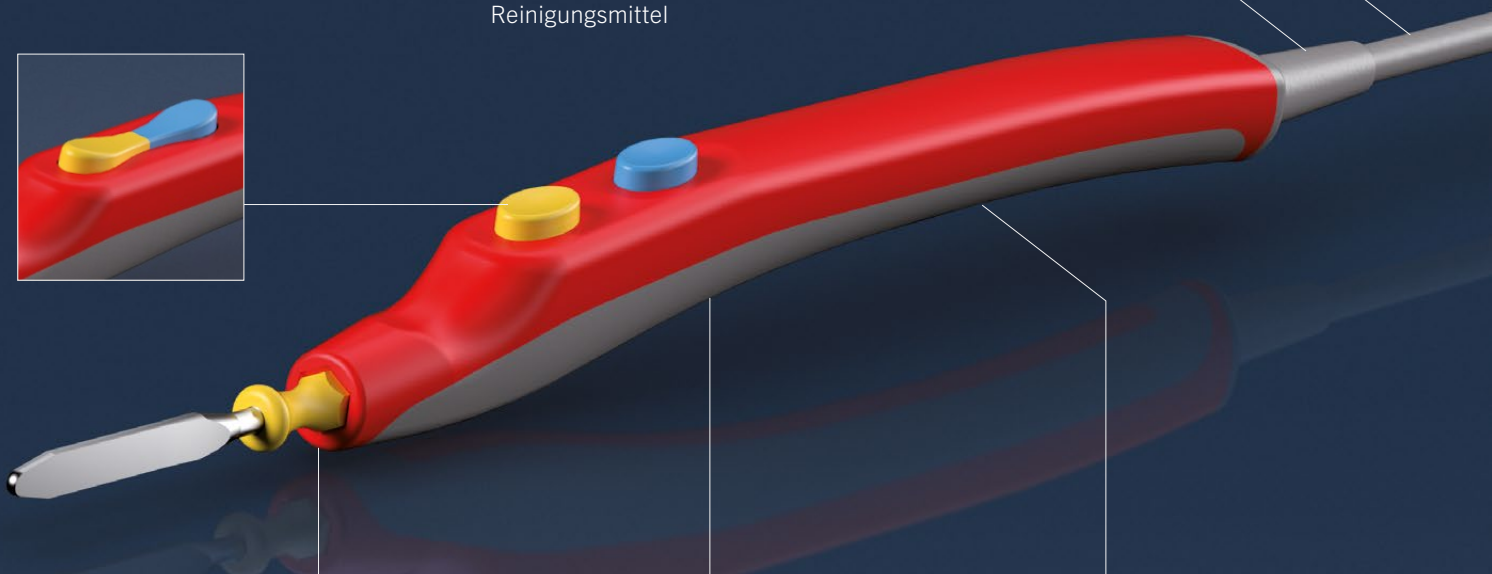

Elektrodenaufnahme


mittels Sechskant für Elektroden mit Ø 2,4 und 4,0 mm

Runde Aufnahme für Elektroden mit Ø 1,6 mm

Hochwertige Weichteilkomponente

Damit Sie den Handgriff immer sicher in der Hand behalten.

Ergonomisch taillierter Handgriff

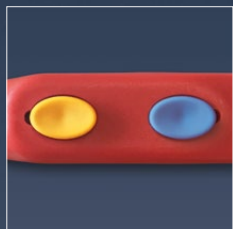

Die Öffnungen sind Bestandteil des Reinigungskonzeptes und stellen sicher, dass kleinste Mengen an Flüssigkeit während des Reinigungsprozesses wieder abfließen können.

Unterschiedliche Gerätestecker

für Anschlussbuchsen verschiedener Gerätehersteller



* bei entsprechenden Modellen kann der Elektrodenhandgriff vom Kabel getrennt werden.

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel.: +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

London · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Wissen Sie, wie Sie alle wichtigen Informationen
über die KLS Martin „Energy Devices“ erhalten?

Bitte laden Sie KLS Martin App Energy Devices herunter!
Die App ist für Android und iOS verfügbar.



[https://itunes.apple.com/de/app/
klsmartin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8](https://itunes.apple.com/de/app/klsmartin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8)



[https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.klsmartin.energydevices](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klsmartin.energydevices)

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

